

Graciella®

Gynekologické křeslo



Žena v centru pozornosti a péče

Žena v centru pozornosti a péče

Preventivní vyšetření patří k nejčastějším aktivitám v gynekologických ambulancích. Gynekologické křeslo Graciella® umožňuje ergonomickou práci lékařů s pacientkou a funkční konstrukční prvky jsou uzpůsobené pro vyšší pohodlí a bezpečnost na straně pacientky.

31% žen

navštěvuje gynekologa 1× ročně. 52% žen navštíví lékaře méně často, nepravidelně nebo vůbec.⁽¹⁾

Rakovina děložního čípku

je celosvětově čtvrtým nejčastějším typem rakoviny u žen.⁽²⁾ Preventivní vyšetření a léčba pre-rakovinných útvarů u žen do 30 let je nejefektivnějším způsobem prevence této nemoci.⁽³⁾



Základní vyšetření včetně ultrazvuku na jednom místě a s vysokou mírou ergonomie.



Unikátní konstrukční prvek dvou sloupů umožňuje snadné polohování křesla a variabilitu poloh.



Elegantní design přispívá ke zvýšené důvěře před a během vyšetření.





Jednoduchá manipulace

V gynekologické ordinaci vyšetří lékař v závislosti na dalších faktorech cca 20 pacientek denně. Pro každý úkon proto hraje roli ergonomie a intuitivnost zařízení ordinace, zejména gynekologického křesla. Graciella® je do detailu navržena s ohledem na časovou náročnost práce gynekologů a ergonomii.



*Ruční ovladač
Rotační mechanismus umožňuje
přístup k ovládači z různých stran.*



Ultrazvuk přímo na křesle

Křeslo je možné jednoduše nastavit do rovné polohy a pacientku může lékař vyšetřit ultrazvukem bez nutného přesunu na vyšetřovací lehátko.



Nožní ovladač umožňuje
rychle nastavení křesla
i během vyšetření.

Přednastavené polohy

Pomocí přednastavených poloh jsou k dispozici dvě nejčastější polohy křesla.



Nástupní poloha



Vyšetřovací poloha

Polohování nožních opěrek

Rozsah poloh umožňuje pohodlné nastavení nožních opěrek podle potřeb lékaře a s komfortem pro pacientku.



Navrženo pro ženy

Gynekologická prevence patří k jedním z pravidelných úkonů v životě každé dospělé ženy. Příjemné prostředí a pohodlí podporuje důvěru pacientek.

Pomáhá, ale nepřekáží

Stupínek, který může pacientce pomoci při nástupu do křesla, je navržen s otočným mechanismem. Lze ho přesunout stranou, aby nepřekážel při vyšetření.



Design křesla, ergonomické tvarování a měkké polstrování přispívá ke komfortu pacientek.



Bezpečný nástup do křesla umožňuje stupínek a výškové nastavení.



Příjemný design

Variabilita poloh umožní přizpůsobit křeslo fyzické dispozici každé pacientky. Pohodlí zajišťuje také měkké polstrování a ergonomický tvar křesla. K dispozici je také integrovaná opěrka hlavy.




Podnožní opěrky na míru

Pro křeslo Graciella® je navržena sada podnožních opěrek volitelná podle účelu, zaměření či zvyklostí při gynekologických vyšetření v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Opěrky lze nastavit podle potřeb pacientky a lékaře.



*Opěrky
nohou dle
Goepela*

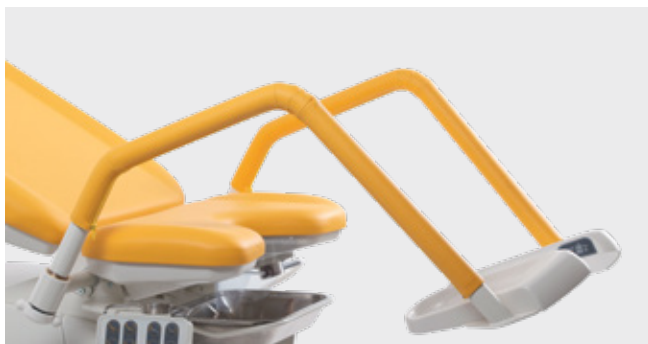

*Standardní
opěrky
nohou*

Pilíře hygieny a snadné očisty

Graciella® je vybavena unikátní sloupovou konstrukcí. Hlavní funkce teleskopických, elektricky poháněných sloupových jednotek je snadné výškové nastavení. Další přidanou hodnotou tohoto konstrukčního řešení jsou výjimečné hygienické parametry.

Rezistence sloupu vůči nečistotám

Na povrchu sloupu vyrobeného z hliníku upraveného elektrolytickou oxidací je permanentní tenký film mazacího přípravku. Prostor mezi jednotlivými válci výsuvného teleskopického sloupu je vyplněn plastovými distančními vložkami, díky nimž nečistota nemá žádnou příležitost proniknout dovnitř sloupu.



Sloupová jednotka má díky jednoduchému tvaru a hladké povrchové úpravě veškeré předpoklady pro snadnou hygienu.

Elegantní systém dvou sloupů vytváří v prostoru mezi ložnou plochou a podvozkem prostor, který lze využít k dokonalé dekontaminaci celého křesla.

Hygiena polstrování

Do unikátního hygienického konceptu křesla Graciella® patří také bezešvé polstrování. Materiál je uzpůsoben snadné dekontaminaci běžnými hygienickými prostředky.



Výsuvné kolečko

Díky výsuvnému kolečku na podvozku křesla je snadné s křeslem manipulovat v rámci ambulance. Zejména během úklidu podlahy okolo křesla a také pod ním.

Designové řešení

Graciella® je gynekologické křeslo s unikátní sloupovou konstrukcí. Díky elegantnímu designu a ergonomickým funkcím pomáhá křeslo Graciella® vytvořit důvěryhodné a moderní prostředí pro gynekologické vyšetření.






Příslušenství




Nástupní schůdek

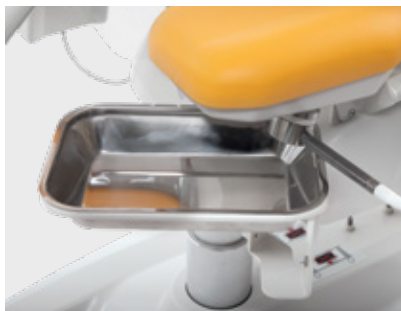

Miska z nerezové oceli



Plastová miska

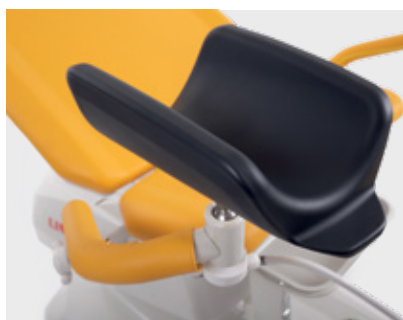

Goepel schaut – opěrka nohou



Částečně čalouněná podpěra nohou



Čalouněná podpěra nohou



Držák na roli papíru (standard)



Držák na kolposkop



Podnožní díl




EU lišta na zavěšení sáčků



Držák na infúzní stojan




Plochý podhlavník

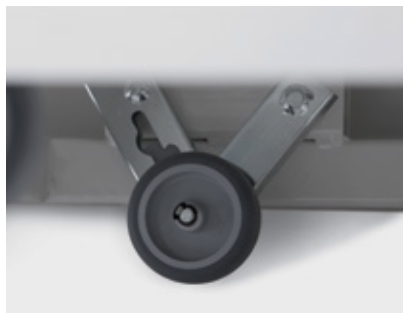


Manipulační kolečka



Plastová ochrana spodní části křesla

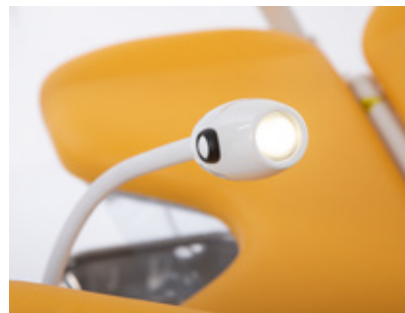


LED lampa

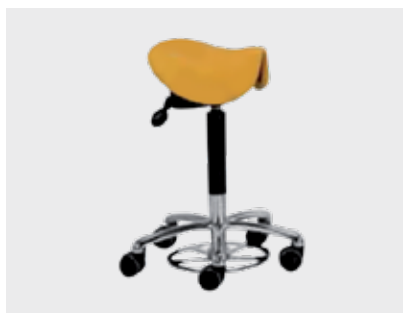

Ergonomická židlička pro lékaře, výškově nastavitelná, aretace nohou



Židlička pro lékaře, výškově nastavitelná, aretace rukou

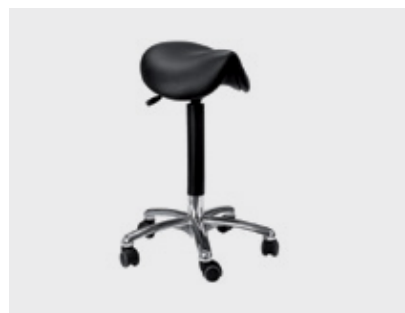

Ergonomická židlička pro lékaře, výškově nastavitelná, aretace rukou

Barevné řešení



A – Fialová



B – Brilantově modrá



F – Oceánově zelená



M – Kukuřicově žlutá



P – Oranžová

Přehled a technické parametry

Polohovatelná
sedací část

Ruční ovladač
s otočným
mechanismem

Stupínek
s otočným
mechanismem





Podnožní opěrky

Lineární sloupová jednotka

Nožní ovladač



Mechanické specifikace

Maximální délka křesla (bez opěr noh)	1316±10mm
Maximální délka křesla (s opěrami noh)	1750±10mm
Maximální délka křesla (s opěrami noh typu Goepel)	1486±10mm
Maximální délka křesla (s 2 kloub opěrami noh typu Goepel)	1518±10mm
Celková šířka (přes podpěry nohou)	760±5 mm
Šířka polstrování (max.)	622±5 mm
Tloušťka polstraování	30±2 mm
Výška sedáku v dolní – nástupní poloze	628±5 mm
Max. výška sedáku (přední hrana)	1050±5 mm
Úhel nastavení zadového dílu vůči sedacímu dílu	0°±2°/+40°±2°
Úhel nastavení sedacího dílu	0°±2°/+20°±2°
Poloha trendelenburg	-12°±1°
Výška šlapky nad zemí min.	326±10 mm
Pacientské zatížení	180 kg
Maximální zatížení křesla	190 kg
Povolené zatížení podpěr nohou	32 kg
Hmotnost křesla (v závislost na konfiguraci)	95 – 105 kg
Povolené zatížení držáku misky	10 kg
Maximální zatížení EURO lišty	15 kg
Objem závěsné misky	2,4 l
Krytí	IPX4
Krytí nožního ovladače	IPX6
Způsob provozu	Int.2/18 min
Hladina hluku	Menší než 48 dB (A)

Elektrické specifikace

Napětí	100 V AC / 110 V AC / 120 V AC / 127 V AC / 230 V AC
Frekvence	50/60 Hz
Napětí motoru	24 V AC
Ochrana proti vniknutí vody	IPX4
Třída ochrany zařízení	I.
Klasifikace příložných částí	B
Maximální příkon	370 VA
Pojistky křesla	2x T1,6AL 250V

Benefity

Pacientka

- Gynekologické i ultrazvukové vyšetření na jednom křesle
- Jednoduchý nástup do křesla
- Komfort a příjemný design



- Ergonomie práce při vyšetření
- Rychlé nastavení nejčastějších poloh
- Všechna základní vyšetření na jednom křesle



Lékař

Management

- Moderní a důvěryhodný design křesla
- Jednoduchá údržba a očista
- Rozšíření funkčnosti díky rozsáhlé sadě příslušenství



Reference

- (1) Frequency women worldwide visited or consulted an obstetrician or gynecologist as of 2018, Global Views On Healthcare –2018, 2018 Ipsos
- (2) Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis; Marc Arbyn, Elisabete Weiderpass, Laia Bruni, Silvia de Sanjosé, Mona Saraiya, Jacques Ferlay, Freddie Bray; Lancet Glob Health 2020; 8: e191–203; Published Online December 4, 2019

- (3) Human papillomavirus (HPV) and cervical cancer, WHO 2019



Members of LINET Group

LINET, spol. s r.o.

Želečice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

