



Softlin **Komfort**

Křesla pro pečovatelské



Softlin Komfort – více než křeslo

Křeslo Softlin Komfort představuje optimální řešení sedacího nábytku pro osoby se sníženou pohyblivostí. Je určeno pro domácí péči, do domovů důchodců i do nemocnic. Díky široké modularitě je možné najít takovou variantu křesla Softlin Komfort, která nejvíce vyhoví Vaším konkrétním potřebám. Navíc můžete vybírat z velkého množství příslušenství.

- VYSOKÁ FUNKČNOST
- MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
- PŘÍJEMNÝ DESIGN
- BEZPEČNOST
- SNADNÁ MANIPULACE
- JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA



KOMFORTNÍ ODPOČINEK

- Tvarované opěradlo pro příjemný odpočinek a výškově nastavitelný podhlavník.
- Současné polohování opěradla a čalouněné lýtkové podnožky pomocí plynové pružiny je velmi snadné.
- Tvar opěradla omezuje nebezpečí posunu trupu a hlavy; sedák lze plynule posunout.
- Náklon může nastavit sám uživatel pomocí pák pod područkami, nebo ošetřující pohybem madla na zadní straně křesla.
- Ergonomický tvar zakončení područek usnadňuje vstávání.

DESIGN A ÚDRŽBA

- Softlin Komfort je nabízen v nejrůznějších variantách potahových tkanin včetně koženek, takže je možné křeslo přizpůsobit jakémukoliv interiéru.
- Čalounění je velmi příjemné a pohodlné a zároveň snadno čistitelné.
- Snímatelné potahy sedáku, opěradla i područek jsou vyrobeny z lehké pratelné textilie.
- Sedák a podnožka jsou pod látkovým potahem čalouněny omyvatelnou koženkou.
- Mezi sedákem a opěradlem je mezera bránící vzájemnému znečištění.

SNADNÝ A BEZPEČNÝ PŘESUN

- Centrální 5. kolečko je v kontaktu s podlahou po zatížení křesla a výrazně usnadňuje manipulaci a zvláště otáčení.
- Křeslo může být vybaveno dvojími kolečky 75 mm se zvýšenou odolností a brzdou. Kolečka jsou otočná i kolem svislé osy, takže umožňují otáčení i ve stísněných prostorách.
- Pohodlí a bezpečnost uživatele zajišťuje deska pro podporu nohou, která navíc brání nechtěnému pohybu křesla při vstávání.
- Bezpečnost rovněž zaručuje použití PUR pěny se samozhášivou úpravou.

SOFTLIN KOMFORT 01

- Pevná a stabilní lakovaná konstrukce z masivního buku.
- Oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění.



SOFTLIN KOMFORT 02

- Pevná a stabilní lakovaná konstrukce z masivního buku.
- Oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění.
- Polohovatelné opěradlo (změna polohy je usnadněna plynovou pružinou).




SOFTLIN KOMFORT 03

- Pevná a stabilní lakovaná konstrukce z masivního buku.
- Oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění.
- Polohovatelné opěradlo (změna polohy je usnadněna plynovou pružinou).
- Lýtková podpora pro zvýšení pohodlí sedící osoby.



SOFTLIN KOMFORT 04


- Pevná a stabilní lakovaná konstrukce z masivního buku.
- Oddělený sedák od opěradla zamezující vzájemnému znečištění.
- Polohovatelné opěradlo (změna polohy je usnadněna plynovou pružinou).
- Lýtková podpora pro zvýšení pohodlí sedící osoby.
- 4 dvojité kolečka s brzdou.
- Centrální kolečko pro snadnou jízdu a manipulaci s křeslem.
- Výklonný díl pro podporu chodidel (zvyšuje pohodlí a bezpečnost).

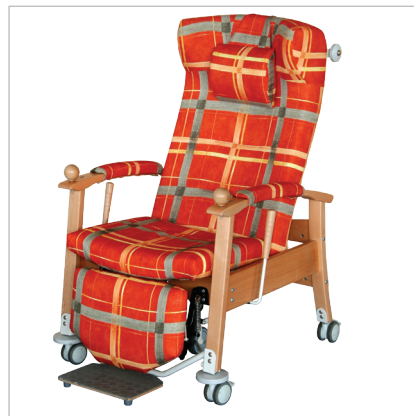

Softlin Komfort – příslušenství



Odnímatelné rukojeti pro snadší vstávání.

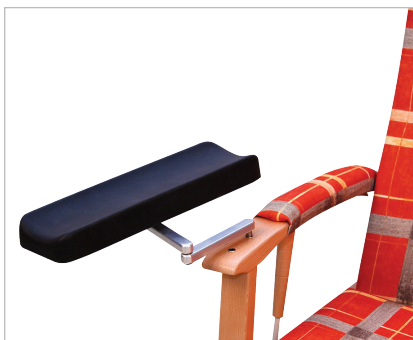

Flexibilní podpěrka ruky.



Výklopná podnožka s úložným prostorem.



Držák berlí s opěrkou pro snadné uchycení a vyjmutí (pro pojízdné křeslo).



Otočná polička se zvýšenými okraji.



Odnímatelná tvarovaná jídelní deska se zvýšenými okraji.



Pohodlné a praktické zároveň jsou snímatelné potahy područek.



Držák berlí pro praktické odložení berlí při sezení.



Držák na noviny a časopisy.



Příruční odkládací kapsa na zadní části opěradla.



Háčky na zadní části konstrukce křesla pro odložení jídelní desky.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka	70 cm
Výška (dle polohy opěradla)	98 – 113 cm
Hloubka (dle napolohování)	72 – 132 cm
Výška sedáku	47 cm
Průměr koleček	7,5 cm
5. centrální kolečko	10 cm
Nosnost	120 kg