

Air2Care

Komfort & prevence dekubitů

Air2Care

Komfort, kvalita a prevence

Variabilní systém Air2Care přináší komfortní řešení pro dlouhodobě hospitalizované klienty a pacienty. Rozšiřuje řadu aktivních alternujících systémů značky LINET a je zárukou evropské kvality.




Air2Care



- Technologie **2** spojených cel.
- **2** varianty systému: Air2Care Overlay (vzduchová vrstva pro kombinaci se stávající matrací) nebo Air2Care Replacement (kompletní samostatná matrace).
- **2** modely systémové kontrolní jednotky.
- **2** řešení pro kompletní 24hodinovou péči – vzduchová matrace a sedák.
- **2** typy aktivní Replacement matrace: spodní vrstva je buď statická vzduchová nebo pěnová.


Variabilní řešení

Přesně podle vašich potřeb

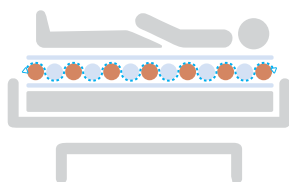


Air2Care model 10
Overlay

(vzduchová aktivní vrstva se používá na stávající matraci)

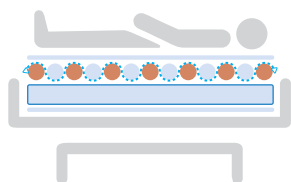


Air2Care model 10
Replacement

(komplet = vzduchová vrstva + pěnová vrstva)

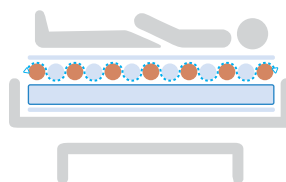

Air2Care model 20
Replacement

(komplet = vzduchová vrstva + pěnová vrstva)

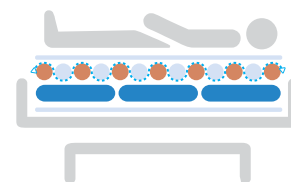


Air2Care model 20
Replacement

(komplet = 2 vzduchové vrstvy)

Air2Care systém

Efektivní a spolehlivý

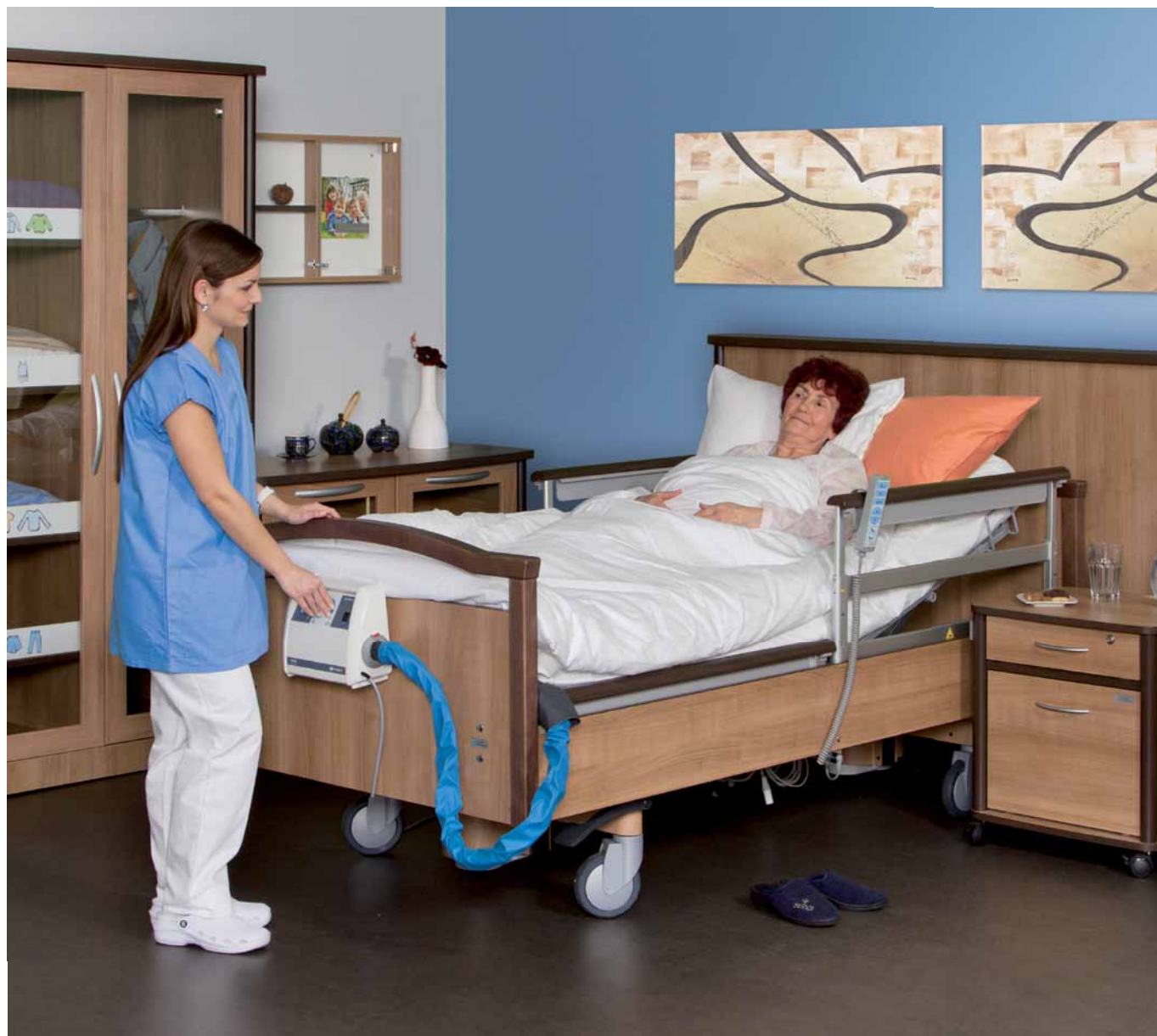

Všechny prvky antidekubitního systému Air2Care maximálně usnadňují dlouhodobou péči. Zařízení je snadno ovladatelné, praktické a vysoce funkční.

System s alternujícím tlakem

Alternující systém Air2Care byl navržen tak, aby splňoval nároky na vysokou efektivitu v prevenci dekubitů až po střední riziko jejich vzniku. Alternující tlaková terapie je založena na technologii dvou spojených cel s intervalem 12 minut.

Air2Care

Kompletní 24hodinová péče



Matrace Air2Care může být doplněna o vzduchový dynamický polštář, který poskytuje pacientovi aktivní prevenci dekubitů i během sezení v křesle. Připojení vzduchové podušky je rychlé a snadné.

Jednoduché a rychlé použití CPR



Intuitivní použití funkce CPR umožňuje rychlé vypuštění matrace a okamžité zahájení resuscitace.

Transportní režim





Transportní režim udrží vzduch v systému až 12 hodin po odpojení ze sítě nebo kontrolní jednotky.

Matrace Air2Care

Variabilní řešení



Replacement systém „air-air“

System plně nahradí běžnou matrací. Unikátní aktivní systém je tvořen dvojitou vzduchovou vrstvou – horní dynamickou a spodní statickou.

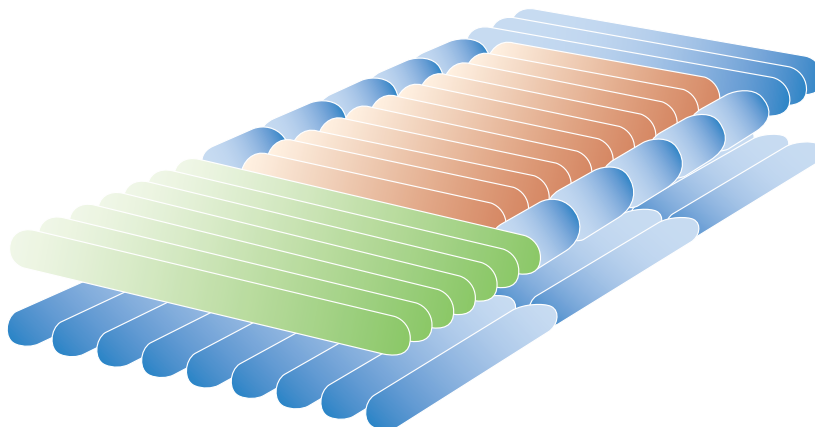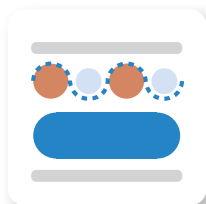



Replacement systém „air-foam“

System plně nahradí běžnou matrací. Je složen z horní vzduchové dynamické vrstvy a spodní pěnové podložky.

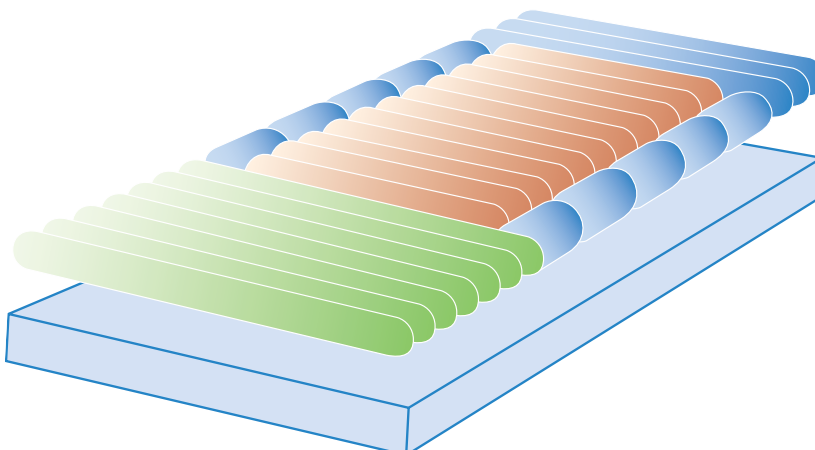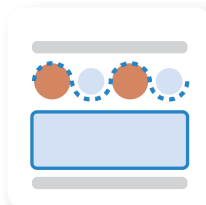

System Overlay

Samostatná vzduchová vrstva se použije v kombinaci se stávající pěnovou matrací.

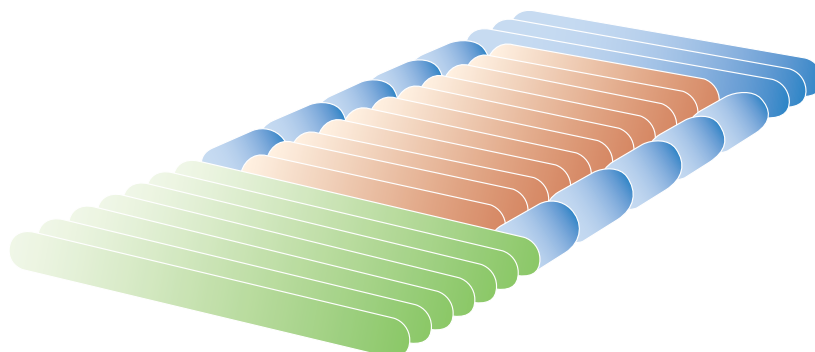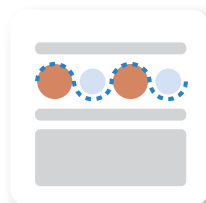

Matrace Air2Care

Moderní konstrukce a flexibilita



Vzduchová vrstva

- Matrace splňuje vysoké nároky na bezpečnost systému. Spojené cely zamezují propadnutí pacienta a usnadňují čištění.
- Pro stabilitu a vyšší komfort pacienta jsou boční vzduchové válce a krajní 3 cely pod hlavou statické.
- Pro optimální ochranu rizikových míst jsou cely v oblasti pat o 25 % menší než ve středu matrace.

Potah

- Kvalitní oboustranně pružný potah chrání systém matrace před proniknutím tekutin. Zároveň díky paropropustnosti materiálu brání nežádoucí maceraci kůže. Dva zipy usnadňují přístup k matraci a jejímu čištění – lze zcela oddělit horní a spodní pevnější potah matrace. Zip je chráněn po celé délce klopou.



Komfortní odpočinek, prevence i podpora léčby

- Matrace A2C jsou vhodné pro zdravotnická i pečovatelská zařízení.
- Podle typu matrace a její konstrukce pomáhá A2C v prevenci vzniku dekubitů, ale může být efektivní podporou i v jejich léčbě.
- Přesto je navržena tak, aby stále poskytovala komfortní odpočinek (spojené cely, přizpůsobení tlaku v celách, možnost nastavení na max. nafouknutí).

Air2Care

Systemová kontrolní jednotka

Malá a tichá ovládací jednotka systému

je vhodná pro použití v domácí péči i v prostředí standardní dlouhodobé péče.

Ergonomický design

ovládací jednotky se závěsným systémem usnadňuje manipulaci a nabízí flexibilitu pro použití s variabilními lůžky.





Model 20

- **PRACOVNÍ REŽIMY:** alternující tlaková terapie (APT), režim s konstantně nízkým tlakem (CLP) a režim s maximálním tlakem (MAX) s 30minutovým intervalem pro automatický návrat do předchozího terapeutického režimu.
- **PRO REŽIMY APT A CLP** lze nastavit úroveň tlaku kontinuálním otáčením regulátoru.
- **ZVUKOVÉ A VIZUÁLNÍ ALARMY** upozorňují na ztrátu napájení, příliš nízký tlak v systému, chybu v alternaci nebo nafukování matrace.



Model 10

- **PRACOVNÍ REŽIMY:** alternující tlaková terapie (APT) a statický režim.
- **TLAK VZDUCHU V SYSTÉMU** lze kontinuálně měnit otáčením regulátoru, oba pracovní módy mají stejné rozpětí tlaků.
- **VIZUÁLNÍ ALARM** pro upozornění na nízký tlak v systému či ztrátu napájení (přerušení síťového napájení).

Technické specifikace



Air2Care model 10

Air2Care 10 kontrolní jednotka	
Rozměry	12×26×21,5 cm
Hmotnost	2,5 kg
Časový interval	12 minut
Alarm	vizuální
Elektrická bezpečnost	v souladu s EN 60601-1 Třída II s aplikovanými částmi typu B


Air2Care model 20

Air2Care 20 kontrolní jednotka	
Rozměry	12×26×21,5 cm
Hmotnost	2,5 kg
Časový interval	12 minut
Alarm	vizuální a zvukový
Elektrická bezpečnost	v souladu s EN 60601-1 Třída II s aplikovanými částmi typu B

Specifikace matrace	
Matrace replacement systém	
Rozměry	200×86×17 cm
Maximální nosnost matrace	200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)
Matrace overlay systém	
Rozměry	200×86×9,3 cm
Maximální nosnost matrace	180 kg
Dynamický sedák	
Rozměry	45×50×12,5 cm
Maximální nosnost sedáku	127 kg

Specifikace matrace	
Matrace replacement systém	
Rozměry	200×86×17 cm
Maximální nosnost matrace	210 kg (dvojitá vzduchová vrstva) 200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)
Dynamický sedák	
Rozměry	45×50×12,5 cm
Maximální nosnost sedáku	127 kg

Produktová mapa aktivních matrací

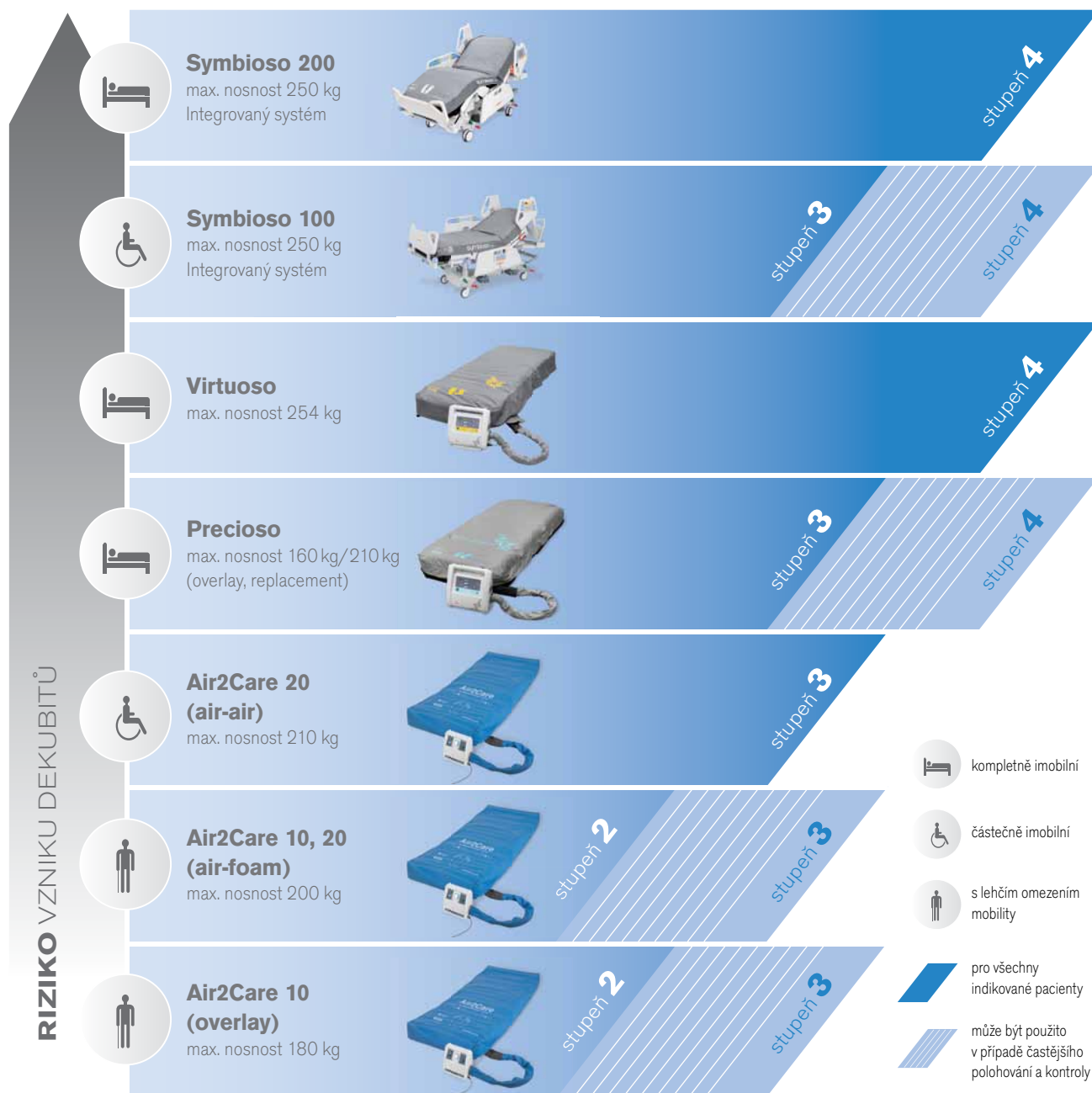

Air2Care

Komfort & prevence dekubitů



Želečice 5, 274 01 Slaný, Česká republika

tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: info@linet.cz, www.linet.cz