

Image 3



exkluzivní design s řešením pro každého

Image 3 exkluzivní design s řešením pro každého

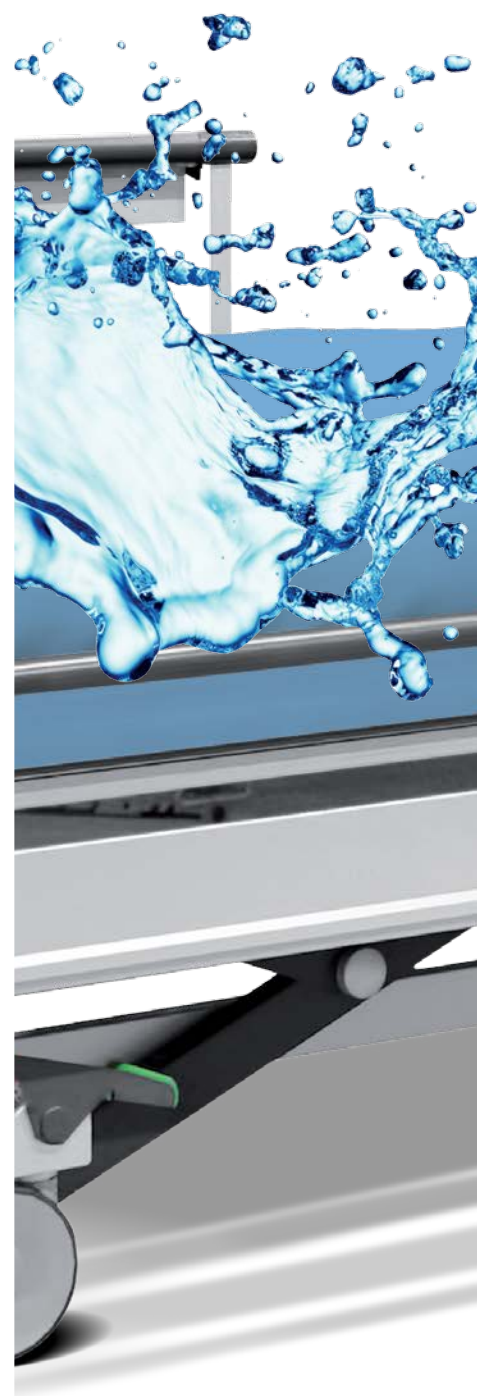


Image 3 Standard



Image 3 Washable



Image 3 XXL

Přínosy Image 3



extra
nízká poloha
28_{cm}



- Extra nízká poloha lůžka pro prevenci pádů
- Podpora samostatné mobilizace
- Unikátní moderní design spojený s vysokým komfortem



Pacient

- Propracovaná ergonomie pro pohodlnou manipulaci
- Automaticky přednastavené funkce
- Snadná hygiena lůžka



Personál

- Univerzální použití – standardní, bariatrická a myčková verze
- Variabilní řešení dle potřeb klientů
- Vyšší úroveň kontroly infekce



Management

Řešení pro každého



Image 3 WASHABLE

Verze lůžka vhodná pro strojní čištění v nemocničních automatických myčkách.

- Konstrukce lůžka prochází speciálními technologickými úpravami pro zvýšení odolnosti a životnosti.

WASHABLE
FRIENDLY

Image 3 STANDARD

Díky modernímu designu má v nemocnicích univerzální uplatnění.

- Výběr provedení, designu a příslušenství podle potřeb konkrétního oddělení.
- Lůžko vytváří příjemný design jak standardních nemocničních oddělení, tak privátních klinik.





Image 3 XXL

Bariatrická varianta vychází vstříc rostoucí poptávce po lůžkách s vyšší nosností.

- Rozšířená ložná plocha.
- Zvýšená nosnost na 320 kg.
- Stabilní bezpečná konstrukce lůžka.

WIDER BED

HIGHER LOAD

Variabilní design

NEMOCNIČNÍ
DESIGN



EXKLUZIVNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
DESIGN



Design lůžka je nadčasový a vhodný pro široké spektrum zdravotnické i ošetrovatelské péče. Image 3 Standard, Washable a XXL splňují nejvyšší nároky na ergonomické principy ve zdravotnictví.



Nemocniční design svou klasickou koncepcí vyhovuje standardní praxi ve zdravotnictví a mimo jiné nabízí variantu se speciální úpravou vhodnou pro automatické mytí v nemocničních myčkách.



Exkluzivní design je umocněn spojením hliníkových prvků a dřevěných dekorů. Elegantní vzhled působí uklidňujícím dojmem a vytváří pro pacienty i personál příjemné prostředí.



Jednoduše řešený design nabízí kompromis unikátních praktických vlastností lůžka v ekonomické variantě.

Pacient v bezpečí

Bezpečnost je pro Image 3 klíčovým parametrem. Všechny funkce lůžka jsou nastaveny tak, aby se pacient nejen bezpečně cítil, ale také skutečně v maximálním bezpečí byl.

Ergoframe®

Systém polohování ložné plochy významně eliminuje riziko vzniku dekubitů.



Hygiena


Díky tvaru a materiálu konstrukce je lůžko snadno čistitelné.



BRAKEAlarm)))


Brzdový alarm

Zvukový signál upozorní ošetřujícího na nutnost zabrzdit lůžko.

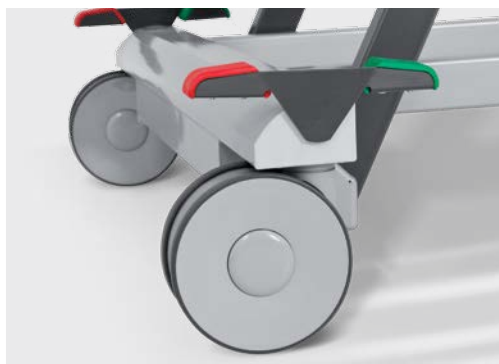

GO tlačítko

Díky bezpečnostnímu konceptu se ovladače lůžka uzamknou po třech minutách nečinnosti.

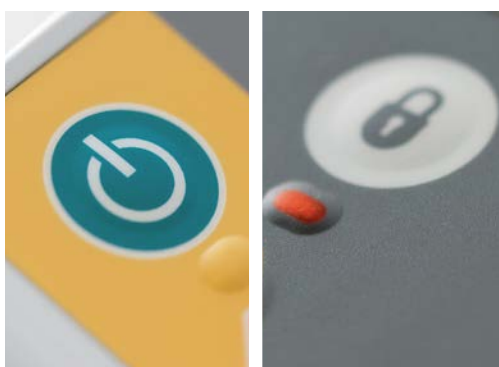

Zámek funkcí

Elektrické funkce lůžka lze jednoduše uzamknout.



Postranice SafeFree®

4 různé nastavitelné výšky postranic. Nevyžadují další prostor vedle lůžka. Postranice jsou po celé délce lůžka.



SafeSense

Lůžkový senzor varuje personál v případě opuštění lůžka pacientem.



Strategie 3 STOP

VYŠETŘOVACÍ
POLOHA



MOBILIZAČNÍ
POLOHA



EXTRA
NÍZKÁ POLOHA





Vyšetřovací poloha

- Nejvyšší poloha lůžka nabízí personálu ideální ergonomické podmínky pro práci.
- Komfortní ošetřovatelské úkony a péče.
- Pozice poskytuje dokonalý přístup k lůžku pro čištění a dezinfekci.

80
cm



Mobilizační poloha

- Naprogramované funkce na ovladači pro snadnou mobilizaci.
- Pozice v kombinaci s madlem postranic usnadňuje a podporuje mobilizaci pacienta.
- Ideální nastavení pro automatické mytí v nemocniční myčce.

40
cm



Extra nízká poloha

- Samostatné tlačítko jako přednastavená funkce na ovladači.
- Prevence pádů.
- Bezpečná poloha při spánku.

28
cm




Praktické detaily

- 1 **Páté kolečko**
napomáhá pohodlné manipulaci ve všech prostorách
- 2 **Integrované prodloužení lůžka**
je možné ve třech stupních dle individuálních potřeb klienta
- 3 **Noční podsvícení**
pro bezpečnou orientaci pacienta
- 4 **3D ochranná rohová kolečka**
chrání lůžko v horizontálním i vertikálním směru
- 5 **Šířka ložné plochy**
volitelná šířka ložné plochy 86 nebo 90 cm s odnímatelnými plastovými díly
- 6 **Polička na lůžkoviny**
může zároveň sloužit pro uložení sesterského ovladače
- 7 **Mechanické CPR**
pro urgentní použití

Barevný koncept

nabízí vysokou variabilitu: kovové nebo plastové části ve stříbrné nebo bílé barvě a čela s výplněmi v dekoru dle vlastní volby.

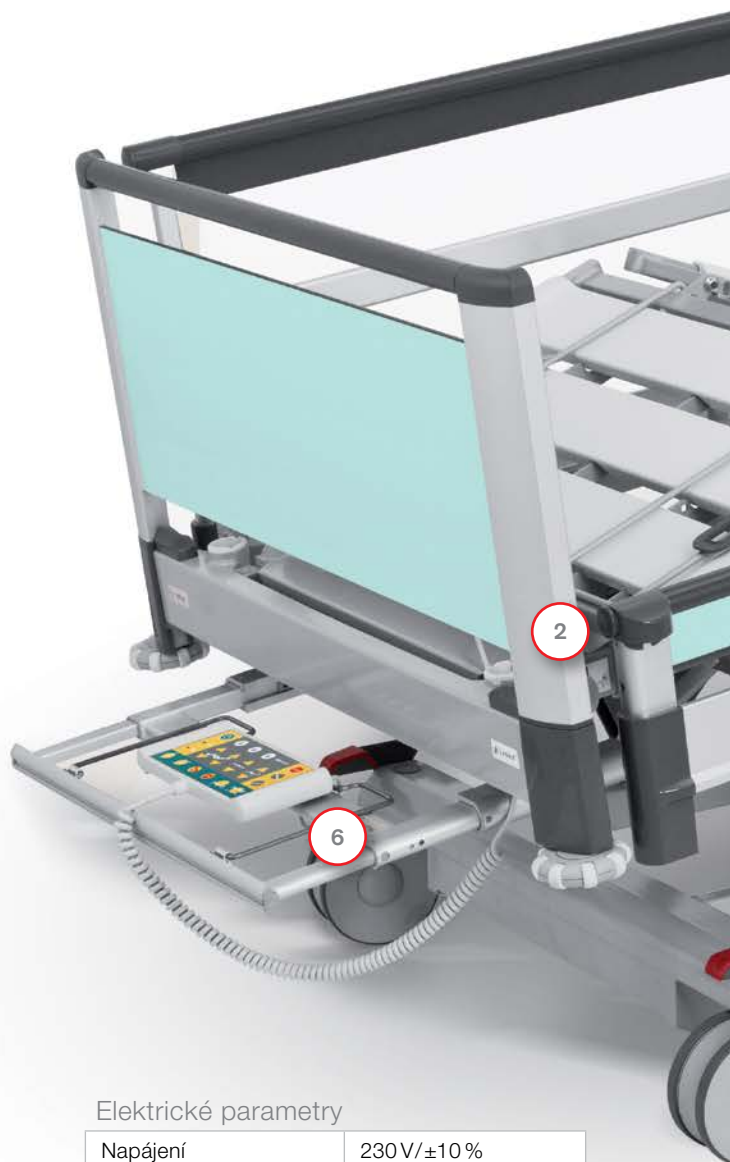

Elektrické parametry

Napájení	230 V/±10 %
Maximum input	max 1,6 A; 370 VA
Ochrana proti vniknutí vody a prachu	IPX4 (IPX6 pro Image 3 Washable)

Certifikáty

Společnost LINET je certifikovaná podle evropských norem a systému kvality: ČSN EN 9001:2000 ČSN EN 13485:2003

Produkty jsou vyrobeny podle evropských norem pro zdravotnickou techniku a nemocniční lůžka: ČSN 60601-1, ČSN 60601-2, ČSN 60601-4, ČSN 60601-2-52, ČSN EN ISO 14941
Image 3 Washable: AK-BWA:2009



Technické parametry

Image 3 (Standard, Washable)

Image 3 (XXL)

Vnější rozměry	221 × 104 cm / 220 × 99,8 cm*	220 × 110 cm*
Rozměry matrace	200 × 86 / 90 cm	200 × 100 cm
Podjezdnost	13 / 15,5 cm	13 / 15,5 cm
Nastavení výšky ložné plochy	28–80 cm	28–80 cm
Prodloužení lůžka	10; 22; 30,5 cm	10; 22; 30,5 cm
Maximální výška matrace	18 cm (dělené postranice); 17 cm (jednodílné sklopné postranice)	26 cm včetně extenderu
Bezpečné pracovní zatížení	265 kg (Standard) / 250 kg (Washable)	320 kg
Hmotnost lůžka	160 kg *, **	160 kg *, **
Náklon zádového dílu	0–70°	0–70°
Náklon stehenního dílu	0–34°	0–34°
TR/ATR náklon	0–14°	0–14°

* dle konfigurace; ** dle příslušenství

Image 3

Pacient

- Extra nízká poloha lůžka pro prevenci pádů
- Podpora samostatné mobilizace
- Unikátní moderní design spojený s vysokým komfortem



- Propracovaná ergonomie pro pohodlnou manipulaci
- Automaticky přednastavené funkce
- Snadná hygiena lůžka



Personál

Management

- Univerzální použití – standardní, bariatrická a myčková verze
- Variabilní řešení dle potřeb klientů
- Vyšší úroveň kontroly infekce



Members of LINET Group

LINET spol. s r. o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



Pacient v bezpečí

Bezpečnost je pro Image 3 klíčovým parametrem. Všechny funkce lůžka jsou nastaveny tak, aby se pacient nejen bezpečně cítil, ale také skutečně v maximálním bezpečí byl.

Ergoframe®

Systém polohování ložné plochy významně eliminuje riziko vzniku dekubitů.



Hygiena



Díky tvaru a materiálu konstrukce je lůžko snadno čistitelné.



BRAKE Alarm


Brzdový alarm

Zvukový signál upozorní ošetřujícího na nutnost zabrzdit lůžko.

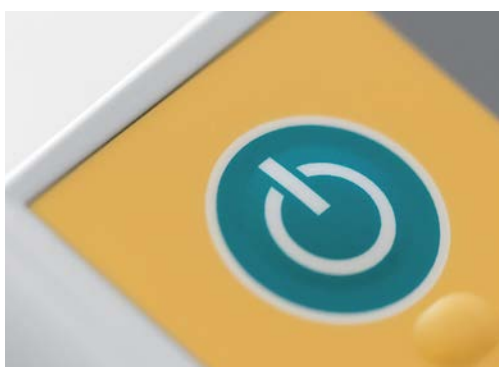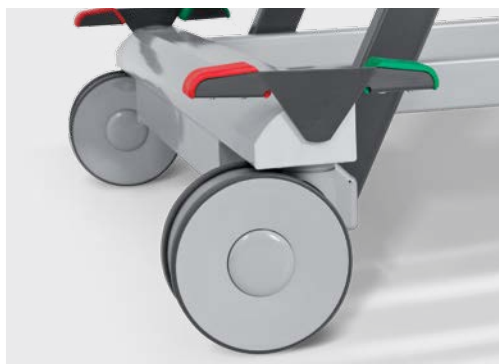

GO tlačítko

Díky bezpečnostnímu konceptu se ovladače lůžka uzamknou po třech minutách nečinnosti.

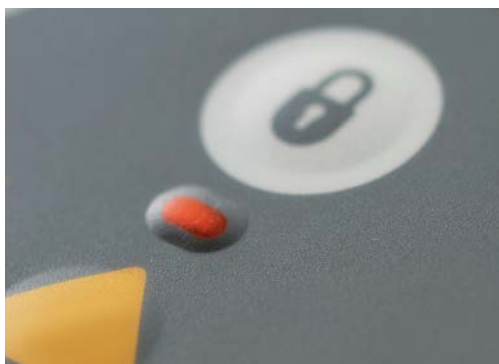

Zámek funkcí

Elektrické funkce lůžka lze jednoduše uzamknout.



SafeSense

Lůžkový senzor varuje personál v případě opuštění lůžka pacientem.

