

# Praktika

Moderní mechanicky polohovatelné lůžko



## Pacient

- Moderní design
- Unikátní systém Ergoframe®



## Zdravotníci

- Bezpečné kontinuální polohování
- Snadná hygiena lůžka



## Management

- Dlouhá životnost lůžka
- Vyrobeno v EU dle normy EN 60601-2-52



# Moderní design a dlouhá životnost

Odnímatelná plastová čela se zámkem

1

Výklopné plastové postranice s barevným dekorem

2

Klikový mechanismus polohování lůžka



3

Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

4

Úhloměr jako indikátor náklonu zádového dílu

5

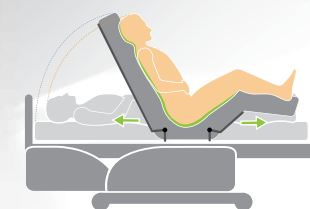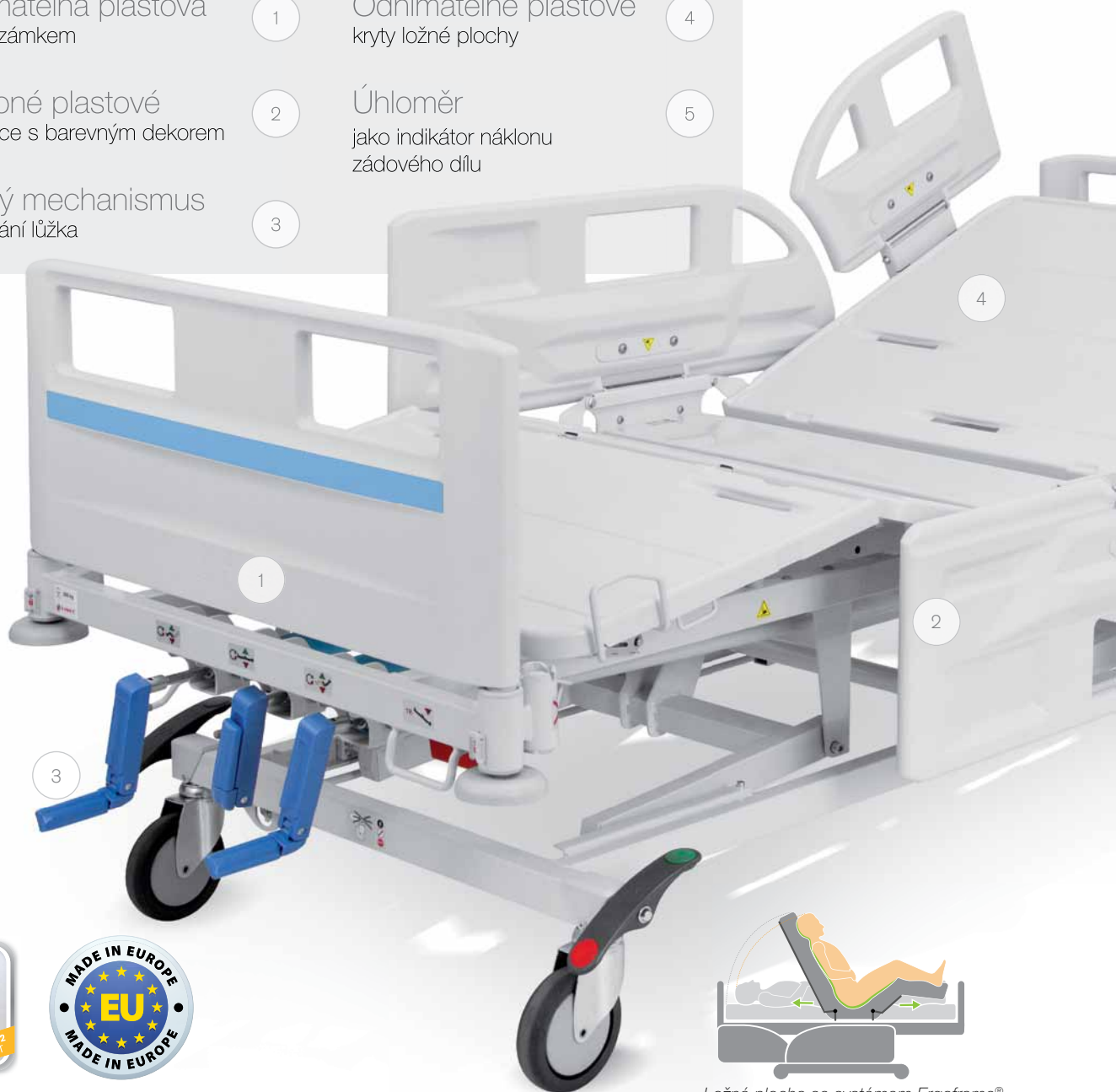

Ložná plocha se systémem ErgoFrame®



Standardní ložná plocha

## POLOHOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ERGOFRAME®

Jednoduché mechanické polohování ložné plochy klikovým mechanismem umožňuje bezpečné nastavení zádového a stehenního dílu. Lýtkový díl lze ručním zdvihem nastavit do 5 různých poloh. Unikátní systém ErgoFrame® efektivně napomáhá prevenci dekubitů díky lepšímu rozložení tlaku v rizikové oblasti vzniku dekubitů.

## PRAKTIKA VE DVOU VERZÍCH

Novou generaci mechanických lůžek představuje lůžko Praktika 1 s fixní výškou ložné plochy. Verze Praktika 2 má výškově nastavitelnou ložnou plochu, možnost náklonu do polohy TR/ATR a centrální brzdění koleček.



## PRAKTICKÉ DETAILY



*Zámek čel*



*Lišta na příslušenství*



*Rohová ochranná kolečka  
horizontální a přídavná vertikální*



*Pouzdra na příslušenství*

## PRO BEZPEČÍ PACIENTA

Propracovaný koncept postranic nabízí možnost individuálního nastavení a zároveň zajišťuje maximální bezpečí pro pacienta.



Protector je možné kombinovat s jednoduchými postranicemi i dělenými plastovými postranicemi

A

Extender výšky jednoduchých postranic pro možnost použití vysoké matrace

B

Jednodílné sklopné postranice

C

# Technická data

| Základní technické parametry          | Praktika 1                  | Praktika 2                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Externí rozměry                       | 218 × 99,5 cm               | 218 × 99,5 cm               |
| Rozměry ložné plochy (matrace)        | 200 × 90 cm                 | 200 × 90 cm                 |
| Max. výška matrace                    | 16 cm / + 10 cm s extendrem | 16 cm / + 10 cm s extendrem |
| Výška ložné plochy                    | 55 cm                       | 42–76 cm                    |
| Max. úhel zádového dílu               | 70°                         | 70°                         |
| Max. nastavení stehenního dílu        | 34°                         | 34°                         |
| Náklon TR/ATR                         | —                           | 12° / 12°                   |
| Ergoframe® zádového a stehenního dílu | 10 + 6 cm                   | 10 + 6 cm                   |
| Hmotnost lůžka                        | 80 kg                       | 120 kg                      |
| Bezpečné pracovní zatížení (SWL)      | 200 kg                      | 200 kg                      |



---

Members of LINET Group

## LINET spol. s r.o.

Želečice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.cz](mailto:info@linet.cz) | [www.linet.cz](http://www.linet.cz)

