

Tom 2



pro dětský úsměv

Přínosy Tom 2



360°
bezpečí



- Maximální bezpečí pro malé pacienty
- Přívětivý design s dětskými motivy



Pacient

- Plně elektricky polohovatelné lůžko
- Praktický neomezený přístup k pacientovi



Personál

- Výjimečný moderní design dětského lůžka
- Vyšší standard pediatrické péče



Management

Maximální bezpečí



ODNÍMATELNÁ ČELA

- Dovolují úplný přístup k pacientovi,
- Unikátní zajištění čel magnetickými zámkami
 - Výplň vysoce odolná vůči poničení



TELESKOPICKÉ POSTRANICE

- Odlišnění postranice a pohyb s ní umožňují dvě ergonomická madla
- Design odpovídá bezpečnostním standardům





TOP PROTECTOR

- Unikátní ochranný a zároveň zábavný prvek
- Inovativní ochrana pro větší bezpečnost



ZERO GAP

- Autoregrese zajišťuje stálou bezpečnou mezeru mezi zádočným dílem a hlavovým čelem lůžka
- Zachovány jsou principy ergonomického polohování



Pro pocit domova





UNIKÁTNÍ MODERNÍ DESIGN

průhledných čel umožňuje malému pacientovi neustálý kontakt s okolím, rodiče a personál jsou dítěti stále na blízku. Do hravého dětského světa plně zapadají barevné motivy potisků čel.



- KLIDNÝ SPÁNEK
- POCIT BEZPEČÍ



- DOKONALÝ PŘEHLED

Navrženo pro děti



Čisté linie, moderní materiály a svěží barvy působí příjemně na malé pacienty i jejich rodiče. Hliníkové a plastové části lůžka jsou doplněny barevnými detaily v modré nebo zelené barvě.



Péče s úsměvem





UNIKÁTNÍ KONCEPT TELESKOPICKÝCH POSTRANIC

- Absolutně nejlepší přístup k dětským pacientům
- 5 nastavitelných poloh výšky postranic



◀ 80_{cm}

**Maximum
BEZPEČÍ**



Mezipozice

◀ 40_{cm}

**Lepší
VÝHLED**




Mezipozice

◀ 0_{cm}

**Snadný
PŘÍSTUP**

◀ 13_{cm}

Bezpečný
prostor pod
postranicí ve
všech jejích
polohách.

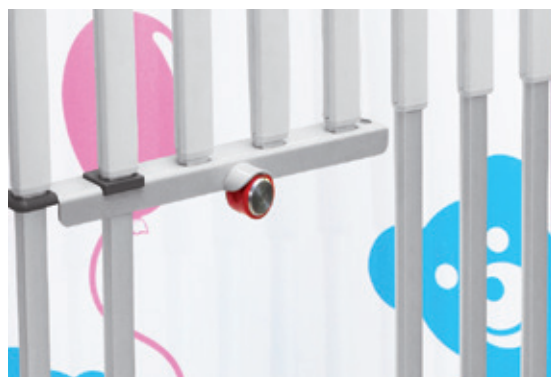

OTEVÍRATELNÉ PŘÍČKY

v postranicích pro praktické
využití v pediatrické péči.

Komfortní polohování



ELEKTRICKÉ POLOHOVÁNÍ

Pomocí ovladače lze nastavit výšku lůžka, náklon zádového dílu a polohy TR/ATR. Bezpečnostní jištění proti nechtěnému pohybu lůžka zajišťují GO tlačítko nebo STOP tlačítko.

Pohodlné VYŠETŘENÍ

83 cm ►

Bezpečné OPUŠTĚNÍ LŮŽKA

58 cm ►

SLOUPOVÁ KONSTRUKCE

Jedním z nejvýraznějších prvků lůžka je sloupová konstrukce, která umožňuje výškové nastavení celého lůžka. Sloupy zajišťují dokonalou stabilitu lůžka, vynikající čistitelnost a neomezený přístup ke všem částem lůžka.



Praktické detaily





Elektrické parametry

Napájení	230 V/±10 %
Maximální příkon	max. 1,6 A; 370 VA
Krytí proti vniknutí vody a prachu	IPX4

Normy

LINET je certifikován v souladu s evropskými normami a systémem kvality: ČSN EN 9001:2009, ČSN EN 13485:2012

Lůžko TOM 2 plně vyhovuje nové normě pro dětská nemocniční lůžka. DIN 32623:2009-11 a jeho konstrukce zaručuje optimální ochranu proti pádu z lůžka. Další normy: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6

Technické parametry

Vnější rozměry	159,8×83 cm
Doporučené rozměry matrace	142×70/10 cm
Bezpečné pracovní zatížení	75 kg
Výška ložné plochy (min.–max.) (elektricky nastavitelná)	58 cm–83 cm
Náklon TR/ATR (elektricky nastavitelný)	15°/15°
Maximální výška postranic	80 cm
Autoregrese zádového dílu	11 cm
Počet dílů ložné plochy	2
Maximální prostor mezi zádovým dílem a čelem lůžka	2,5 cm
Hmotnost (záleží na příslušenství)	120 kg
Podjezdnost	13 cm
Maximální náklon zádového dílu (elektricky nastavitelný)	40°
Centrálně ovládaná kolečka	ANO



TOM 2

Pacient

- Maximální bezpečí pro malé pacienty
- Přívětivý design s dětskými motivy



- Plně elektricky polohovatelné lůžko
- Praktický neomezený přístup k pacientovi



Personál

Management

- Výjimečný moderní design dětského lůžka
- Vyšší standard pediatrické péče



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

