

Lit d'accouchement AVE2



reddot award 2017
winner


Bienvenue au monde

Le travail peut commencer

AVE2 apporte une réponse adaptée aux différentes postures nécessaires pendant les phases de travail, d'accouchement et de récupération. Sa modularité offre une grande liberté de mouvements et un excellent confort de couchage.



Polyvalent et fonctionnel, son design est unique.

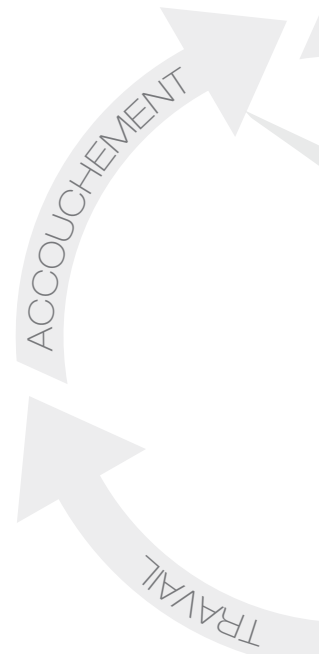

Facile à nettoyer grâce à ses éléments amovibles.

Une position basse à 60 cm permet à la future maman un accès aisé. Pour les patientes les plus petites, la section jambière baissée sert de marche pied.



Selon la progression du travail, la mère peut choisir une position gynécologique adaptée.



Une hauteur maximale de 105 cm pour un positionnement idéal du soignant.



AVE2 offre une surface de couchage spacieuse pour accueillir la mère et son bébé lors de la phase de récupération.



DÉLIVRANCE

RÉCUPÉRATION

Les avantages d'AVE2



- Liberté dans le choix des positions d'accouchement
- Oui, à l'accouchement naturel
- Sécurité maximale pour le bébé et sa maman durant l'accouchement



Patiente

- Facilité d'utilisation, intuitif
- Hygiène sans compromis
- Minimum d'effort physique



Soignant

- Design moderne unique
- Augmentation du niveau de soins
- Haut niveau de prestation



Direction

Quand la magie opère

DÉGAGEMENT OPTIMAL

La section jambière peut être escamotée sous l'assise d'un geste simple et rapide. Aucun élément du lit n'est ôté : pas de perte, pas de risque de contamination par le sol et pas d'efforts physiques pour le personnel soignant.



AVE2 est le seul lit d'accouchement avec une section jambière qui offre un éventail de positions gynécologiques pour la future mère et un accès facilité pour les soignants.



Inclinée, elle peut servir de repose-pied à la patiente.



Remontée, elle offre une surface de couchage spacieuse totalement horizontale pour le repos et la récupération.

Easy fix

L'amplitude des axes de positionnement des repose-jambes permet à l'équipe soignante de répondre très rapidement et efficacement aux différentes situations qui peuvent se produire lors de l'accouchement.



Réglage rapide des repose-jambes.



La hauteur est réglable pour s'adapter à la morphologie des patientes.

L'axe de dégagement du repose-jambes offre une amplitude large.

FORME ARRONDIE

La forme ovale unique de l'assise permet d'approcher le lit au plus près de la baignoire si nécessaire. Les risques liés au transfert de la mère sont ainsi limités.



POIGNÉES

Solides, elles sont une aide non négligeable pour la mère dans certaines positions.

L'élévation et la bascule du bassin se fait grâce à un moteur indépendant.

HAUTEUR

Une seule colonne de hauteur variable, déportée, abaisse le lit à 60 cm du sol et le lève jusqu'à 105 cm.



Les barrières

Les barrières de l'AVE2 avec commandes intégrées s'abaissent d'une seule main pour permettre l'accès à la mère. Elles glissent le long du lit et ne demandent aucun espace supplémentaire dans la salle de travail. Enfin, elles deviennent de véritables alliées lorsque la patiente a besoin d'un support stable pour se tenir.



COMMANDES SIMPLES

De larges pictogrammes colorés décrivent les commandes intégrées, accessibles aux soignants et à la patiente.

Fonctions disponibles :

1. Relève buste
2. Hauteur variable
3. Inclinaison de l'assise
4. Poignées CPR
5. Appel infirmier (option)
6. Position Trendelenburg
7. Veilleuse (option)



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Les procédures de désinfection du lit sont allégées par la facilité de démontage des sections et par les surfaces lisses et sans aspérités qui ne retiennent pas les liquides.

1. Revêtement lisse
2. Sans couture
3. Éléments amovibles et légers
4. Joint étanche entre le tissu et la structure de chaque partie qui évite les infiltrations de liquide.

Le confort et la sécurité des équipes soignantes passe par du matériel de travail étudié. AVE2, avec ses formes arrondies, est très facile à nettoyer.



La sécurité





Position Trendelenburg



Remise à plat d'urgence du relève buste

1. Déclive et remise à plat d'urgence CPR
2. Batterie de secours
3. Éléments facilement nettoyables
4. Verrouillage des fonctions
5. Hauteur variable sur colonne
6. Frein centralisé
7. Brancardage aisé grâce à la roue directionnelle et les poignées de guidage
8. Tête de lit amovible pour les actes anesthésiques (option)
9. Appel infirmier (option)
10. Supports TPS rotatifs

Libre de choisir sa position



Position gynécologique passive



Couchée sur le côté



Position gynécologique active avec les pieds sur les repose-jambes



A genoux



Semi couchée avec les pieds sur la section jambière



Assise, accoudée à la barre



A genoux en appui sur bras



Semi-assise en appui sur les repose-jambes



Semi-assise sur la section jambière



Péridurale



Suture



Semi-assise avec l'aide de son partenaire

L'accouchement naturel

Nous pensons qu'une femme enceinte est naturellement capable de donner naissance à son enfant sans intervention extérieure et cela sous certaines conditions de préparation. AVE2 aide la future maman à donner naissance à son enfant de la manière la plus simple, naturelle et confortable possible. C'est pourquoi nous disons OUI à l'accouchement naturel sur l'AVE2.



GAMME DE COLORIS

AVE2 se décline en plusieurs coloris.



Bleu



Jaune



Orange



Vert



Violet

Accessoires et options



Tête de lit amovible



Seau à placenta sur roulettes



Tige à perfusion



Télécommande filaire



Veilleuse de nuit




Sliding stainless catch basin 4.5l



Surmatelas



Barre de brancardage

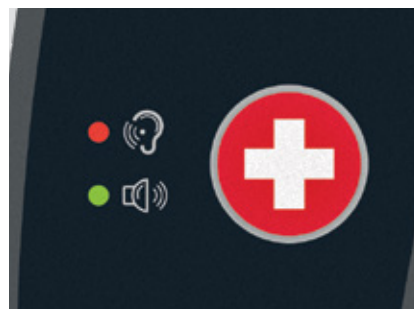

Appel infirmier



Support accessoires



Barre de suspension



Appuie-tête

Caractéristiques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur hors tout	2122 mm
Longueur (section jambière retirée)	1570 mm
Largeur hors tout	980 mm
Diamètre des roues	150 mm
Hauteur minimum	600 mm
Hauteur maximum	1050 mm
Angles du relèvement buste	-10°/+70°
Angles de l'assise	0°/+18,5°
Angles de la déclive	0°/-10°
Angles verticaux des repose-jambes	0°/+135°
Angles horizontaux des repose-jambes	0°/+60°
Angles des repose-pieds	0°/-22°
Poids patient maximum	240 kg
Poids du lit	245 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance maximale absorbée	24V/1,2 Ah
Alimentation	230 V
Indice contre la pénétration d'eau et de poussière	IPX4
Classe de protection électrique	classe I.
Classe de protection contre les accidents dus au courant	Élément accolé type B

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Repose-jambes
- Batterie
- Section jambières sur rotule articulée
- Revêtement lisse et sans couture
- Repose-tête
- Déclive électrique et CPR manuel
- Supports TPS bilatéraux
- Barrières avec commandes intégrées
- Commandes électriques intégrées
- Poignées (paire)
- Roues 150 mm, dont 1 directionnelle
- Frein centralisé
- Câble d'équipotentialité

Ave 2

Patiente

- Liberté dans le choix des positions d'accouchement
- Oui, à l'accouchement naturel
- Sécurité maximale pour le bébé et sa maman durant l'accouchement



- Facilité d'utilisation, intuitif
- Hygiène sans compromis
- Minimum d'effort physique



Soignant

Direction

- Design moderne unique
- Augmentation du niveau de soins
- Haut niveau de prestations



Members of LINET Group

LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | FRANCE
Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail : info@linet.fr | www.linet.fr

