

Image 3



Design para atender todas as suas necessidades

Image 3



Image 3 Padrão



Image 3 Lavável

design para atender todas as suas necessidades



Image 3 XXL (Bariátrica)

Benefícios da Image 3



Posição
extra baixa
de 28 cm



- Posição extra baixa da cama para evitar quedas
- Suporte para mobilização independente
- Design moderno e único aliado com um elevado conforto



Paciente

- Ergonomia sofisticada para um manuseio confortável
- Funções de memorização automática
- Higiene facilitada da cama



Equipe

- Uso universal - versões padrão, bariátrica e lavável
- Solução variável para atender as necessidades do cliente
- Alto padrão de controle contra infecções



Gestão

A satisfação das necessidades



Image 3 LAVÁVEL

A cama está disponível em uma versão adequada para limpeza e desinfecção em máquinas hospitalares de lavagem automática.

- A estrutura da cama foi submetida a uma modificação tecnológica especial que aumenta a sua vida útil e durabilidade
- A cooperação com a Miele durante o desenvolvimento da cama é uma garantia de uma solução confiável e verificada por meio de testes de acordo com critérios exigentes

Image 3 PADRÃO

O design moderno da cama Image 3 vai encontrar o seu uso universal nos hospitais. A escolha da versão, design e os acessórios para a cama podem ser adaptados para atender a um propósito específico. Devido à variabilidade da sua concepção, a Image 3 também pode elevar o padrão de instalações de enfermagem.



ades de todos



Image 3 XXL (Versão Bariátrica)

A Image 3 na sua versão bariátrica atende à crescente demanda por camas de carga mais elevada.

- A cama possui uma plataforma de colchão mais ampla
- A carga é aumentada para 320 kg
- Sua construção e seus acessórios são seguros, mesmo para uma carga superior

Design variável

PROJETO
HOSPITALAR



DESIGN
EXCLUSIVO



DESIGN
UNIVERSAL



O design da cama é atemporal e adequado para um amplo espectro de necessidades em cuidados hospitalares. Imagem 3 Padrão, Lavável e Bariátrico respeitam totalmente os princípios ergonômicos mais elevados em saúde.



Devido ao seu clássico conceito, o design hospitalar combina com a prática de saúde padrão e, além disso, oferece uma versão especialmente adaptada para limpeza automática em máquinas de limpeza hospitalares.



O design exclusivo é aprimorado por uma combinação de elementos de alumínio e decorações em madeira. O visual elegante tem um efeito reconfortante e cria um ambiente agradável para ambos pacientes e funcionários.



O design simples oferece um compromisso de uma cama prática com recursos únicos numa versão econômica.

Segurança do paciente

A segurança é um parâmetro chave para a Image 3. Todas as funções da cama são projetadas para que o paciente possa não apenas sentir, mas realmente estar o mais seguro possível.


Ergoframe®


O sistema Ergoframe® estende a plataforma do colchão na área pélvica e reduz a carga de pressão sobre os tecidos desta região quando o paciente é posicionado na posição de cadeira cardíaca



Bloqueio de funções

As funções elétricas da cama podem ser simplesmente bloqueadas.

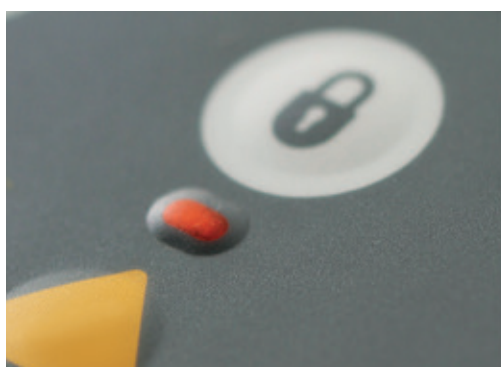

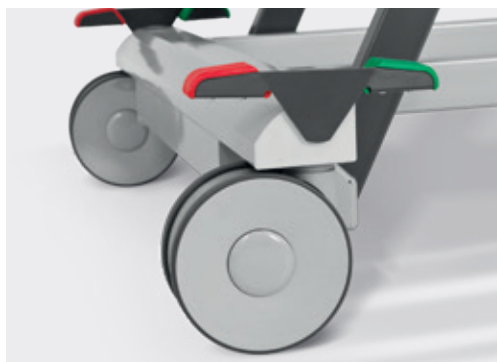

Alarme de freio

A cama automaticamente emite um sinal audível quando a cama for deixada destravada enquanto o principal o cabo de alimentação está conectado.



Botão GO

Pressionando o botão 'GO' ativa o painel de controle por um período de até 3 minutos desde o último acionamento. Os controles são, portanto, bloqueados durante os períodos de inatividade e não podem ser ativados acidentalmente.



Grades Laterais SafeFree®

4 diferentes ajustes de altura das grades laterais. Não requer espaço adicional ao lado da cama. Cama coberta em toda a extensão lateral.



SafeSense

O alarme de saída do leito SafeSense avisa o pessoal quando o paciente sai a cama.

Estratégia 3-STOP

POSIÇÃO
DE EXAME



POSIÇÃO
DE MOBILIZAÇÃO



POSIÇÃO
EXTRA BAIXA





Posição de exame

- A posição mais alta da cama fornece à equipe condições ergonômicas ideais para trabalho.
- Procedimentos de enfermagem confortáveis e Cuidado.
- A posição fornece completo acesso à cama para limpeza e desinfecção.

80
cm



Posição de mobilização

- Funções predefinidas no painel de controle para uma mobilização simples.
- Em combinação com a alça da grade lateral, a posição simplifica e suporta a mobilização do paciente.
- O cenário ideal para limpar em uma máquina de lavar automática hospitalar.

40
cm



28
cm




Posição extra baixa

- Botão separado como uma função predefinida no painel de controle.
- Posição segura para dormir.



Informações práticas

- 1 O 5.º rodízio facilita o manuseio confortável por todos os espaços.
- 2 A extensão da cama é possível em três níveis, de acordo com as necessidades individuais do cliente.
- 3 Luz noturna para orientação segura do paciente.
- 4 Os amortecedores de canto 3D protegem a cama nas direções horizontal e vertical.
- 5 Largura da plataforma do colchão
Largura da plataforma do colchão opcional de 86 ou 90 cm, com peças de plástico removíveis.
- 6 Prateleira para roupa de cama pode também ser usada para armazenar o painel supervisor.
- 7 CPR Mecânica para o uso urgente.

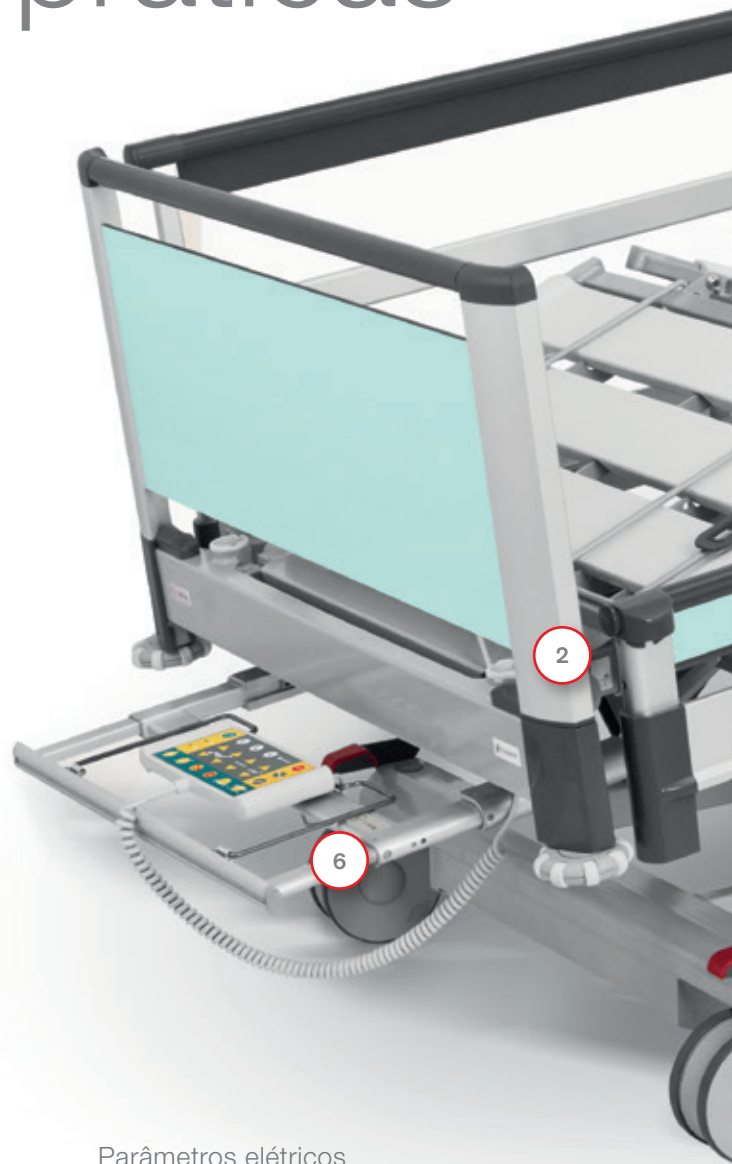


Parâmetros elétricos

Fornecimento de energia	230 V/±10 %
Entrada máx.	max 1.6 A; 370 VA
Proteção contra água e poeira	IPX4 (IPX6 para a Image 3 Lavável)

Certificados

LINET é certificada de acordo com as normas europeias e do sistema de qualidade: ČSN EN 9001:2000 ČSN EN 13485:2003

Os produtos são fabricados conforme as normas europeias referentes às tecnologias médicas e camas hospitalares: ČSN 60601-1, ČSN 60601-2, ČSN 60601-4, ČSN 60601-2-52, ČSN EN ISO 14941 Image 3 Lavável: AK-BWA:2009

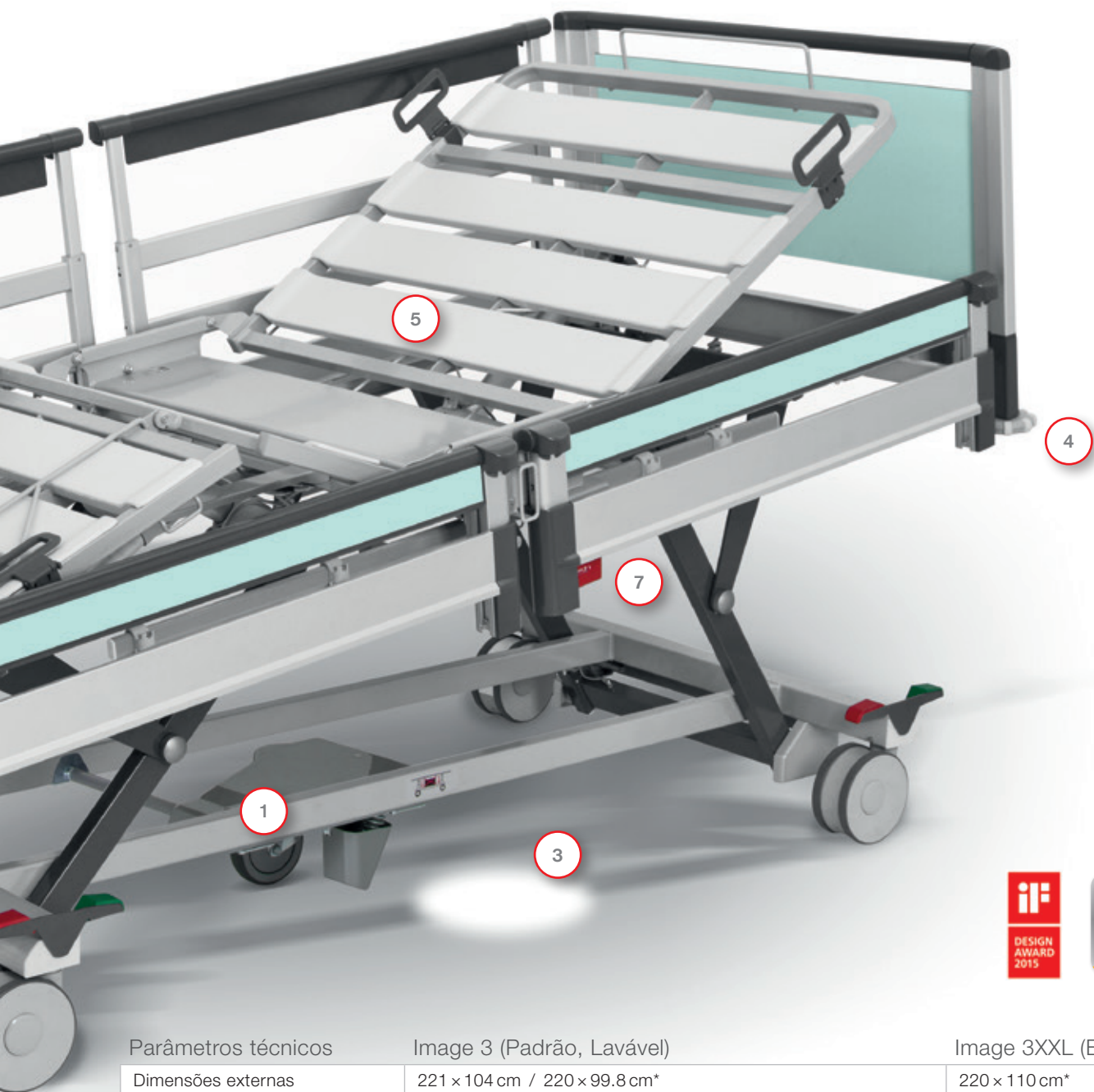

Parâmetros técnicos

Image 3 (Padrão, Lavável)

Image 3XXL (Bariátrica)

Dimensões externas	221 × 104 cm / 220 × 99,8 cm*	220 × 110 cm*
Dimensões da plataforma do colchão	200 × 86 / 90 cm	200 × 100 cm
Espaçamento	13 / 15,5 cm	13 / 15,5 cm
Ajuste de altura da plataforma do colchão	28–80 cm	28–80 cm
Extensão da cama	to 30,5 cm	to 30,5 cm
Altura máxima do colchão	18 cm (grades laterais divididas); 17 cm (grades laterais simples e baixáveis)	26 cm including the extender
Carga máxima de segurança	265 kg (Standard)/250 kg (Washable)	320 kg
Peso da cama	160 kg *, **	160 kg *, **
Inclinação do encosto lombar	0–70°	0–70°
Inclinação do encosto para coxa	0–34°	0–34°
Inclinação TR/ATR	0–14°	0–14°

* by configuration; ** by accessories

Image 3

Paciente

- Posição extra baixa da cama para evitar quedas
- Suporte para mobilização independente
- Design moderno e único aliado com um elevado conforto



- Ergonomia sofisticada para um manuseio confortável
- Funções de memorização automática
- Higiene facilitada da cama



Equipe

Gestão

- Uso universal - versões padrão, bariátrica e lavável
- Solução variável para atender as necessidades do cliente
- Alto padrão de controle contra infecções



 **wissner-**
bossenhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r. o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | República Tcheca

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

