

CURA DELLA PRESSIONE

LINET

Portafoglio prodotti

A 3 celle alternate



A 2 celle alternate



Immersione ottimale



Materassi passivi



Sistemi ibridi



Soluzioni per la prevenzione delle lesioni da pressione

LESIONI DA PRESSIONE

L'uso di materassi è incluso in quasi tutte le linee guida di pratica clinica basate sull'evidenza come componente di programmi completi di prevenzione delle lesioni da pressione e raccomandazioni di trattamento.

1 paziente su 10 nel mondo sviluppa lesioni da pressione.²

4 % della spesa sanitaria è correlata alle lesioni da pressione.¹

73 % di lesioni da pressione è possibile prevenire.³

PANORAMICA DEI MATERASSI


Materassi passivi



Passive

Diverse tipologie di schiuma e design per migliorare la redistribuzione della pressione tramite immersione e avvolgimento.

- Progettato per migliorare la distribuzione della pressione in base alla posizione e al movimento del paziente.

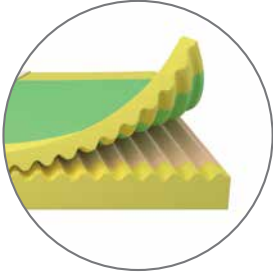

Una combinazione di schiume di altissima qualità, specialmente per le aree ad alto rischio.




Materassi ibridi



Hybrid

ibridi schiuma/aria offrono un sistema attivo e passivo in uno. Supportano un'intervento mirato in base alle esigenze del paziente.

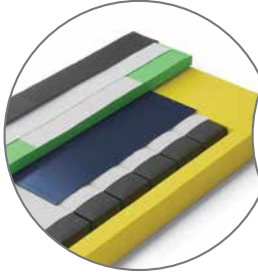

Parte passiva del sistema.



Parte attiva del sistema..



Sistemi attivi


A 2 celle alternate

I sistemi a pressione alternata sono progettati per evitare che qualsiasi parte del corpo sia sottoposta a una pressione prolungata, alternando le parti del corpo che vengono caricate.



2-Cell

— I sistemi alternati a 2 celle coprono il 50% di superficie corporea in qualsiasi momento.

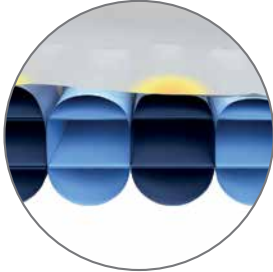

In un sistema a 2 celle, ogni cella alternata si gonfia mentre le celle intermedie si sgonfiano..




A 3 celle alternate

I sistemi a 3 celle consentono di sostenere sempre il 66% della superficie corporea e di scaricare completamente il 33% .



3-Cell

— I sistemi a 3 celle consentono di sostenere sempre il 66% della superficie corporea e di scaricare completamente il 33% .

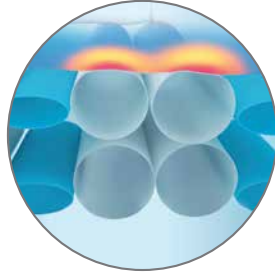

In un sistema a 3 celle, una cella su tre si gonfia in modo alternato.



Immersione ottimale




Optimal Immersion

I materassi a bassa pressione costante sono materassi attivi in grado di redistribuire le pressioni. Questo obiettivo si ottiene riducendo la pressione dell'aria nelle celle a un livello che sostenga il paziente e lo immerga nel materasso per aumentare la superficie di contatto.

La redistribuzione della pressione è la conseguenza di due meccanismi:

- Immersione - la capacità di affondare in una superficie di appoggio
- Avvolgimento - La capacità di una superficie di supporto di avvolgere la forma del corpo⁽⁴⁾

L'immersione ottimale riduce il rischio di bottoming out.

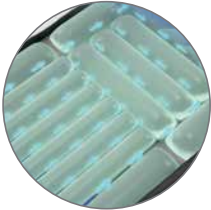

4

LINET | Support Surfaces


LINET | Support Surfaces

5

MATERASSI ATTIVI E IBRIDI


Sistemi alternati a 3 celle

VIRTUOSO OVERLAY

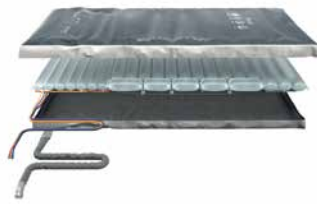


- Scarico periodico della pressione
- APT, CLP e MCM

VIRTUOSO 50

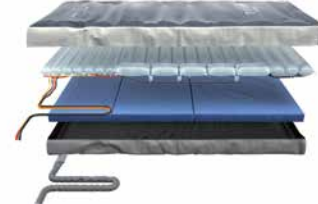

- Aria alternata+ Strato di schiuma
- APT, CLP e MCM

VIRTUOSO 100

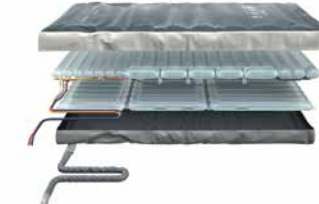

- Aria alternata+ Strato d'aria statico
- APT, CLP e MCM

Sistemi alternati a 2 celle

AIR2CARE 5 OVERLAY



- Scarico periodico della pressione

AIR2CARE 6



- Scarico periodico della pressione
- Adatto per la posizione prona

AIR2CARE 8



- Scarico periodico della pressione
- Adatto per la posizione prona
- Peso massimo del paziente fino a 250 kg

Immersione ottimale

OPTICARE




- Sistema integrato per letto Muticare
- Immersione ottimale
- Gestione del microclima

OPTICARE X




- Sistema integrato per letto Muticare X
- Immersione ottimale
- Modalità Prone
- Gestione del microclima

VIRTUOSO 200

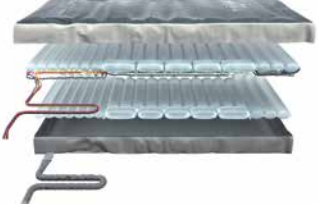

- Zero Pressure
- Aria alternata + strato d'aria alternata
- APT, CLP e MCM

VIRTUOSO 300

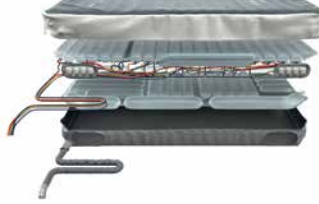

- Zero Pressure
- Valvole in zona testa e talloni
- APT, CLP e MCM

VIRTUOSO PRO



- Posizione prona
- Scarico delle lesioni
- APT, CLP e MCM

AIR2CARE 6 IN



- Scarico periodico della pressione
- Adatto per la posizione prona
- Sistema integrato per letto Essenza 300

AIR2CARE 8 IN



- Scarico periodico della pressione
- Adatto per la posizione prona
- Sistema integrato per letto Essenza 300

Sistemi ibridi

HYBRIMATT 100 IN



- Sistema attivo e passivo in uno
- Sistema integrato per letto Essenza 300

HYBRIMATT 100



- Sistema attivo e passivo in uno

HYBRIMATT 200



- Sistema attivo e passivo in uno
- Gestione del microclima

MATERASSI PASSIVI

Premium

VISKOMATT 50

2 strati di schiuma (viscoelastico e fredda)





- Bordi rinforzati
- Cuciture termosaldate

VISKOMATT 30

2 strati di schiuma (viscoelastico e fredda)





- Bordi rinforzati
- Cuciture termosaldate

VISKOMATT 10

2 strati schiuma (viscoelastica e poliuretano)





- Bordi rinforzati
- Cuciture termosaldate

Premium

VISKOMATT 30B

Schiuma a 3 strati (viscoelastico, fredda e poliuretano)





- Bordi rinforzati
- Cuciture a filo

VISKOMATT 10B

Schiuma a 3 strati (viscoelastico, poliuretano e poliuretano)





- Bordi rinforzati
- Cuciture a filo

MEDIMATT 30

Schiuma a 2 strati (fredda e poliuretano)





- Bordi rinforzati
- Cuciture a filo

Value

EFFECTACARE 10

Schiuma monoblocco





- Superficie convoluta
- Cuciture a filo

EFFECTACARE 20

Schiuma monoblocco





- Superficie parzialmente sagomata
- Cuciture a filo

PRIMACARE 10

Schiuma monoblocco






- Superficie interamente sagomata
- Cuciture a filo

COMPRENDERE I TERMINI CLINICI E TECNICI

Le risorse LINET e le guide internazionali hanno lo scopo di aiutare i lettori a comprendere le superfici e le tecnologie di supporto, in modo che il personale clinico e le organizzazioni possano scegliere le soluzioni di prodotto più adatte ai loro pazienti e alla loro struttura.

Superfici di supporto e di cura della pressione


- Terminologia clinica
- Terminologia relativa alla superficie di supporto

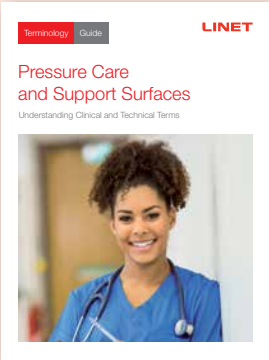



Immersione ottimale


- Principi di ridistribuzione della pressione
- Concetti importanti di immersione, sviluppo e critica, Immersione e immersione ottimale

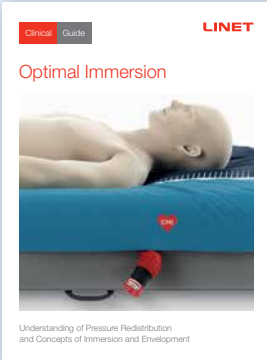



Perché alternare?

- Prestazioni dei materassi a pressione alternata
- Diverse opzioni di progettazione, ad es. sistemi a 2 e 3 celle

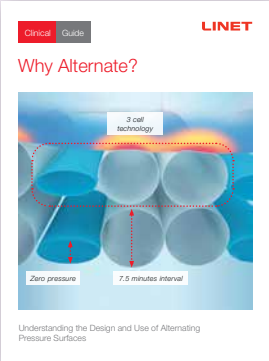




Resources

- Imparare di più sulle strategie basate su aggiornamenti e linee guida recenti.

www.epuap.com

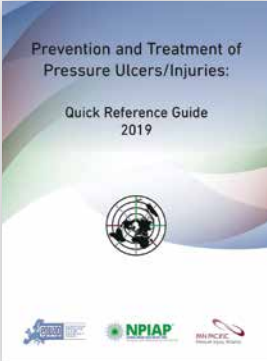



SPECIFICHE DEI MATERASSI

CARATTERISTICA / PRODOTTO			PASSIVI	"HYBRIMATT FAMILY"	"AIR2CARE FAMILY"	"VIRTUOSO FAMILY"	"OPTICARE FAMILY"
Modalità terapia	Attivo	2 celle alternate	–	●	●	–	–
		3 celle alternate	–	–	–	●	–
		durata del ciclo (min)	–	10, 12, 15, 20, 25	10, 15, 20, 25	7,5	–
		Zero Pressure	–	–	–	●	–
		immersione ottimale	–	–	–	–	●
	Reattivo	(ad es. schiuma viscoelastica)	●	●	–	–	–
Modalità a bassa pressione costante			–	●	●	●	●
Impostazione automatica della pressione			–	–	●	–	●
Mantenimento del microclima			–	●	–	●	●
Sostegno extra per evitare di toccare il fondo durante la seduta			–	–	Fowler boost	Fowler boost	Modalità Optimize
Materasso integrato			–	●	●	–	●
Materasso sostitutivo			●	●	●	●	–
Materasso overlay			–	–	●	●	–
Cuscino da seduta attivo			–	–	●	●	–
Categoria lesioni da pressione			I-IV	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV

– No ● Sì

Riferimenti

1. Wounds UK. 2023. Advances in pressure ulcer prevention and treatment Made Easy - Wounds International
2. Li Z, Lin F, Thalib L, et al. 2020. Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Studies. 105:103546
3. Moore Z. 2023. Patient safety & Pressure ulcers: EWMA policy paper. EWMA journal.13 (1) <https://ewma.org/>



Members of LINET Group

LINET Italia srl unipersonale | via G.Galilei n°48 - 25020 Poncarale (BS)
tel.: +39 030 3229519 e-mail: marketing@linet.com | www.linet-italia.com

