


Přehled sortimentu

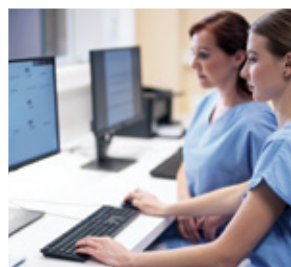

Variabilita a design

Přehled sortimentu

Lůžka pro JIP



Multicare®



Eleganza® 5



Eleganza® 4



Eleganza® 3XC

Akutní lůžka



Eleganza® 2



Eleganza® 1



Latera® Acute



Latera® Thema



Praktika 1



Praktika 2



Image® 3



Image® 3 Bariatric



Image® 3 Washable



Sentida®



Carisma



Movita®

Pediatrická lůžka

Porodnictví
a gynekologie

Jednodenní péče

Aktivní a pasivní
matrace

Stolky k lůžkům



Tom 2



AVE 2



Sprint® 100



Virtuoso®



Eleganza® Mano



Eleganza® 2 Junior Kit



Gracie®



Pura



OptiCare®




Eleganza® Classic



Graciella



Sella

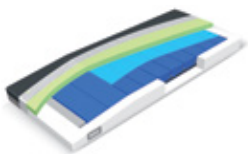

CliniCare® 100 HF



Combinea



CliniCare® 30



Solido

Multicare®

Sofistikované resuscitační lůžko Multicare® představuje nejvyšší stupeň péče o pacienty v kritickém stavu. Je vybaveno řadou automatických inteligentních funkcí, které zvyšují bezpečnost pacienta, podporují jeho léčbu a ulehčují náročnou práci personálu na oddělení intenzivní péče.





MÉNĚ PULMONÁRNÍCH KOMPLIKACÍ, RYCHLEJŠÍ REKONVALESCENCE



NIŽŠÍ NÁKLADY DÍKY PREVENCI VAP, PÁDŮ A DEKUBITŮ



Automatická laterální terapie (ALT)

Automatická laterální terapie je funkce, která udržuje lůžko a pacienta v naprogramovaných cyklech laterálních náklonů. Pomáhá zlepšovat drenáž plic a prevenci vzniku ARDS, VAP a atelektáz.

Laterální náklon

Laterální náklon usnadňuje práci týmům na odděleních JIP a ARO při polohování, mobilizaci a při přesunu pacientů, například z lůžka na stretcher.



Prevence pádů

Díky funkci Multizone Bed Exit Alarm může personál průběžně kontrolovat rizika pádů a okamžitě reagovat. Automatickou prevenci zajišťuje chytrá funkce i-Brake®, která zabráňuje rizikům a nekontrolovanému pohybu nezabrzděného lůžka.

Podpora včasné mobilizace

Unikátní set mobilizačních prvků pomáhá pacientovi při bezpečném vstávání z lůžka a zároveň snižuje námahu personálu.



Ortopnoické křeslo

Přednastavená poloha lůžka podporuje plicní ventilaci a zvyšuje komfort pacienta.

Eleganza[®] 5

Lůžko Eleganza[®] 5 je symbiózou inovativních technologií a lidského přístupu v moderní intenzivní péči. Poskytuje optimální pracovní prostředí a prostor pro rekonvalescenci a specifické požadavky JIP a ARO.





ZAJIŠTĚNÍ KOMFORTU PACIENTA



ÚSPORA CENNÉHO ČASU



MINIMALIZACE FYZICKÉ NÁMAHY
A SNADNĚJŠÍ MANIPULACE S PACIENTEM



Art of turning

Laterální náklon s plynulým pohybem sloupů napomáhá snadné manipulaci s pacientem na lůžku. Snižuje fyzickou námahu a zamezuje zranění zad ošetřujícího personálu.

Art of safety

Bezpečnostní systém lůžka zahrnuje chytrou technologii SafetyMonitor s funkcí Soft Drop®, koncept postranic, monitorování polohy a pohybu pacienta pomocí Multizone Bed Exit Alarm a automatickou brzdu i-Brake®.



Art of mobilisation

Při vstávání z lůžka má pacient k dispozici 3 účinné funkce, Mobi-Lift®, MobiRails a laterální náklon.

Art of positioning

Jednoduchost nastavení širokého výběru poloh lůžka rozšiřuje možnosti rekonvalescence pacienta a zároveň zvyšuje jeho komfort: poloha kardiacké křeslo, Fowlerova poloha 30/30, poloha vaskulární nebo plně vaskulární.

Art of communication

Centrem pro ovládání je revoluční iBoard – místo, ze kterého má sestra pod kontrolou celé lůžko a jeho příslušenství. SafetyMonitor zlepšuje řízení rizik pacientů v nemocničním systému díky monitorování lůžek LINET®, přítomnosti pacienta na lůžku a lokalizaci lůžka.



Eleganza® 4

Univerzální konstrukce lůžka Eleganza® 4 umožňuje přizpůsobit lůžko specifickým potřebám v jakékoliv oblasti intenzivní péče. Různé funkce a otevřená architektura lůžka Eleganza® 4 jsou schopny plnit potřeby náročného klinického prostředí a zároveň zohlednit nutnost mít náklady pod kontrolou.





CÍLENÁ PÉČE A AKTIVNÍ MOBILIZACE



SNADNĚJŠÍ MANIPULACE DÍKY OVLÁDACÍMU PANELU
INTEGROVANÉMU V HLAVOVÉ POSTRANICI



Koncept jednoho tlačítka

Většinu funkcí pro běžné polohování, ale i pro kritické situace lze nastavit stiskem jednoho tlačítka. Zdravotní sestra dokáže zvládnout každou situaci rychle, jednoduše a bezpečně.



Zaměřeno na oblast hlavy

Ovládací panel je integrovaný do postranice, takže zdravotnický personál má okamžitý přístup k ovládání lůžka z jednoho místa. Technologie SoftDrop®, kdy postranice lze hladce sklopit pod lůžko, umožňuje zcela neomezený přístup k pacientovi. Díky těmto možnostem je práce personálu vysoce ergonomická a šetří fyzickou námahu i čas.



Aktivní mobilizace

Rychlou a především bezpečnou mobilizaci pacienta umožňuje unikátní funkce Mobi-Lift®. Poskytuje pacientovi stabilní podporu při sezení na okraji lůžka nebo při vstávání. Pacient si může nastavit individuálně výšku lůžka pomocí tlačítka nahoru nebo dolů.

Eleganza[®] 3XC

Lůžko Eleganza[®] 3XC pro intenzivní péči disponuje řadou progresivních vlastností. Podporuje vitální funkce pacienta, umožňuje jeho bezpečný pobyt na lůžku a minimalizací zdravotních rizik přispívá ke snížení délky pobytu na JIP.

LŮŽKA PRO JIP





BEZPEČNOST PACIENTA A PREVENCE PÁDŮ



MÉNĚ NÁMAHY PŘI MOBILIZACI PACIENTŮ



Unikátní systém pro bezpečnost pacienta

Klíčovým prvkem bezpečnostního systému jsou dvoudílné postranice, volitelně doplněné protektorem. Inovativní koncept postranic poskytuje maximální ochranu na základě individuálních potřeb.



Váhy a RTG na lůžku

Vážení a rentgenování přímo na lůžku usnadňuje sledování stavu pacienta.

Podpora mobilizace

Mobi-Lift® je součástí ložné plochy a poskytuje podporu při vstávání nebo uléhání. V rukojeti je integrované tlačítko, kterým si pacient může sám nastavit vhodnou výšku lůžka.

Eleganza[®] 2

Lůžko Eleganza[®] 2 má nadstandardní bezpečnostní parametry, intuitivní a ergonomické ovládání a zpracované funkce. Jeho design odráží každodenní potřeby nemocničního provozu.

AKUTNÍ LŮŽKA





PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŠŠÍ KOMFORT



DESIGN A ERGONOMIE



Bezpečné postranice s funkcí Mobi-Lift®

Díky technologii SoftDrop® se postranice spouštějí pomalu a tiše, čímž se nenarušuje komfort pacienta a nedochází k poranění rukou. Integrovaná funkce Mobi-Lift® umožňuje bezpečné a pohodlné ovládní zdvihu ložné plochy při mobilizaci pacienta.



Komfort a podpora během rekonvalescence

Automatické funkce zvyšují standard péče. Lůžko Eleganza® 2 má automatické nastavení zádového dílu do nejčastěji využívané polohy 30°. Speciální design model umožňuje sestřám ergonomickou manipulaci s lůžkem.

Signalizace bezpečné polohy
Designové indikátory náklonu ložné plochy mohou být vybaveny bílým podsvícením, měnícím se na zelenou barvu, pokud je lůžko v nejnižší poloze.



Eleganza[®] 1

Na plně elektricky polohovatelném lůžku Eleganza[®] 1 zákazníci oceňují vysokou přidanou hodnotu založenou na špičkových parametrech, výborné funkčnosti, dostupné výbavě a velmi atraktivní ceně.





ERGOFRAME® PROTI PROLEŽENINÁM



SNADNÉ POLOHOVÁNÍ A MANÉVROVATELNOST



Variabilní lůžko

Moderní design a vysokou úroveň bezpečí nabízejí dělené plastové postranice. Jednodílné sklopné postranice se snadno nastavují, navíc je lze doplnit o 10 cm vyšší extenzi z důvodu použití vysokých antidekubitních matrací. Oba systémy postranic plně vyhovují nej přísnějším bezpečnostním předpisům (EN 60601-2-52). Nově je k dispozici SoftDrop® technologie pro hladkou a bezpečnou manipulaci s postranicemi.



Jednoduché tříčtvrteční sklopné postranice



Dělené plastové postranice



Eleganza® 1 Extra SAFE
Nejvyšší možná bezpečnost pro pacienty se speciálními potřebami. Lůžko neobsahuje odnímatelné části a k dispozici má uzamykatelnou schránku na přírodní kabel.



Eleganza® 1 LE
Základní verze elektricky polohovatelného lůžka s nejnižší možnou cenou je vybavena elektronikou podporující pouze manuální ovládání. Lůžko je možné vybavit podvozkem bez možnosti nastavení TR/ATR polohy.

Prevence dekubitů
Systém Ergoframe® rozšiřuje prostor ložné plochy v pánevní oblasti a snižuje zatížení na tkáň, pokud je pacient v dané pozici.

Latera®

Elektrická lůžka s laterálním náklonem jsou vhodná zejména pro imobilní pacienty na různých typech oddělení. Laterální náklon výrazně usnadňuje polohování, manipulaci a vstávání pacienta z lůžka.



Latera® Acute



Latera® Thema




Laterální náklon

Laterální náklon umožňuje ošetřujícímu personálu, otočit pacienta na bok s minimem námahy. Náklon výrazně usnadňuje ošetrovatelskou denní rutinu. Variabilita vybavení lůžka umožňuje jeho použití na různých odděleních.

Praktika 1 a 2

K nové generaci lůžek Praktika řadíme provedení Praktika 1, s pevnou výškou ložné plochy matrace. Vyšší verze Praktika 2 má nastavitelnou výšku ložné plochy matrace, volitelnou funkci TR/ATR a může mít i centrální brzdění.

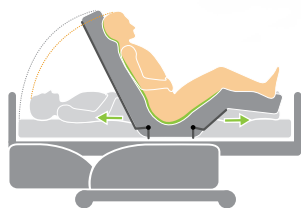

Unikátní systém Ergoframe®



Standardní ložná plocha

Variabilní polohování lůžka s Ergoframe®

Systém Ergoframe® rozšiřuje prostor ložné plochy v pánevní oblasti a snižuje zatížení na tkáň, pokud je pacient v dané pozici.

Pro bezpečnost pacienta

Použití postranic společně s chráničem nožní části a nástavcem pro zvýšení výšky postranice poskytuje kompletní řešení bezpečnosti pacienta.



Image[®] 3

Moderní lůžko Image[®] 3 najde v nemocnicích univerzální uplatnění. Volbou provedení, designu a příslušenství lze lůžko přizpůsobit konkrétnímu účelu využití. Díky variabilitě designového řešení může Image[®] 3 zvýšit standard také v pečovatelských zařízeních.





PODPORA SAMOSTATNÉ MOBILIZACE



DESIGN A SNADNÁ MANIPULACE



Řešení pro každého

Design lůžka je nadčasový a vhodný pro široké spektrum zdravotnické péče. Image® 3 Standard, Image® Washable a Image® Bariatric splňují nejvyšší nároky na ergonomické principy ve zdravotnictví. Jednoduchý design Image® 3 LE nabízí ekonomicky výhodnou variantu unikátních a praktických funkcí lůžka.

Strategie 3 STOP

Stiskem jediného tlačítka může být ložná plocha lůžka nastavena do polohy vhodné pro bezpečný spánek, pro pohodlnou mobilizaci nebo běžné vyšetření.

Image® 3 Bariatric
Bariatrická varianta vychází
vstříc rostoucí poptávce
po lůžkách s vyšší nosností.



Pečovateľská lůžka

Elektricky polohovateľná pečovateľská lůžka ocení ošetrovatelé i klienti vyžadující dlouhodobou péči. Moderní lůžka jsou vyvinuta s důrazem na příjemný vzhled, funkčnost a individuální komfort a zároveň respektují požadavky každodenního používání.





KOMFORT ZLEPŠUJE PSYCHICKÝ STAV



DESIGN A FUNKCE PRO KVALITNĚJŠÍ PÉČI



CARISMA

Lůžko Carisma nabízí pohodlí, příjemný design a vysokou funkčnost pro zařízení dlouhodobé péče. Je také k dispozici v bariatrickém provedení Carisma 300 s nosností 300 kg.



SENTIDA®

Nízká poloha ložné plochy, pouze 25 cm nad podlahou, zajišťuje bezpečnost pacienta během spánku. Lůžko Sentida lze vybavit průběžnými či unikátními dělenými postranicemi.



MOVITA®

Movita je vybavena dvojitými dělenými postranicemi, které lze nastavit podle potřeb pacienta ve čtyřech úrovních až do výšky 40 cm nad ložnou plochou.

TOM 2

Elektricky polohovatelné dětské lůžko TOM 2 se vyznačuje originálním konceptem teleskopických postranic, sloupovou konstrukcí a nadstandardními bezpečnostními parametry. Představuje dokonalou fúzi funkčnosti, ergonomie a designu a posunuje kategorii dětských lůžek do zcela nové dimenze.





BEZPEČNÝ A PŘÍJEMNÝ POCIT



PŘÍSTUP K PACIENTŮM BEZ OMEZENÍ



Bezpečný prostor
Lůžko poskytuje maximálně bezpečný prostor pro malé pacienty. Má teleskopické postranice a odnímatelná průhledná čela.



Hravý design

Pro lůžko je charakteristický jeho výrazný design, který navozuje hravý a příjemný pocit. Lůžko je k dispozici ve dvou barevných variantách – modré a zelené. Lůžko může být vybavené čelem bez motivu.



Unikátní nastavení lůžka

Sloupová konstrukce umožňuje výškové nastavení celého lůžka. Díky teleskopickým postranicím má zdravotnický personál neomezený a snadný přístup k malým pacientům. Možná jsou také 3 automatická výšková nastavení (0, 40 nebo 80 cm nad ložnou plochou).

Pediatrická lůžka

Kompletní řada dětských lůžek LINET® pokrývá potřeby pediatrické péče ve všech věkových kategoriích.





MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ MALÝCH PACIENTŮ



FUNKČNOST A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ



ELEGANZA® 2 JUNIOR KIT

Unikátní nemocniční lůžko je díky bezpečnostnímu konceptu postranic vhodné pro dospělé i dětské pacienty. Lůžko mohou bezpečně používat pacienti o tělesné výšce 90–220 cm.



AVE 2

Porodní lůžko AVE 2 je vhodné pro všechny fáze porodu. Pro zdravotnický personál je lůžko spolehlivým a praktickým pomocníkem, který zvyšuje kvalitu a zjednodušuje péči o ženu při porodu.





SVOBODA VOLBY PORODNÍCH POLOH



HYGIENA BEZ KOMPROMISŮ

Snadná péče na jednom místě

AVE 2 umožňuje kompletní péči – od vstupu do nemocnice až po poporodní fázi. Na lůžku je možné provádět gynekologické vyšetření, ultrazvuk, sledování CTG nebo úpravy hráze.



Unikátní podnožní díl

Jednoduchý otočný mechanismus umožňuje zasunout podnožní díl pod lůžko pro urychlení a usnadnění vlastního porodu. Podnožní díl zůstává připojený k lůžku a nemusí se skladovat mimo něj. Výhodou je omezení rizika vzniku infekcí a rovněž prevence poranění zad obsluhujícího personálu při manipulaci s podnožním dílem.



Podpěry nohou

Koncepce pevných nožních podpěr umožňuje zdravotnickému týmu flexibilně a účinně reagovat na nejrůznější situace během porodu.



Gracie®

Gynekologická ordinace Gracie® vytváří atraktivní prostředí pro lékaře i pacientku s důrazem na ergonomii a efektivitu vyšetření. Elektricky nastavitelné gynekologické křeslo a lehátko v jednom, integrovaný videokolposkop, propojení ultrazvuku s monitorem a nástrojový stolek šetří místo v ordinaci a poskytují lékaři maximum komfortu při práci.



Integrovaný FULL HD videokolposkop
Integrovaný videokolposkop nabízí nejvyšší kvalitu zobrazení ve full HD a řadu dalších vlastností, jako je například volba manuální ostření/ Autofocus, optický zoom 20x, funkce zmrazení a pořizování fotografických snímků a videozáznamů. Polarizační filtr eliminuje nepříjemné odlesky při vyšetření. Zelený filtr zvýrazňuje červenou barvu kapilár a zároveň potlačuje rušivý vjem okolní tkáně.





Bezdrátové řešení
Gynekologickou ordinaci
Gracie® můžete spojit
s vaším počítačem
bezdrátově. Není nutná
instalace softwaru
do počítače. Fotky a videa
jsou uloženy v paměti křesla.

Graciella

Gynekologické křeslo Graciella umožňuje lékařům pracovat s pacientem ergonomicky a funkční design je přizpůsoben pro větší pohodlí a bezpečnost pacientky. Na křesle je možné provádět základní vyšetření včetně ultrazvuku, a to z jednoho místa.

Sloupová konstrukce
Jedinečný dvousloupový design dovoluje snadné polohování křesla a nastavení různých pozic.



Sprint® 100

Univerzální stretcher Sprint® 100 slouží k rychlému a bezpečnému převozu pacientů. Splňuje nároky urgentního příjmu a umožňuje základní diagnostiku pacienta.





RYCHLÝ PŘEVOZ



JEDNODUCHÁ OBSLUHA A MANIPULACE



IV&Drive

Infuzní stojany integrované do madel umožňují jednoduché a bezpečné tlačení stretcheru. Výhodou tohoto řešení je, že madla je možné skládat jednou rukou. Snižují fyzickou náročnost personálu.




Kardiacké křeslo

Je poloha, která zabezpečuje úlevu a komfort pacientům s respiračními a srdečními komplikacemi nebo po zákrocích v oblasti břicha.


FlexiDrive

Vysouvací 5. kolečko umožňuje hladkou jízdu se stretcherem i na nerovném povrchu, jako jsou vstupy do výtahů a prahy.

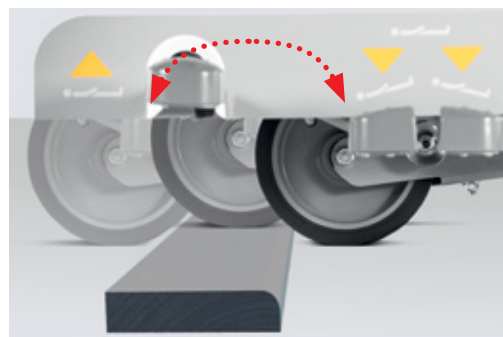

Jednoduché brzdění

Brzdy stretcheru Sprint® 100 jsou snadno přístupné z hlavové i nožní části, při brzdění se eliminuje nutnost přesouvání se na stranu lůžka.

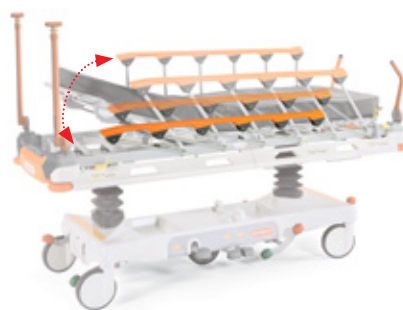

SoftDrop®

Díky technologii SoftDrop® se postranice spouští pomalu a tiše, čímž se nenarušuje komfort pacienta a nedochází k poranění rukou.

Pura a Sella

Naším posláním je bezpečnost pacientů a jejich samostatnost, podpora pečovatelských činností, technických funkcí a procesů v místě poskytování péče. Denní chirurgie dovoluje rychlejší rekonvalescenci a menší narušení života pacienta i jeho rodiny. Naše řešení pomáhá zvyšovat bezpečnost pacientů a přispívá prevenci pádů.



PURA PRO JEDNODENNÍ PÉČI

Plně vybavené křeslo pro běžné ošetrovatelské úkony, rekonvalescenci a diagnostické procedury.



PURA PRO VYŠETŘENÍ A LÉČBU

Zajišťuje pohodlí při dialýze, onkologické léčbě nebo dárčovství krve. Nabízíme variabilní řešení s cílem maximálně usnadnit práci sester a personálu.

SELLA

Multifunkční a relaxační křeslo, které podporuje samostatnost a nezávislost pacienta. Zároveň přispívá k lepší ergonomii práce a snížení fyzické námahy zdravotnického personálu.



Sedací nábytek

SOFTLIN KOMFORT

Díky robustní konstrukci z masivního bukového dřeva je křeslo velmi stabilní. Potahy jsou odnímatelné a prátelné, pod nimi je umístěna ještě jedna, nepropustná vrstva.



SOFTLIN PLUS

Robustní křeslo z buku má zvýšený sedák i područky, které usnadňují vstávání a usedání. Područky je možné nastavit do dvou poloh a nastavitelná je i hloubka sedáku. Textilní potah je snímatelný, navíc je sedák potažen separační vrstvou.

BLUES COMFORT


Pohodlné křeslo Blues Comfort je rozkládací a může sloužit také jako přistýlka. Mechanismus kovové konstrukce zajišťuje stabilitu při ležení, výztuha spodní části je vyrobena z masivního bukového dřeva. Křeslo má dvě kolečka, která usnadňují manipulaci.



Aktivní systémy

VIRTUOSO®

Řada modelů aktivních matrací Virtuoso® umožňuje jejich využití v širokém spektru nemocniční i pečovatelské péče. Všechny modely jsou kompatibilní se stejným kompresorem.

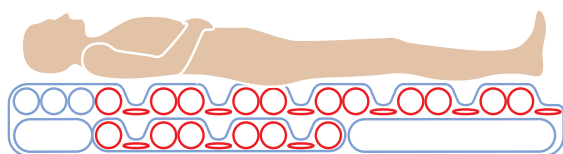

Nulový tlak

Střídavé odstraňování tlaku maximalizuje prevenci vzniku dekubitů, zefektivňuje terapii hojení ran.



Podsedák s dvoucelovou technologií alternujícího tlaku chrání pacienta a umožňuje 24hodinovou péči. Využívá stejnou řídicí jednotku jako matrace. Jakmile je podsedák připojen, kompresor se automaticky přepíná do režimu sedáku.

OPTICARE®

Nastavení matrace je automaticky optimalizováno pro každého pacienta podle jeho hmotnosti, výšky, i změny polohy na matraci.



Plně integrovaný systém
Terapeutická matrace OptiCare® je
kompatibilní s lůžky pro JIP – Multicare®
a Eleganza® 5.



Detekční systém

Čidla snímají hloubku zanoření pacienta a automaticky vyrovnávají tlak v matraci. Tím je neustále zajištěn optimální tlak po celé ploše těla.

Aktivní systémy

AKTIVNÍ SYSTÉM SYMBIOSO

Aktivní systém Symbioso kombinuje MicroClimate Management (MCM) s konstantní terapií nízkým tlakem (CLP). Kromě toho matrace nabízí doporučení správného tlaku pro konkrétního pacienta.



AIR2CARE

Systém Air2Care nabízí účinnou prevenci proleženin a komfort, je tak univerzálním řešením pro dlouhodobě hospitalizované pacienty, klienty pečovatelských domů a klienty v domácí péči.

PROPHYCAIR

Díky systému Low Air Loss umožňuje matrace optimální rozložení tlaku na tělo pacienta. Dochází ke snížení působení tlaku mezi pacientem a matrací, a tedy k prevenci dekubitů. ProphycAir je dostupná v několika velikostech, ale vždy jako bariatrická verze s nosností až 445 kg.



Hybridní matrace

CLINICARE® 100 HF

Hybridní matrace je kombinací aktivního (vzduchového) systému a pasivní (pěnové) matrace a přináší tak mnoho benefitů napříč celým spektrem nemocniční péče.



Pasivní systém

Matrace Clinicare® 100 HF umožňuje optimální rozložení tlaku i v pasivním režimu.

Aktivní systém

Pokud stav pacienta vyžaduje aktivní terapii, matrace je vybavena kompresorem, umožňujícím alternující terapii pomocí střídavého nafukování a vyfukování systému 2 cel k optimální distribuci tlaku a prevenci dekubitů.

Pasivní matrace


Řada pasivních matrací LINET® je navržena tak, aby optimalizovala rozložení tlaku podle polohy a pohybů pacienta. Spodní část matrace je speciálně profilovaná, zajišťuje správnou pozici matrace při polohování lůžka.

CLINICARE® 30 S VÝPLNÍ GELTEX®

Matrace CliniCare® 30 je vhodná pro intenzivní, standardní a dlouhodobou péči. Unikátní a patentovaná technologie GELTEX® zajišťuje optimální distribuci tlaku a výjimečnou prodyšnost matrace.

Profilace

Díky postranním průřezům matrace dobře kopíruje ložnou plochu lůžka. Další profilace matrace ve vybraných anatomických zónách vede ke snížení zatížení například v pánevní oblasti.

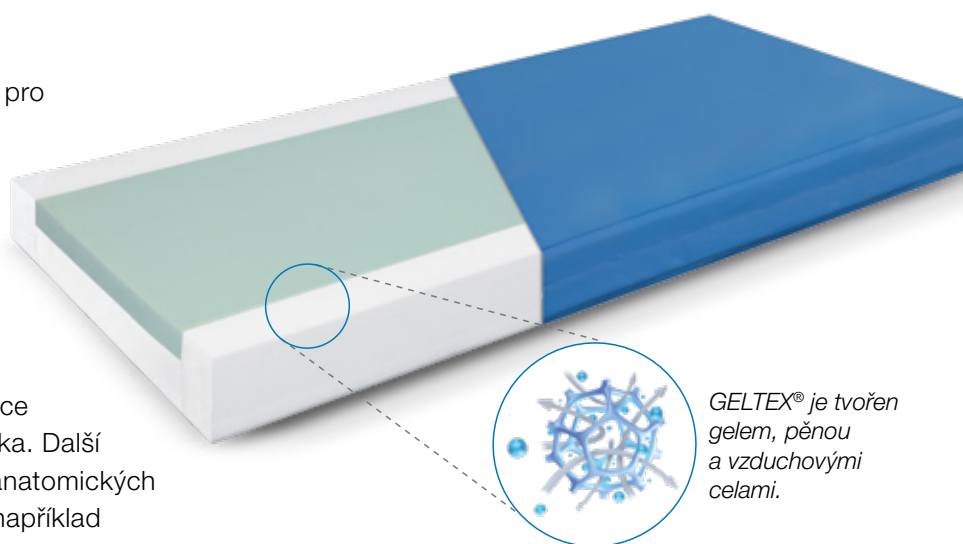

GELTEX® je tvořen gelem, pěnou a vzduchovými celami.

CLINICARE® 20

Povrch matrace CliniCare® 20 je tvořen vysoce kvalitní termoelastickou pěnou, která se maximálně přizpůsobí tělu pacienta a nabízí mu oporu i komfort.

- Po stranách je matrace vyztužena, což pomáhá při manipulaci s pacientem a také zvyšuje její životnost.
- Pevná spodní vrstva matrace dále zvyšuje její odolnost.



CLINICARE® 10

Konstrukce matrace je tvořena třemi pěnovými vrstvami a poskytuje jedinečnou kombinaci podpory a distribuce tlaku.

- Horní vrstva: Podpěru hlavy a pat tvoří termoelastická pěna, která je vyvinuta pro zlepšení cirkulace vzduchu mezi pokožkou pacienta a matrací.
- Vyztužená pěna zpevňuje boky matrace.






OPTIMÁLNÍ DISTRIBUCE TLAKU



SNADNÁ A INTUITIVNÍ MANIPULACE S MATRACÍ

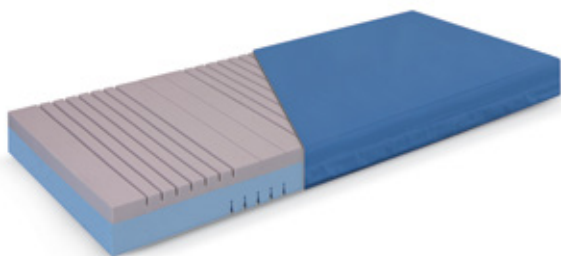

PRIMACARE® 20


Díky dvěma různým druhům pěn s rozdílnou hustotou a tloušťkou je matrace velmi komfortní a stabilní.

- Profilace v rizikových místech zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu mezi pokožkou pacienta a podložkou a také optimální rozložení tlaku.
- Matrace PrimaCare® 20 B je určena speciálně pro bariatrické pacienty ve zdravotní i ošetrovatelské péči.

PRIMACARE® 10

Jednotlivá matrace PrimaCare® 10 je v horní části rovnoměrně příčně i podélně profilovaná.

- V hlavové a nožní části jsou průřezy hustší, zajišťují větší komfort a lepší rozložení tlaku.

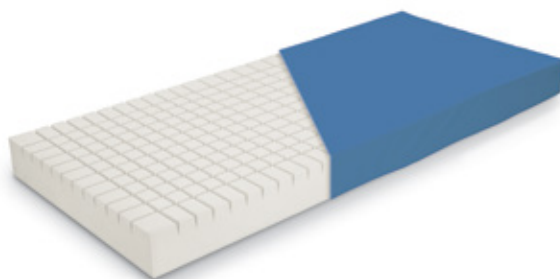


EFFECTACARE® 20

Jednotlivá matrace s preventivním účinkem proti dekubitům. V oblasti boků má navíc průřezy v jádře pro lepší rozložení tlaku.

- Díky prořezání matrace je optimalizován tlak na pacienta také během polohování lůžka.

EFFECTACARE® 10

Prořezání je symetrické po celém povrchu matrace, lze jak otáčet o 180°, tedy střídat polohu hlavové a nožní části. Zvyšuje se tím její životnost.

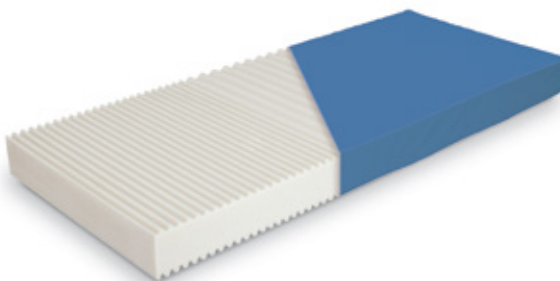

Stolky k lůžkům

I doplňkovému nábytku, jako jsou noční stolky a servery, je věnována maximální pozornost. Noční stolky s integrovanou jídelní deskou, praktickými úchyty a úložnými prostory poskytují pacientovi samostatnost bez nutné asistence sestry. Praktické funkce a jednoduchá ovladatelnost jsou hlavními přednostmi všech produktů značky LINET®.





KOMFORTNÍ PŘÍSTUP K OSOBNÍM VĚCEM



SNADNÉ ČIŠTĚNÍ



ELEGANZA® MANO & CLASSIC

Unikátní nemocniční noční stolek s řadou praktických funkcí. Kolečka stolku Mano se zabrzdí pouhým pootočením brzdy, umístěné v horní části stolku (Eleganza® Mano).



STYLO 3

Produktová řada Stylo kombinuje design nábytku vytvářející pocit domácí pohody s inovativními funkcemi. K nočnímu stolku lze snadno upevnit jídelní desku.



COMBINEA

Modulární řada Combinea nabízí až šest různých sestav stolků. 5. kolečko u dolní zásuvky zajišťuje stabilitu a chrání stůl proti překlopení.



SOLIDO 3

Tento jídelní stůl lze využívat z obou stran lůžka nebo křesla, a to v horizontální poloze při jídle či nakloněnou ke čtení a psaní.

Servis LINET®

S volbou lůžka LINET® získáváte jako benefit servisní služby společnosti LINET®. Tuto službu poskytujeme kdekoli na světě. Servis je organickou součástí stabilní velké firmy s vlastním vývojovým střediskem, výrobními závody.

SERVIS LINET®



Jsme LINET® Group

LINET® Group, s výrobními závody v České republice a v Německu, dodává lůžka do nemocnic a pečovatelských zařízení na celém světě. V Evropě je největším výrobcem a dodavatelem lůžek, celosvětově patří ve svém oboru do TOP 3. LINET® Group garantuje vysokou kvalitu lůžek i souvisejících služeb včetně servisu.



Náš servisní tým vám zajistí:

- Záruční servis
- Pozáruční servis
- Rychlé a odborné opravy
- Bezpečnostně technické kontroly
- Čištění, upgrade výrobku
- Originální náhradní díly

SafetyMonitor

SafetyMonitor může zlepšit řízení rizik pacientů v nemocničním systému díky monitorování lůžek LINET®, signalizaci přítomnosti pacienta na lůžku a lokalizaci lůžka.

- Bed Exit Monitor – prevence pádů
- Lokalizace lůžek
- Aktuální a průběžné informace o lůžkách
- Váhový senzor pro pohodlné měření



MŮŽE BÝT
ZOBRAZENO NA:

- vašem počítači
- vašem tabletu
- vašem mobilním telefonu



ERGONOMICKÉ A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ



SAFETYMONITOR ZLEPŠUJE EFEKTIVITU PRÁCE V NEMOCNICI

SafeSense®

Inovativní systém včasného varování opuštění lůžka pacientem je spolehlivým pomocníkem v každodenní ošetrovatelské péči. Inteligentní technologie lůžkového senzoru přispívá k prevenci pádů a vyšší mobilitě pacienta.


- Včasná pomoc v případě pádu pacienta.
- Vysoká míra bezpečnosti během nočních a víkendových směn, kdy je počet personálu eliminován.
- Systém může alarmovat i v situaci, kdy se pacient pokouší přelézt přes postranice.



Integrované noční podsvětlení lůžka

INTEGRACE SYSTÉMU

Rychlá a snadná instalace pomocí P&P konektorů na kompatibilním lůžku, dle aktuální potřeby.

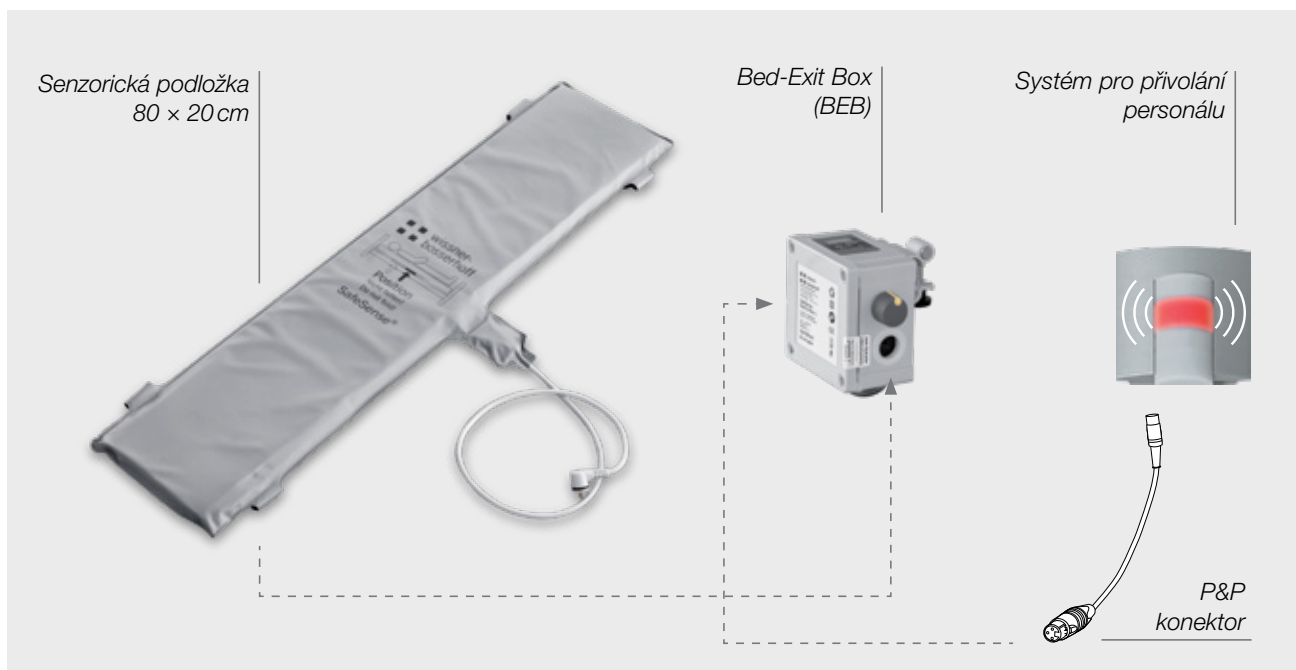

Technické specifikace lůžek

Multicare®

Multicare® LE

Eleganza® 5

Eleganza®
3XC

Elektricky polohovatelné			Ano	Ano	Ano	Ano
Vnější rozměry lůžka (šířka × délka)		[cm]	105 × 215	105 × 215	100 × 219	104,5 × 231
Prodloužení		[cm]	0–22	0–22	0–22	–8/17
Váha lůžka		[kg]	210–224	224	210–248	138
SWL		[kg]	250	250	250	250
Výška ložné plochy	minimální	[cm]	44	44	43,5	41
	maximální	[cm]	82	82	81,5	79
Rozměr matrace (šířka × délka)		[cm]	86 × 208	86 × 208	90 × 208	86 × 208
Max. výška matrace		[cm]	23	23	23	23
TR/ATR		[°]	13/16	13/16	14/14	13/13
Výška postranic nad ložnou plochou	dělené	[cm]	45	45	45	45
	¾ jednodílné sklopné	[cm]				
Nastavení úhlu stehenního dílu		[°]	30	35	30	30
Nastavení úhlu zádového dílu		[°]	70	70	65	70
Úhel laterálního náklonu		[°]	30	30	15	
Váhy			Ano	Ano	Ano	Ano
Podjezdnost pro server		[cm]	14	14	14,2	
Držák RTG kazety		[cm]	35 × 43	35 × 43	(35 × 43)	35 × 43

* verze s kolečky 125 mm; ** platí pro dělené hliníkové postranice; *** Praktika 1;

Image® 3

Latera® Acute

Eleganza® 4

Eleganza® 2

Eleganza® 1

Praktika
1+2

Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
104 × 221	98,5 × 219	217,5 × 100	99,5 × 223,5	99 × 218	99,5 × 218
10; 22; 30,5	12,5/12,5	11; 22	32	15	Ne
160	160	195	156	135	125 (80***)
265	200	250	250	185–250	200
28	43	41	39,5	39,5 (37*)	42 (55***)
80	81	79	77,5	76 (73,5*)	76 (55***)
86/90 × 200	86 × 200	90 × 208	86/90 × 200	86/90 × 200	90 × 200
18/17**	14	23	14–24****	16–27****	16
14/14	16/16	14/14	16/16	15/15	12/12 (Ne***)
40**	0	45	40	38	
39	36		40	39	
34	46	25	32	35	34
70	60	65	64	70	70
	15				
15,5 (13*)	15	15	15	18,8 (16*)	
		39 × 46,5	(35 × 43)		

**** Záleží na typu postranice a ložné plochy

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

