

Praktika

Moderní mechanicky polohovatelné lůžko



Pacient

- Moderní design
- Unikátní systém Ergoframe®



Personál

- Bezpečné kontinuální polohování
- Snadná hygiena lůžka



Management

- Dlouhá životnost lůžka
- Vyrobeno v EU dle normy EN 60601-2-52



Moderní design a dlouhá životnost

Odnímatelná plastová čela se zámkem

1

Odnímatelné plastové kryty ložné plochy

4

Výklopné plastové postranice s barevným dekorem



2

Úhломěr jako indikátor náklonu zádového dílu

5

Klikový mechanismus polohování lůžka

3

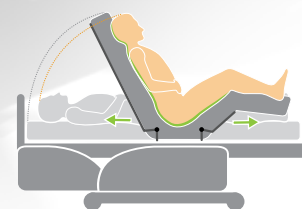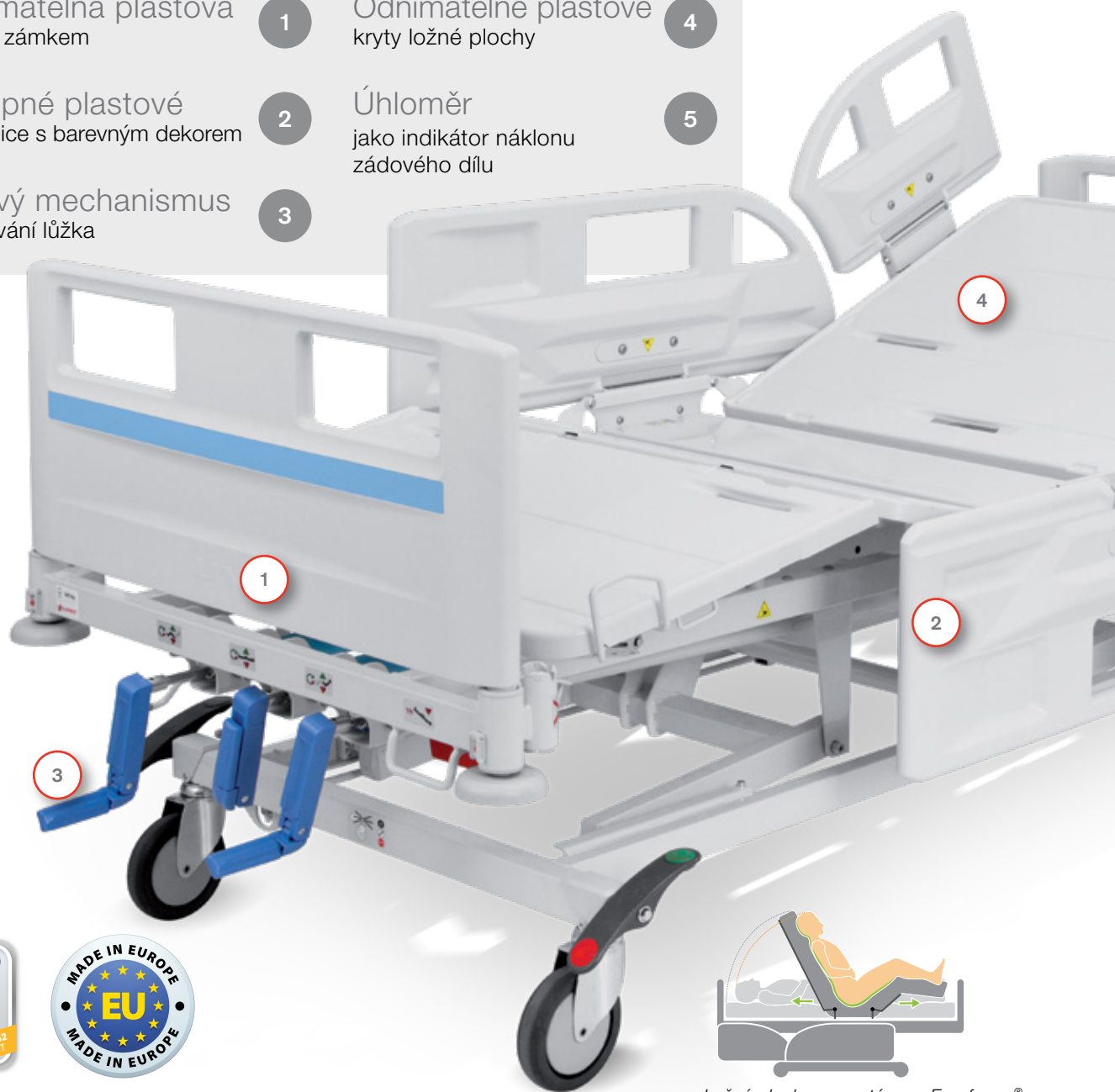

Ložná plocha se systémem ErgoFrame®



Standardní ložná plocha

POLOHOVÁNÍ SE SYSTÉMEM ERGOFRAME®

Jednoduché mechanické polohování ložné plochy klikovým mechanismem umožňuje bezpečné nastavení zádového a stehenního dílu. Lýtkový díl lze ručním zdvihem nastavit do 5 různých poloh. Unikátní systém ErgoFrame® efektivně napomáhá prevenci dekubitů díky lepšímu rozložení tlaku v rizikové oblasti vzniku dekubitů.

PRAKTIKA VE DVOU VERZÍCH

Novou generaci mechanických lůžek představuje lůžko Praktika 1 s fixní výškou ložné plochy. Verze Praktika 2 má výškově nastavitelnou ložnou plochu, možnost náklonu do polohy TR/ATR a centrální brzdění koleček.



PRAKTICKÉ DETAILY



Zámek čel



Lišta na příslušenství



Rohová ochranná kolečka
horizontální a přídavná vertikální



Pouzdra na příslušenství

PRO BEZPEČÍ PACIENTA

Propracovaný koncept postranic nabízí možnost individuálního nastavení a zároveň zajišťuje maximální bezpečí pro pacienta.



Protector je možné kombinovat s jednoduchými postranicemi i dělenými plastovými postranicemi.

A

Extender výšky jednoduchých postranic pro možnost použití vysoké matrace.

B

Jednodílné sklopné postranice.

C

Technická data

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY	Praktika 1	Praktika 2
Externí rozměry	218 × 99,5 cm	218 × 99,5 cm
Rozměry ložné plochy (matrace)	200 × 90 cm	200 × 90 cm
Max. výška matrace	16 cm / + 10 cm s extendrem	16 cm / + 10 cm s extendrem
Výška ložné plochy	55 cm	42–76 cm
Max. úhel zádového dílu	70°	70°
Max. nastavení stehenního dílu	34°	34°
Náklon TR/ATR	—	12° / 12°
Ergoframe® zádového a stehenního dílu	10 + 6 cm	10 + 6 cm
Hmotnost lůžka	80 kg	120 kg
Bezpečné pracovní zatížení (SWL)	200 kg	200 kg



LINET

Members of LINET Group

LINET, spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz