

GRACIE

LINET

Un'esperienza di livello superiore
per ginecologi e pazienti



La postazione ginecologica del futuro

GRACIE

Uno strumento ginecologico di qualità eccezionale, studiato per alleviare la tensione nelle pazienti e migliorare l'efficienza clinica.

Ottimizzazione del luogo di lavoro

Impostazioni di configurazione individuale per tre medici. In questo modo l'ambulatorio può essere facilmente condiviso da più professionisti.



Ecografie eseguibili in poltrona, senza far spostare la cliente.



Carrello porta strumenti ergonomico, facilmente accessibile e semplice da spostare.



Strumenti all'avanguardia



Colposcopio integrato, alloggiato in sicurezza sotto la seduta e immediatamente disponibile.



Schermo LCD Full HD e trasferimento wireless di immagini e video al PC del medico.

Funzionamento fluido



Selezione della posizione tramite comando wireless e successive regolazioni mediante i comandi a pedale e manuali.



Posizionamento rapido, con pulsanti preconfigurati per impostare le regolazioni della poltrona più frequenti.



Accesso facilitato alla poltrona anche per le pazienti con difficoltà motorie, grazie alla possibilità di rimuovere completamente i poggiatesta.

PANORAMICA DELLE SOLUZIONI

Miglioramento del flusso di lavoro per gli operatori sanitari



Ottimizzazione del luogo di lavoro

Grazie al colposcopio integrato e ad altri accessori, il medico può visitare la paziente in modo assolutamente ergonomico e senza necessità di spostarsi.



Funzionamento fluido

Per rendere il posizionamento più rapido e semplice, i comandi a pedale o manuali consentono di raggiungere varie posizioni personalizzabili. La possibilità di portare la poltrona in posizione ecografica consente al medico di risparmiare tempo e riduce al minimo la necessità di spazio.



Facilità di sanificazione

La poltrona è dotata di una ruota telescopica che ne facilita lo spostamento all'interno dell'ambulatorio.



Miglioramento del comfort della donna



Il benessere delle donne

La visita avviene in modo discreto, in modo che la paziente si senta rilassata e a proprio agio. Una poltrona comoda e un'altezza di ingresso ridotta offrono un maggior comfort a tutte le pazienti.



Maggiore sicurezza

La poltrona è dotata di molteplici funzioni di sicurezza e può essere utilizzata anche da pazienti immobili.



OTTIMIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO

Il colposcopio integrato, la possibilità di eseguire visite ecografiche direttamente in poltrona e altri accessori rendono Gracie uno strumento ginecologico estremamente moderno ed ergonomico.



I VANTAGGI PER TE


- Nessuna necessità di far spostare la paziente per le ecografie
- Più spazio libero in ambulatorio grazie alla soluzione "2 in 1"
- Colposcopio integrato nella poltrona ginecologica
- Strumentazione per le visite situate in posizione ergonomica
- Connettività tra lo schermo LCD e il computer del medico

SOLUZIONE

La poltrona ginecologica Gracie riunisce i vantaggi di una poltrona e di un lettino da visita in un unico dispositivo.

Colposcopio integrato

Gracie è una delle poche poltrone sul mercato a disporre di un colposcopio integrato. Il colposcopio integrato è compatto, alloggiato in sicurezza sotto il sedile della poltrona e immediatamente disponibile. La connessione wireless permette di trasmettere immagini ad alta definizione alla propria postazione di lavoro per la successiva analisi e archiviazione.

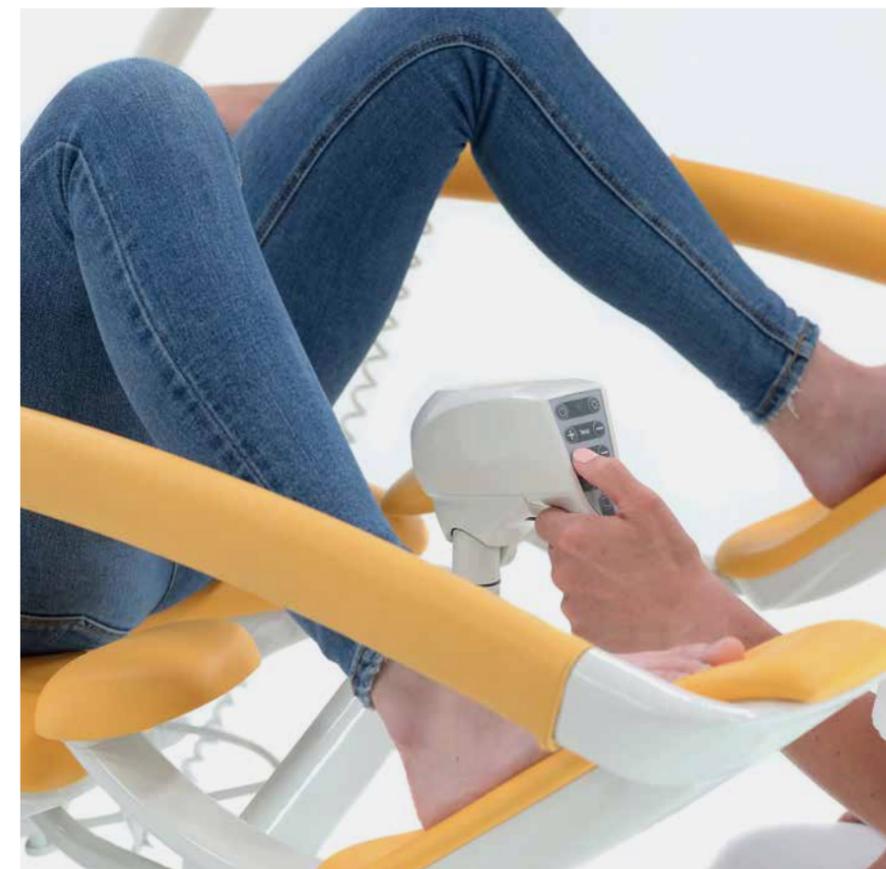

Funzioni pratiche:


- Messa a fuoco manuale/automatica
- Zoom ottico 20x
- Risoluzione Full HD
- Fermo immagine
- Acquisizione di immagini e video
- Trasferimento wireless di immagini e video al PC
- Filtro verde
- Illuminazione a LED a due intensità
- Filtro polarizzatore



Il video colposcopio può essere alloggiato sotto il sedile riscaldato, in modo da non interferire con la visita in corso.



Il filtro polarizzatore elimina i fastidiosi riflessi durante la visita medica.

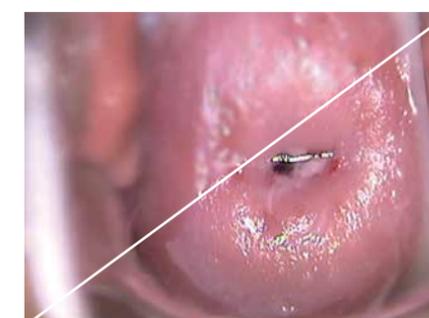


Il video colposcopio Full HD fornisce immagini ad alta risoluzione per una diagnosi precisa.



Il filtro verde esalta il rosso dei capillari, eliminando la percezione di interferenza dei tessuti circostanti.

Facilità di utilizzo dell'ecografo

La possibilità di portare la poltrona in posizione ecografica consente al medico di risparmiare tempo e ridurre al minimo la necessità di spazio, aumentando il comfort della paziente. L'ecografo è collegato al monitor e consente di passare dalla modalità colposcopio alla modalità ecografia.

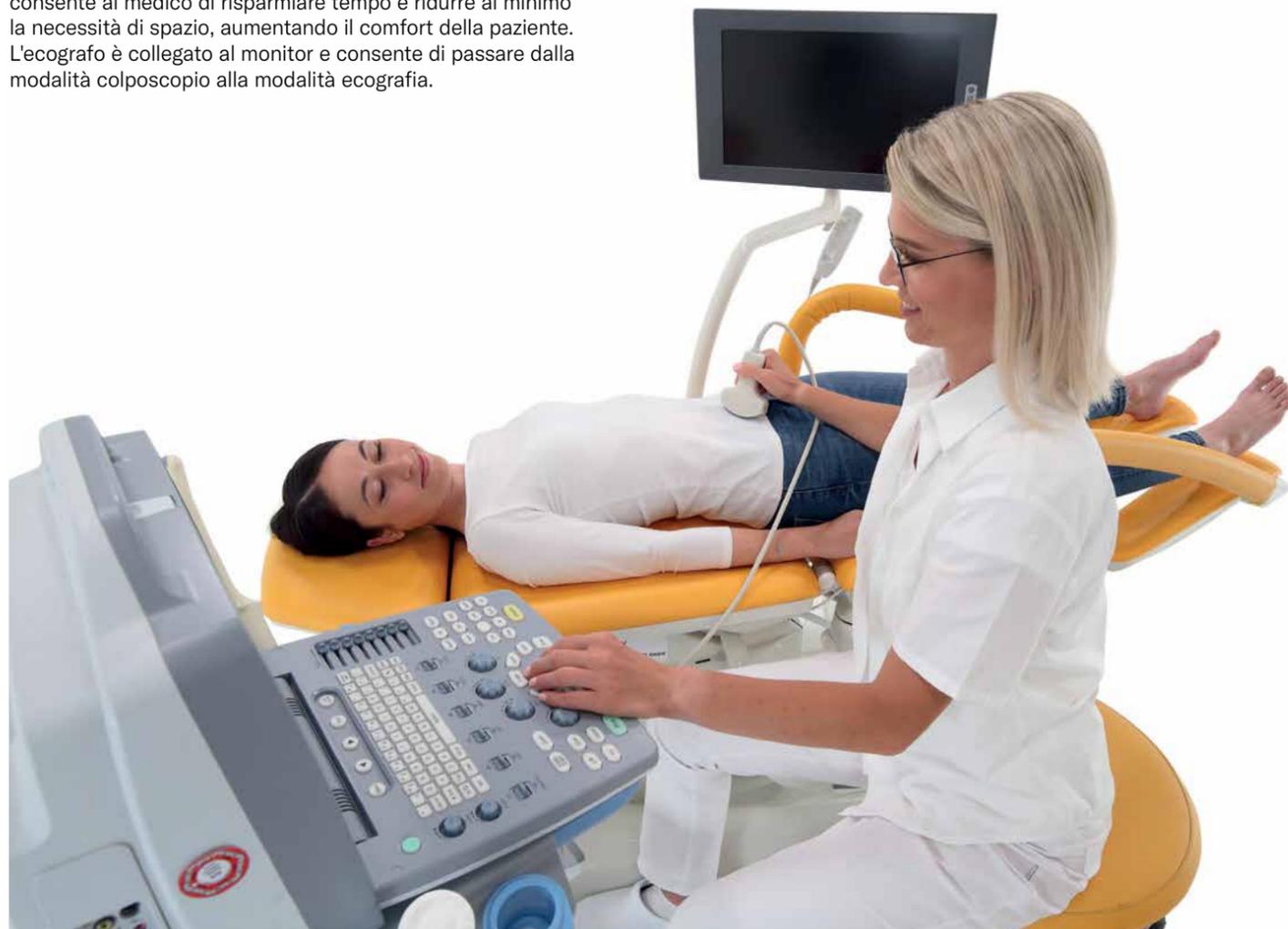

La regolazione elettrica dei poggiatesta rende l'assunzione della posizione orizzontale più gradevole per la cliente, ad esempio durante un'ecografia.

Soluzione wireless

- Semplicità, comodità e rapidità
- Possibilità di connettersi alla rete già presente
- Maggiore sicurezza, assenza di cavi
- Nessuna necessità di installazione sul computer
- Immagini e video vengono salvati nella memoria della sedia

Carrello porta strumenti

Il carrello porta strumenti fa risparmiare spazio in ambulatorio e fornisce al medico il massimo comfort durante le visite.

Area per riscaldare gli strumenti

Posizionamento ergonomico degli strumenti

Cestelli per rifiuti e speculum usati

Due cestelli anteriori

Ruote anteriori frenanti



Il cestello posteriore per gli speculum usati può essere riempito di soluzione disinfettante.



Pratico contenitore per gli speculum usati.



L'altezza e l'inclinazione dello schermo regolabili consentono la massimizzazione dell'ergonomia durante l'utilizzo.



UTILIZZO FLUIDO

I comandi chiari consentono di risparmiare tempo e migliorano la sicurezza del medico durante le visite. I movimenti rapidi e le posizioni preimpostate della poltrona aumentano l'efficienza delle visite.



I VANTAGGI PER TE

- Posizione ergonomica del medico durante la visita
- Accesso perfetto alla paziente
- Utilizzo rapido e intuitivo della poltrona

SOLUZIONE

Gracie tiene conto del tempo necessario e rende la visita ginecologica il più efficiente possibile.

POSIZIONI PREIMPOSTATE

Le posizioni preimpostate e personalizzabili (ad es. posizione di accesso, di visita e per l'ecografia) possono essere facilmente raggiunte mediante i comandi a pedale o manuali, in modo da rendere il posizionamento più facile e veloce nelle pratiche quotidiane senza rinunciare al comfort della cliente.

Posizione di accesso

La posizione di accesso ad altezza molto ridotta è adatta anche alle pazienti con difficoltà motorie, senza l'esigenza di aggiungere scalette.



Posizione di visita

La posizione di visita può essere ampiamente regolata, consentendo al medico di lavorare nella massima comodità ed ergonomia.



Colposcopia

Il video colposcopio integrato riduce l'ingombro e aumenta l'efficienza della visita. In questa posizione, il medico può accedere agevolmente alla paziente.



Posizione ecografica

La possibilità di portare la poltrona in posizione ecografica consente al medico di risparmiare tempo e ridurre la durata della visita. La posizione è regolabile elettricamente in modo facile e veloce.



Condivisione del luogo di lavoro

La sedia consente la regolazione individuale da parte di tre medici. L'ambulatorio può quindi essere facilmente condiviso senza compromettere il comfort del medico di turno. Si tratta di una soluzione particolarmente utile negli ospedali.



Impostazioni rapide e variabili

La regolazione elettrica di altezza inclinazione dello schienale e dei poggiatesta avviene in maniera rapida e fluida. La variabilità delle impostazioni semplifica il lavoro del medico, rendendo la permanenza della paziente in poltrona più gradevole.



Il design esclusivo dei supporti consente il posizionamento ottimale e naturale del bacino durante gli esami interni, senza l'esigenza di regolare la poltrona.



La movimentazione sincrona dei supporti ne facilita la regolazione orizzontale con una sola mano.

Facile funzionamento



COMANDO FISSO A PEDALE
Per regolare la posizione di visita in base alle proporzioni individuali della paziente.



COMANDO A PEDALE WIRELESS
Per la regolazione delle posizioni di accesso, ecografia e visita con una portata di 10 metri.



COMANDO MANUALE
Per memorizzare le posizioni (accesso, visita, ecografia) preferite da tre medici.



FACILITÀ DI SANIFICAZIONE

La poltrona ginecologica Gracie è realizzata in similpelle antibatterica con rivestimento privo di giunzioni ed è dotata di ruota telescopica appositamente progettata per il suo spostamento all'interno dell'ambulatorio, facilitandone la movimentazione.

I VANTAGGI PER TE

— Design che facilita la pulizia

— Nessuna fatica nel posizionamento della poltrona



SOLUZIONE

La poltrona Gracie è dotata di rivestimento in similpelle antibatterico privo di giunzioni. Le superfici sono compatte e chiuse.



Rivestimento sfoderabile.



Rivestimento privo di giunzioni.



Rivestimento in PVC per alcune sezioni della poltrona.



La poltrona è dotata di porta rotolo di carta integrato.



IL BENESSERE DELLE DONNE

Grazie al design accattivante, alla comodità di accesso e ai comandi discreti della poltrona, la paziente si sente rilassata e a proprio agio. Non deve cambiare posizione durante l'ecografia.



I VANTAGGI PER TE

- Visita senza stress
- Massimo comfort per le pazienti
- Discrezione
- Regolazione facile e comoda dalla posizione seduta a quella supina

SOLUZIONE

La poltrona Gracie aiuta le donne ad affrontare le visite ginecologiche senza inutili stress.

Altezza di ingresso ridotta

La posizione di accesso molto bassa è adatta anche alle pazienti di minor statura, senza la necessità di aggiungere scalette. E' facilmente raggiungibile, con il tocco di un pulsante, per consentire alle clienti di salire facilmente sulla poltrona, garantendo la massima comodità e sicurezza anche alle pazienti più anziane o con difficoltà motorie.



Comfort

Il design e il rivestimento della poltrona aumentano il comfort delle pazienti durante le visite. I supporti per mani e gambe contribuiscono a farle sentire più sicure.



Maggiore discrezione

La paziente non deve spostarsi in un altro luogo per esame ecografico. Può tranquillamente restare nella comoda poltrona.



La possibilità di regolare la poltrona da lontano aumenta il livello di discrezione, facendo sentire le pazienti più a loro agio.



PER LA SUA SICUREZZA

La configurazione flessibile della poltrona consente di visitare anche pazienti con difficoltà motorie o completamente immobili. La sicurezza delle pazienti è garantita da svariate caratteristiche.



I VANTAGGI PER TE


- Movimentazione più semplice e sicura di pazienti immobili
- Nessun inconveniente dovuto alla presenza di cavi e all'inadeguatezza della struttura

SOLUZIONE

Una soluzione che promuove la sicurezza delle pazienti in ogni situazione.

Per pazienti immobili

La possibilità di aprire completamente o rimuovere i poggiatesta aiuta le pazienti in sedia a rotelle a sedersi in poltrona.

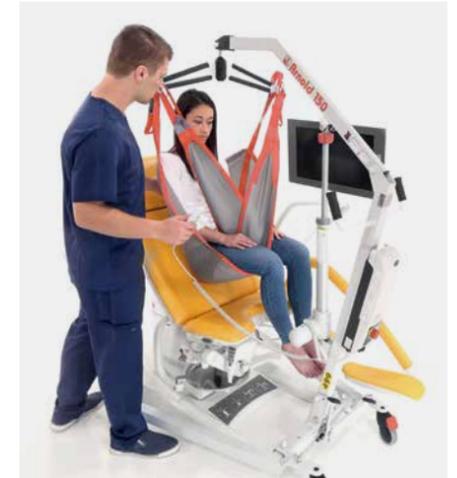

Le impostazioni flessibili di Gracie agevolano il trasferimento anche di pazienti totalmente immobili.

Situazioni di emergenza

- Nelle situazioni di urgenza, è possibile portare la poltrona in posizione di Trendelenburg.
- L'arresto intuitivo della poltrona tramite qualsiasi pulsante aumenta la rapidità d'intervento nei momenti critici.



La sicurezza è nei dettagli



Controllo della poltrona e trasferimento wireless di immagini e video al PC per risolvere il problema dei cavi elettrici sul pavimento dell'ambulatorio.



Sensore di sicurezza che arresta il movimento della poltrona in caso di urto con il video colposcopio.



Sensore di sicurezza che arresta il movimento della poltrona in caso di deviazione.



Batteria di riserva con indicatore di carica.

DOTAZIONI

Accessori



GKB-021 | Poggiapiedi per il medico



GKB-060.19 | Comando a pedale wireless mobile di ricambio (max. 4 pz.)



ZP-25.X | Cinghia di fissaggio (coppia)



GKB-041 | Eurolath, acciaio inossidabile, sinistra*



GKB-116 | Porta rotolo carta esterno



GKB-092.X | Cuscino piatto esterno



GKB-093.X | Cuscino semicircolare



GKB-098 | Copertura PVC supporto piedi (coppia)



GKB-117 | Eurolath, acciaio inossidabile, sezione posteriore, sinistra*



GKB-205.X | Poggiapiedi senza lampada, versione divisibile D/S sinistra*



GKB-2202 | Poggiapiedi con lampada



GKB-201.X | Poggiapiedi standard



GKB-077 | Copertura PVC sotto seduta



GKB-163 | Copertura PVC seduta



GKB-111 | Copertura PVC poggia testa



GKB-112 | Copertura PVC cuscino semicircolare



GKB-207.X | Poggiagambe divisibili tipo Goepel



GKB-230 | Presa Terminale




Supporto colposcopio ottico*



GKB-055 | Vaschetta strumenti, grande, inossidabile*



GKB-113 | Copertura PVC cuscino piatto

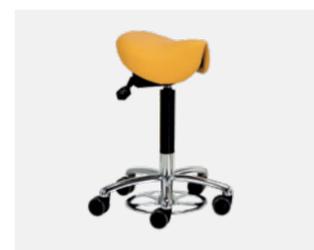

GKB-076 | Sgabello medico, ergonomico, regolabile con la gamba



ZK-05.X | Sgabello medico, regolabile in altezza, bloccaggio manuale



GKB-075 | Sgabello medico, ergonomico, regolabile in altezza, bloccaggio manuale



GKB-097 | Vaschetta grande con collegamento, inossidabile



GKB-054 | Vaschetta strumenti, plastica



GKB-168.X | Riscaldamento seduta



GKB-115.X | Piano gambe

Colori



P - Arancione



F - Verde oceano



B - Blu brillante



M - Giallo



A - Prugna

Dotazioni standard

	Versione con colposcopio e monitor integrati	Versione con monitor integrato	Versione base
Comando a pedale wireless	✓	✓	✓
Comando manuale integrato	✓	✓	✓
Tre funzioni di memoria per tre medici	✓	✓	✓
Posizionamento rapido della poltrona	✓	✓	✓
Ruote telescopiche integrate	✓	✓	✓
Batteria di riserva con indicatore di carica	✓	✓	✓
Coperture PVC per sotto seduta e poggiatesta	✓	✓	✓
Porta rotolo carta integrato nello schienale	✓	✓	✓
Rivestimento privo di giunzioni	✓	✓	✓
Scelta dei colori	✓	✓	✓
Accoppiamento equipotenziale	✓	✓	✓
Pulsante per posizione Trendelenburg	✓	✓	✓
Indicazione di posizionamento scorretto della poltrona	✓	✓	✓
Imballaggio per il trasporto	✓	✓	✓
Video colposcopio Full HD integrato	✓		
Colposcopio con blocco anticollisione	✓		
Video colposcopio con illuminazione a LED	✓		
Due intensità di illuminazione del video colposcopio	✓		
Filtro polarizzatore integrato	✓		
Connessione WLAN/LAN della poltrona al PC	✓		
HDMI IN/OUT	✓	✓	
Cavo Full HD	✓	✓	
Schermo LCD Full HD da 21"	✓	✓	

PARAMETRI TECNICI

Regolazione altezza


Altezza di accesso (seduta)	520 ±5 mm
Altezza max. (seduta)	1.150 ±5 mm

Dimensioni

Larghezza poltrona, seduta	630 ±5 mm
Larghezza poltrona, totale	760 ±5 mm
Lunghezza poltrona, max.	1.780 ±5 mm

Carico max.

Peso paziente	180 kg
Capacità di carico max. della poltrona	210 kg

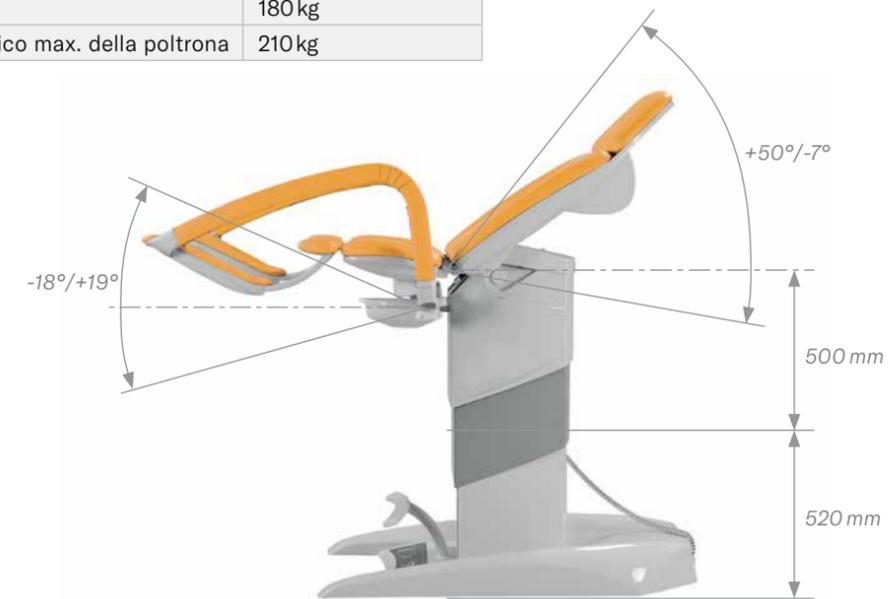


Parametri elettrici

Tensione	100-230 V
Frequenza	50/60 Hz
Tipologia parti applicate	CF
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP X4

Regolazione elettrica

Angolo regolazione schienale	-7°/+50°
Angolo regolazione in altezza poggiatesta	-18°/+19°
Angolo regolazione seduta	+5°/+10°

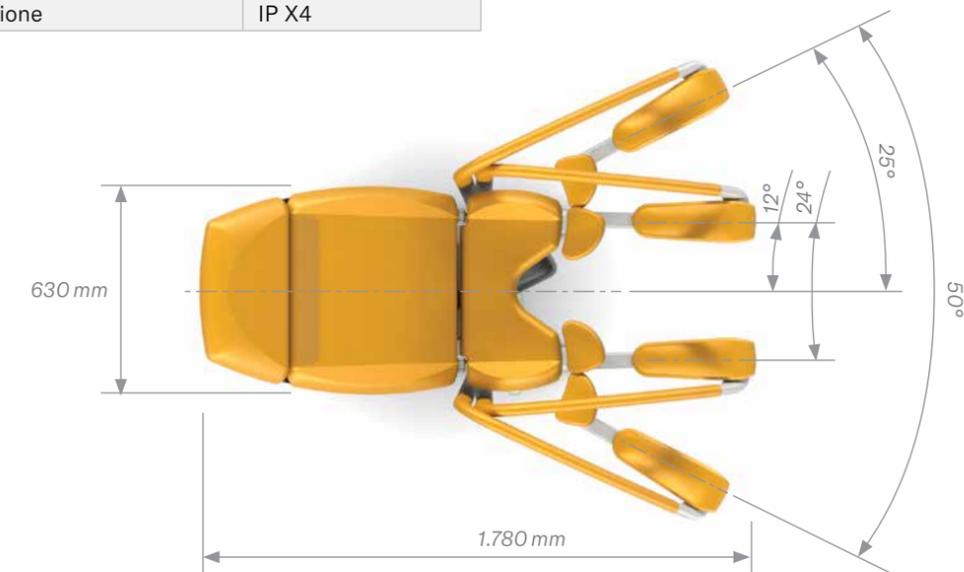

PANORAMICA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE



Colposcopio integrato
Video colposcopio Full HD



Ecografie
Connessione automatica
allo schermo LCD e al
monitor del computer



Schermo LCD Full HD (1080i)
Trasferimento wireless di
immagini e video al PC del
medico



Comando a pedale wireless
Soluzione priva di cavi



Carrello porta strumenti
Spazio progettato
ergonomicamente




Ampia scelta di colori
Stesso colore per lo
sgabello medico



**Regolazione in altezza
della poltrona**
Maggior comfort per il
medico



**Posizionamento dello
schienale e poggiatesta**
Per un accesso facilitato e
comfort delle pazienti

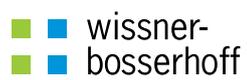

LINET

Members of LINET Group

LINET Italia s.r.l. Unipersonale

Via G. Galilei, n. 48 25020 Poncarale (Bs)

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116 | e-mail: info@linet.com | www.linet-italia.com



www.linet.com