

Pura



Fauteuil multifonctions

Solutions multiples pour



Pura chirurgie ambulatoire

Fauteuil entièrement équipé pour la chirurgie ambulatoire, le rétablissement et l'examen.

interventions ambulatoires



Pura soins

Fauteuil confortable pour les séances de dialyse, les traitements oncologiques et les dons de sang.

360° Les soins à 360°

BRANCARDAGE FACILE

Le brancardage du patient est sécurisé et demande peu d'effort physique.



ASSISE CONFORTABLE

Une structure ergonomique et un rembourrage souple assurent le confort du patient pendant les interventions longues.

Brancardage

Pu

Confort

avec le fauteuil Pura

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Des barrières latérales uniques assurent la sécurité du patient. Un mécanisme Soft Drop permet de les abaisser de manière simple et fluide pour accéder facilement au patient.

Sécurité

ra

Rétablissement



REMISE SUR PIED

La position basse et sécurisée permet au patient de s'installer dans le fauteuil et de le quitter de manière confortable.

La sécurité avant tout

Les nouvelles barrières latérales du fauteuil Pura chirurgie améliorent le niveau de sécurité lors des interventions professionnelles ambulatoires et offrent davantage de sécurité et de confort aux patients. Les technologies LINET appliquées améliorent l'ergonomie et facilitent considérablement le travail des infirmiers.

Technologie Soft Drop

Les barrières latérales sont dotées de la technologie Soft Drop, qui permet de les manier facilement et en douceur. Les barrières peuvent être abaissées de manière fluide et silencieuse, ce qui représente un confort supplémentaire à la fois pour le personnel et pour le patient.




Position décline

La position décline (position de Trendelenburg), utilisée en cas de malaise, fait partie des réglages prédéfinis du fauteuil Pura.



CPR mécanique

Un mécanisme rapide permet de placer rapidement le fauteuil dans une position optimale pour la CPR. La plateforme du fauteuil se dégonfle pour fournir un appui ferme, afin de faciliter le massage cardiaque.

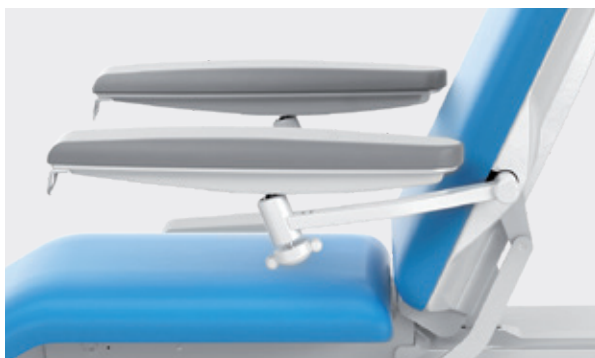


Accoudoirs ergonomiques

Le fauteuil Pura soins est équipé d'accoudoirs confortables, parfaits pour les interventions de longue durée telles que les séances de dialyse ou de chimiothérapie.

Position réglable

Les commandes électriques simples et rapides à utiliser permettent de régler la hauteur du fauteuil afin d'améliorer l'ergonomie lors des interventions sur le patient.

Grâce aux nombreuses positions du dossier et du repose-jambes le fauteuil Pura peut être utilisé dans diverses situations, de la position horizontale pendant les interventions thérapeutiques à des positions personnalisées à l'aide de réglages simples pendant séance de soins de longue durée.

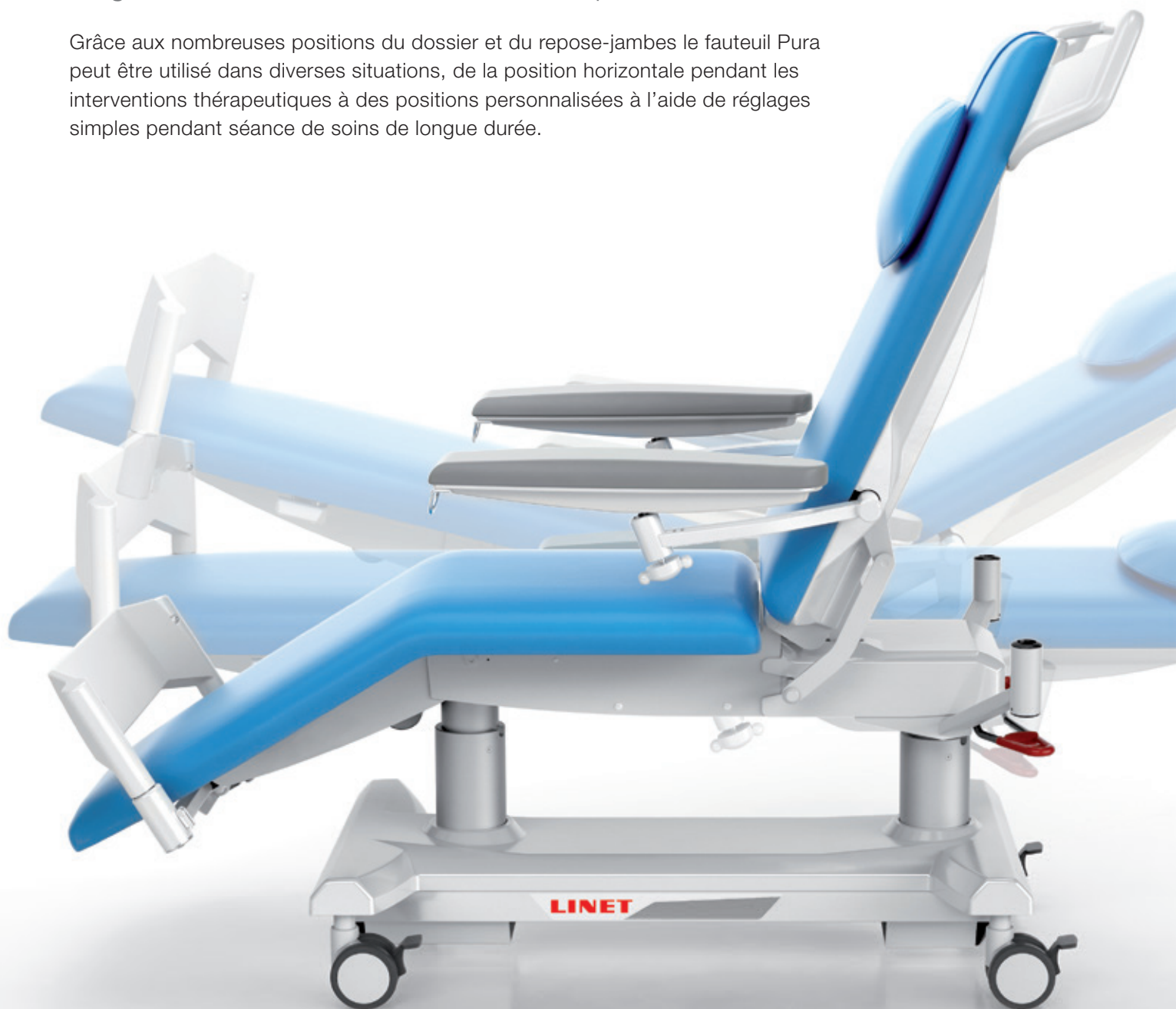

Position de Fowler

Le fauteuil Pura peut être installé en position de Fowler pour placer le patient de manière optimale dans une position semi-allongée, afin de soulager la douleur et de faciliter la respiration.



Télécommande portable

La télécommande conviviale et ergonomique propose des paramètres prédéfinis afin de régler le fauteuil en position décline, allongée et assise. Elle est également équipée d'un système de verrouillage de sécurité des fonctions, d'un bouton GO et d'autres fonctionnalités intuitives pour régler facilement et rapidement le fauteuil.

Brancardage facile

Les caractéristiques de déplacement et de maniement permettent de brancarder le patient rapidement et de manière sécurisée, avec un minimum d'effort physique.

Brancardage facile et sécurisé

La structure de pointe du châssis, équipée de roues de 150 mm de diamètre et d'un système de frein central, assure un brancardage optimal du patient dans le fauteuil. Grâce à ses détails soignés, tels que la poignée de brancardage et les protections antichocs, ce fauteuil est idéal pour brancarder les patients dans les hôpitaux et les services ambulatoires.



Poignée de brancardage

La partie pied peut être équipée d'une poignée solide qui permet un maniement ergonomique du fauteuil, notamment pendant le brancardage.



5e roue

Une 5e roue peut être installée sous le châssis en option. Ce mécanisme ingénieux facilite le déplacement du fauteuil dans les espaces confinés, les couloirs et les ascenseurs.

Confort et sécurité pendant les

Afin de faciliter au maximum le travail du personnel soignant, le fauteuil Pura est doté d'un nouveau concept innovant de contrôle des infections et d'un ensemble sophistiqué de fonctionnalités pratiques.



Contrôle des infections

La ligne de construction uniforme et les surfaces lisses forment une base efficace pour améliorer l'hygiène en toute simplicité.




Support pour bouteille d'oxygène

Ce support peut accueillir une bouteille d'oxygène en position horizontale.



Casier en plastique

Espace pour les effets personnels.

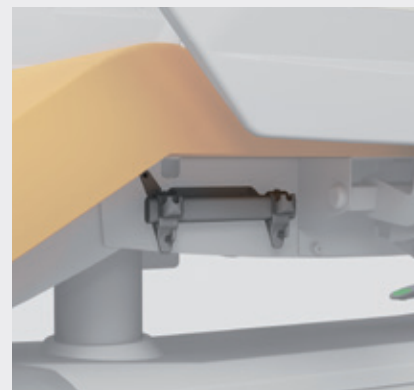

Support de poche à urine

Ce support peut accueillir une poche à urine de 2 litres maximum.

interventions

Le design du fauteuil a été essentiellement adapté afin de garantir le confort du patient. Le rembourrage souple et le matériau utilisé pour les garnitures constituent des prérequis de base.

Installation dans le fauteuil et descente

La position basse et sécurisée permet au patient de s'installer dans le fauteuil et de le quitter de manière confortable.



Casier verrouillable pour effets personnels

Ce casier est conçu pour contenir les petits effets personnels du patient, tels que des clés, un téléphone ou un portefeuille. Il est accompagné de clés qui permettent de le verrouiller.



Dérouleur de draps d'examen

Ce fauteuil multifonction est équipé d'un dérouleur de draps d'examen intégré dans la partie tête.



Table amovible

Table pratique avec un support distinct, pour un confort accru du patient.

Paramètres techniques

Pura soins

- 1 Accoudoirs
- 2 Repose-pieds
- 3 Porte-sérum
- 4 Poignée de brancardage



Paramètres techniques

Longueur	Longueur totale d'accueil	2 123 mm
Largeur	Assise	590 mm
Hauteur (roues de 100 mm)	Max. – Assise	934 mm
Hauteur (roues de 150 mm)	Max. – Assise	970 mm
Roues	Diamètre des roues / frein	100 mm / frein individuel
	Diamètre des roues / frein	150 mm / système de frein central
Angles de réglage	Dossier	70°
	Accoudoir – Vertical	+ 42° / – 8,5°
	Accoudoir – Horizontal	360°
Paramètres électriques	Protection contre les infiltrations d'eau et de poussière	IPX4
	Indice de protection du dispositif	I.
	Classification des parties appliquées	B
	Tension de la batterie de secours	24 V / 1,2 Ah
	Tension – Entrée	100-240 V
Position décline (TR)		12°
Charge maximale d'utilisation		205 kg
Poids maximal du patient		190 kg

Pura chirurgie ambulatoire



- 1 Barrières latérales
- 2 Roues
- 3 Porte-sérum
- 4 Poignée de brancardage

COULEURS DISPONIBLES

Couleurs standard



Bleu



Jaune



Orange



Vert



Lavande

Autres couleurs



Pura

Patient

- Nouvelles barrières latérales de sécurité
- Installation et descente confortables
- Polyvalence et confort



- Plus grande fonctionnalité et meilleure ergonomie
- Capacités de brancardage exceptionnelles
- Nettoyage et hygiène simplifiés



Personnel

Gestion

- Design synonyme de prestige
- Excellent rapport qualité-prix



 wissner-
bosserhoff

LINET

Members of LINET Group

LINET FRANCE

7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | FRANCE

Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail : info@linet.fr | www.linet.fr



Fabricant : Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, République tchèque, membre du groupe LINET.

LINET | Edition 11/2019 | Les couleurs sont susceptibles d'être légèrement différentes. Tous droits réservés quant aux caractéristiques techniques.