


Pura



Poltrona Multifunzionale

Soluzioni variabili per ogni Day

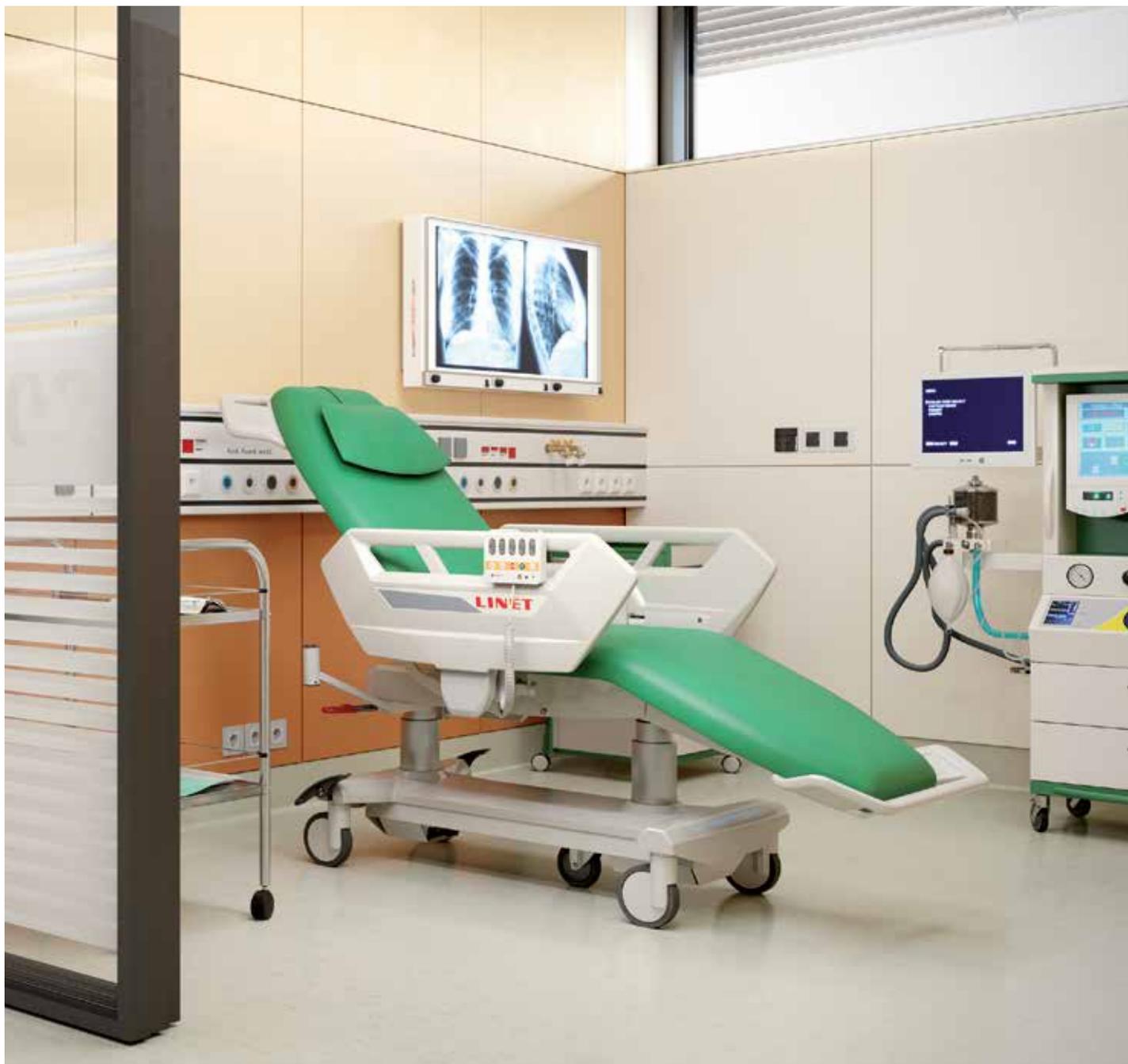

Pura ambulatorio chirurgico

Poltrona completamente attrezzata per gli ambulatori chirurgici, di diagnosi o strumentali.

hospital



Pura per trattamento

Confortevole negli ambulatori di dialisi, di oncologia o donazione di sangue.

360° di cura con Pura

TRASPORTO FACILITATO

Il trasporto del paziente è sicuro e maneggevole per l'operatore.



COMODA SEDUTA

E' assicurata grazie
alla struttura ed alla
morbida imbottitura.

Transport

Pu

Comfort

FOCALIZZATA SULLA SICUREZZA

L'esclusivo design delle sponde garantisce la sicurezza dei pazienti, mentre il meccanismo Soft Drop consente di abbassare facilmente leponde e di accedere facilmente al paziente.

Safety

ra

Recovery



RECUPERO E DIMISSIONE

La posizione bassa di sicurezza è confortevole per la seduta, la fuoriuscita o durante il trattamento.

Focalizzata sulla sicurezza

Le nuove sponde di Pura sono state pensate per incrementare la sicurezza dei pazienti in ambulatorio, aumentare la protezione e il comfort. Questa nuova tecnologia LINET, rende la poltrona ergonomica e facilita molto il lavoro degli operatori sanitari.

Abbattimento servo assistito

Le sponde sono dotate di meccanismo Soft Drop che accompagna il movimento in modo servo assistito. Il movimento dolce e automatico è confortevole, non solo per gli operatori, ma rende piacevole l'utilizzo anche per il paziente.



Posizione Trendelenburg

La posizione anti-shock, anche chiamata posizione Trendelenburg, e' utilizzata in caso di brevi collassi ed e' una delle funzioni pre-settate presenti nella poltrona Pura.



Sblocco meccanico CPR

La leva e' raggiungibile in modo rapido. La struttura si riallinea completamente garantendo un supporto stabile per un corretto massaggio cardiaco.



Braccioli ergonomici

Pura medica e dotata di braccioli ergonomici ideali per trattamenti di dialisi o terapie oncologiche.

Variabilita' dei posizionamenti

I comandi elettrici regolano in modo rapido e facile i movimenti della poltrona per permettere un accesso ergonomico sul paziente.

La possibilità di regolare lo schienale e la zona piedi della poltrona Pura ne permettono il suo utilizzo in varie situazioni, dalle procedure terapeutiche in posizione orizzontale alla movimentazione durante procedure terapeutiche più lunghe.



Posizione di Fowler

La poltrona Pura permette di posizionare il paziente nella posizione di Fowler. Tale posizione riduce il dolore e aiuta la respirazione.



Pannello di controllo

il suo utilizzo semplice ed ergonomico comprende il movimento di Trendelenburg, la posizione visita e l'uscita paziente. La presenza del pulsante STOP e Go, la rendono sicura nel suo utilizzo e rapida nell'ottenere svariate posizioni.

Trasporto facilitato

Le funzioni di guida e manovrabilita' consentono un trasporto rapido e sicuro del paziente con uno sforzo fisico minimo.

Manovrabilita' e sicurezza del trasporto

La struttura della base dotata di ruote da 150 cm e il comando centrale di frenatura sono strumenti importanti per un trasporto adeguato. Altri dettagli importanti sono le maniglie di spinta e i paracolpi, pensati per un'ottima manovrabilita' sia in ambulatorio che all'interno dell'ospedale.



Maniglie di spinta

La zona piedi puo' essere dotata di robuste ed ergonomiche maniglie di spinta.



5a ruota

La 5a ruota e' una caratteristica opzionale e permette di manovrare Pura in spazi ristretti, corridoi o ascensori.

Sicurezza e comfort

Per facilitare al massimo il lavoro degli operatori sanitari, la poltrona Pura e' dotata di particolari innovativi per garantire un controllo migliore delle infezioni ospedaliere e accessori per una adeguata personalizzazione.



Controllo delle infezioni crociate


Le colonne, la base compatta e lineare ne facilitano la pulizia. I materiali utilizzati e il trattamento antibatterico, sono una garanzia per combattere le infezioni ospedaliere.



Porta bombole O2
It is designed for holding the oxygen bottle in a horizontal position.



Contenitore plastico
Porta oggetti personali.

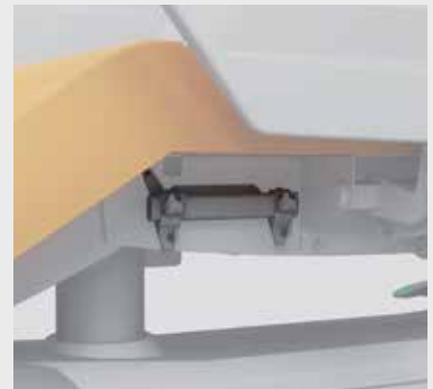

Porta sacca urine
Supporto per sacca urine con capacità massima di 2l.

Il design della poltrona Pura e' stato pensato per rendere confortevole l'utilizzo da parte del paziente. L'imbottitura morbida e il materiale di rivestimento sono requisiti di base necessari per una confortevole seduta.



Entrata e uscita dalla poltrona

La posizione bassa e' utile al paziente, sia quando e' adagiato su di essa, sia per sedersi o alzarsi.



Box richiudibile per effetti personali

Contenitore in metallo dotato di serratura per la custodia dei beni personali del paziente (es. cellulare, orologio, anelli, ecc.)



Supporto porta rotolo

Porta rotolo integrato alla struttura della poltrona in zona testa.



Tavolino rimovibile

Pratico tavolo rimovibile per aumentare il comfort del paziente.

Parametri tecnici

Pura trattamento

1 Reggi braccio

2 Supporto pediera

3 Alloggiamento aste flebo

4 Maniglie di trasporto



Parametri tecnici

Lunghezza	Totale	2,123 mm
Larghezza	Seduta	590 mm
Altezza (ruote 100 mm)	MAX. – rest area to seat section	934 mm
Altezza (ruote 150 mm)	MAX. – rest area to seat section	970 mm
Ruote	diametro	100 mm / individually braked
	diametro	150 mm / central brake
Inclinazioni raggiungibili	Schienale	70°
	Reggi braccio – verticalmente	+ 42° / – 8.5°
	Reggi braccio – orizzontalmente	360°
Parametri elettrici	Protezione contro solidi e liquidi	IPX4
	Classe di protezione	I.
	Classificazione parti applicate	B
	Voltaggio batteria ausiliaria	24 V / 1.2 Ah
	Voltaggio – in ingresso	100–240 V
Posizione Trendelenburg (TR)		12°
Carico di lavoro in sicurezza (SWL)		205 kg
Peso massimo paziente		190 kg

Pura ambulatorio chirurgico



1 Sponde laterali

2 Freno centralizzato

3 Alloggiamento aste flebo

4 Maniglie di trasporto

COLORAZIONI DISPONIBILI

Standard colours



blue



giallo



arancione



verde



lavanda

Non-standard colours



Pura

Patient

- Nuove sponde
- Accesso ed uscita confortevoli
- Autonomia nella gestione e nella cura



- Alta qualità delle prestazioni e migliore ergonomia
- Trasferimenti facilitati al di sopra degli standard
- Facile sanificazione ed igiene



Staff

Management

- Design di qualità'
- Ottimo rapporto qualità'/prezzo



 **wissner-**
bossenhoff

LINET

Members of LINET Group

Linet Italia. s r.l. unipersonale

Via Galileo Galilei 48 | 25020 Poncarale BS | Italia

tel.: +39 030 3229519 | fax: +39 030 2540116 | e-mail: info@linetitalia.com | www.linet-italia.it

