

Praktika

Una nueva generación de camas manuales



Paciente

- Diseño moderno
- Exclusivo sistema Ergoframe®



Personal

- Cambio de posición continuo y seguro
- Fácil higiene de la cama



Administración

- Larga vida útil
- Fabricada en Europa de acuerdo con el estándar EN 60601-2-52



Diseño moderno y larga vida útil

1 Cabecero y piecero de plástico desmontables con bloqueo

2 Barandilla partida de plástico con colores decorativos

3 Mecanismo de manivelas para el posicionamiento


4 Cubiertas plásticas extraíbles de la plataforma del colchón

5 Indicador de ángulo de la posición del respaldo



POSICIONAMIENTO VARIABLE DE LA CAMA CON EL SISTEMA ERGOFRAME®

El sencillo funcionamiento mecánico mediante manivelas permite regular el respaldo y la sección para las piernas. La sección para los pies puede ajustarse en cinco posiciones usando la manija. Mediante el exclusivo sistema Ergoframe®, que disminuye la presión en las partes del cuerpo del paciente con mayor riesgo, se garantiza una prevención efectiva ante la aparición de úlceras por presión.

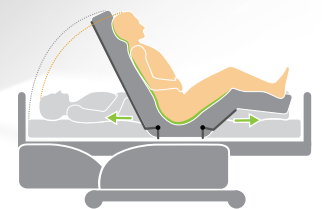

El exclusivo sistema Ergoframe®



Una plataforma de colchón habitual

CAMA PRAKTIKA EN DOS VERSIONES

La nueva generación de camas Praktika incluye la cama Praktika 1, con altura fija y la cama Praktika 2, de altura regulable, función opcional de posición de TR/ATR y freno centralizado.



DETALLES PRÁCTICOS



Bloqueo de la cabecera y piecera



Barra de accesorios




Protectores de esquinas y protectores verticales adicionales



Soporte para accesorios

PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Una solución completa de barandales que ofrece ajustes individuales y garantiza la máxima seguridad del paciente.

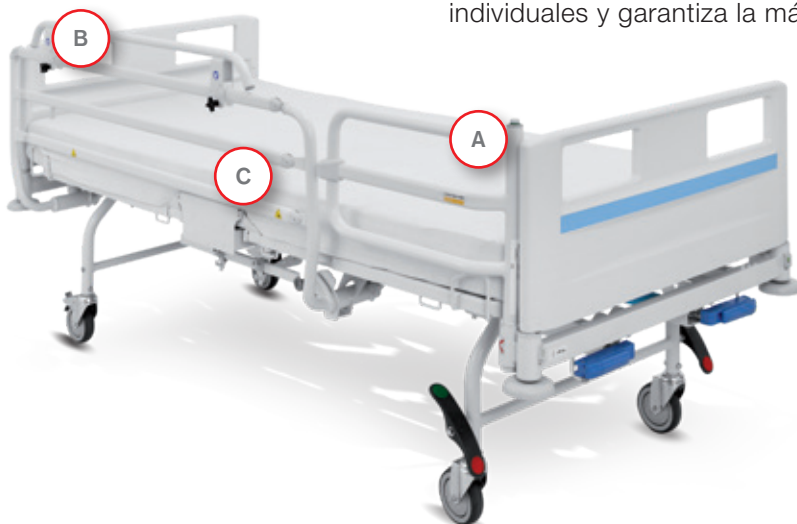

El Protector para la sección de los pies de la cama puede usarse con barandales continuos o divididos.

A

La extensión para la barandilla continua abatible incrementa la altura máxima posible del colchón.

B

Barandal continuo abatible.

C

Datos técnicos

ESPECIFICACIONES BÁSICAS	PRAKTIKA 1	PRAKTIKA 2
Dimensiones externas	218 × 99.5 cm	218 × 99.5 cm
Dimensiones del colchón	200 × 90 cm	200 × 90 cm
Altura máxima del colchón	16 cm / + 10 cm con la extensión	16 cm / + 10 cm
Altura de la plataforma del colchón	55 cm (fixed)	42–76 cm
Ángulo máximo del respaldo	70°	70°
Ángulo máximo de la sección de las piernas	34°	34°
Inclinación para posiciones de TR/ATR	—	12° / 12°
Sistema Ergoframe® (respaldo y sección para las piernas)	10 + 6 cm	10 + 6 cm
Peso de la cama	80 kg	120 kg
Carga máxima de seguridad (SWL)	200 kg	200 kg



LINET

Members of LINET Group

LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid, Spain

Tel: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72

E-mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com

