

Sprint 100



Transportní lůžko

Sprint 100



Díky

intuitivnímu ovládání

je manipulace se
Sprint 100 jednoduchá
a bezpečná.

Transportní lůžko

Výkonné, všestranné
a zároveň komfortní.



Benefits Sprint 100 v kostce

Sprint 100 umožňuje plynulý převoz pacientů, zvyšuje jejich bezpečnost a napomáhá při procesu uzdravování. Chytrý design lůžka snižuje čas a úsilí potřebné pro jeho údržbu.



Bezpečí a pohodlí pro pacienta

- Nastavení poloh napomáhajících uzdravení pacienta
- Vyšší bezpečnost pacienta
- Komfortní matrace




Usnadnění práce personálu

- Jedinečný ergonomický design
- Snadný převoz pacienta
- Bezpečná péče o pacienta



Efektivita provozu

- Efektivní péče o pacienta a jeho převoz
- Snadná údržba
- Odolnost – minimalizace nákladů na údržbu a opravy

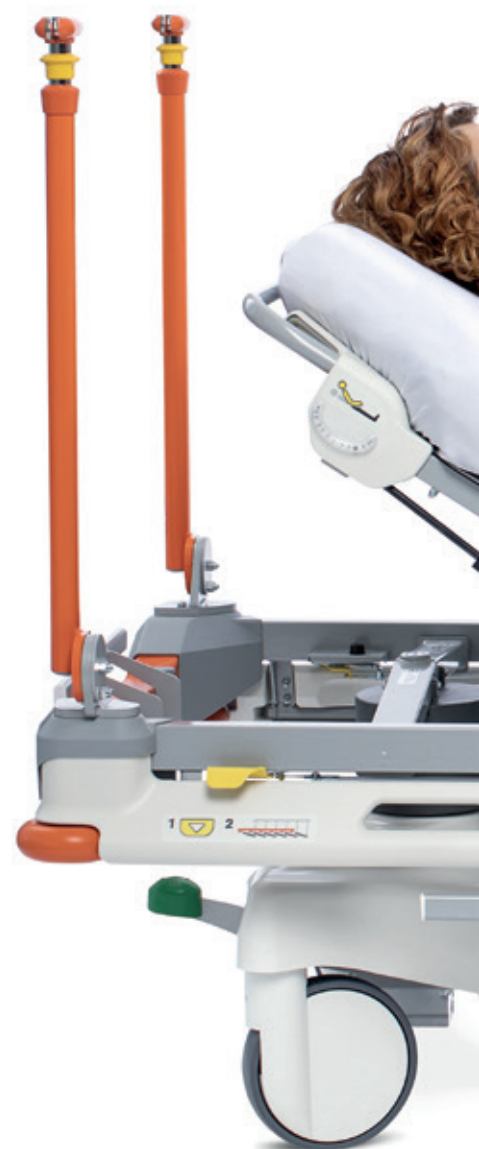



Snadný převoz pacienta

Snadný transport a manipulace s transportním lůžkem zásadně zlepšují ergonomii práce.



Ochranná kolečka

Speciálně navržená ochranná kolečka chrání lůžko při převozu před poškozením.





IV&Drive

Sprint 100 je první transportní lůžko na světě navržené tak, aby jej bylo možné tlačit za infuzní stojany.


Běžné infuzní stojany se mají při tlačení tendenci lámat. S technologií LINETu IV&Drive dokážou infuzní stojany bezpečně pojmout 100 kg pracovní zátěž, aniž by se ohnuly.⁶



EasyBrake

S EasyBrake probíhá brzdění i odbrzdění sešlápnutím pedálu směrem dolů, což snižuje fyzickou námahu a podporuje ergonomii práce.

EasyBrake díky umístění brzd ze všech stran lůžka eliminuje potřebu přesunu při brzdění.

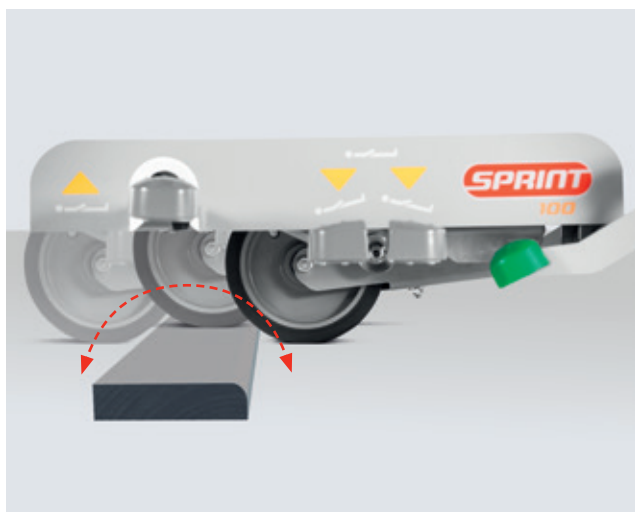

FlexiDrive

Pohodlí pacienta zvyšuje Sprint 100 využitím výsuvného 5. kolečka vybaveného funkcí tlumení nárazů, která snižuje otřesy způsobené překážkami či nerovnými povrchy.

Bezpečí a pohodlí pacienta

Bezpečí a pohodlí pacienta jsou s designem Sprint 100 spjaté od výběru komfortní matrace až po alarm pro opuštění lůžka.





SoftDrop postranice

SoftDrop postranice pokrývají většinu délky lůžka. Z obou stran lůžka se dají v případě potřeby kdykoli sklopit. Díky technologii SoftDrop se navíc postranice sklápějí plynule, pomalu a bezhlučně.



Větší pohodlí

Celkový dojem pacienta dokáže výrazně vylepšit správný výběr matrace. Sprint 100 nabízí tři varianty matrací.*

Matrace Advanced Mattress lůžka Sprint 100 s paměťovou pěnou a termovrstvou pohodlí ještě zvyšuje.



Začněte s CPR bez prodlení

Madlo pro CPR je rychle a snadno rozpoznatelné a přístupné. Upravit Sprint 100 do pozice pro CPR v krizové situaci trvá jen několik vteřin.

* Výběr matrace se liší podle nastavení stretcheru.

Pro snazší léčbu

V kritickém stavu často pacienti trpí dýchacími či srdečními obtížemi. Díky snadnému ovládání lze Sprint 100 nastavit do poloh, které podporují životní funkce pacienta.



Poloha Cardiac Chair

Poloha kardiackého křesla pomáhá pacientovi s dýcháním a funkcí oběhové soustavy.⁷

Díky hydraulickému ovládání nohou je nastavení pacienta do správné pozice snadné. Mnoho ošetrovatelských úkonů, jako například podávání léků, je snazších v poloze pacienta vsedě.



Vaskulární poloha nohou

Lůžko lze pro diagnostické potřeby dát do vaskulární polohy nohou.





Ukazatel úhlu

Zabudovaný ukazatel úhlu umožňuje snadné zjištění úhlu opěrky zad.



Náklon lůžka

Sprint 100 nabízí polohu Trendelenburg i Anti-Trendelenburg.



Trendelenburg



Anti-Trendelenburg

Péče o pacienta

Ergonomický design transportního lůžka Sprint 100 a správné polohování pacienta zjednodušují péči o něj.





Snadné přizpůsobení ložné plochy

Čtyřdílnou ložnou plochu matrace lze jednoduše přizpůsobit potřebám pacienta.



Přístup k hlavě pacienta

Díky postranicím má zdravotník volný přístup k hlavě pacienta. Postranice se dokonale přizpůsobí i poloze v úhlu 30 stupňů, a nenechají tak žádný prostor pro zranění.



Nízká výška

Díky výšce pouhých 55,5 cm může pacient z lůžka vstávat pohodlně a bezpečně.


Efektivita provozu

Stabilní a zároveň ergonomický a snadno čistitelný Sprint 100 nabízí zajímavé výhody i pro management zařízení.



Inovativní infuzní stojany

infuzní stojany lůžka Sprint 100 udrží o 35 % větší zátěž než běžné teleskopické infuzní stojany.⁸ Navíc jsou zvlášť navrženy na tlačení a manévrování.

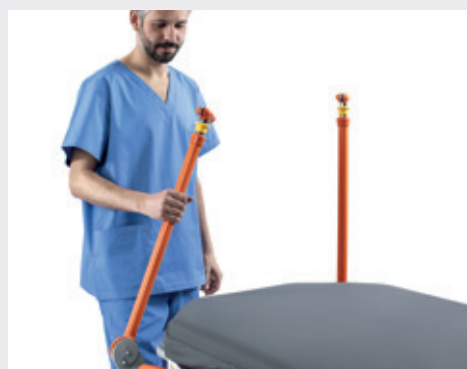




SNADNÁ ÚDRŽBA

Vyjímatelná matrace

Matraci Advanced Mattress lze snadno vyjmout pro potřeby čištění nebo případnou výměnu, čímž se snižuje riziko nákazy.

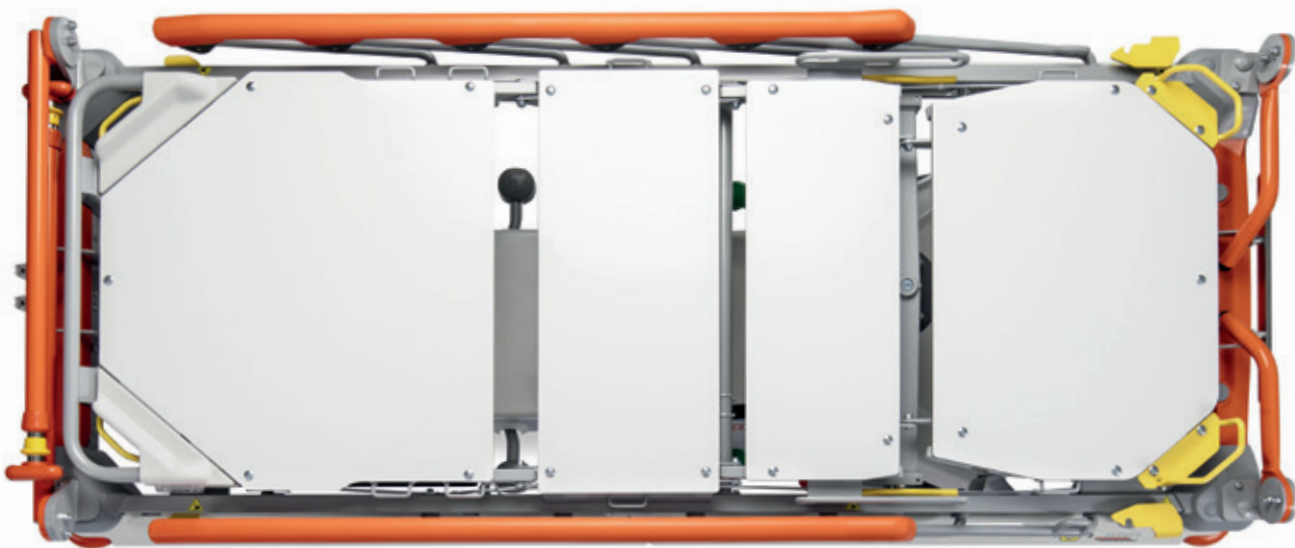

Čištění

Povrch konstrukce lůžka Sprint 100 se čistí velmi snadno. Údržba celého lůžka je absolutně nenáročná.



Přehled vlastností produktu



Postranice s funkcí SoftDrop jsou ergonomické a bezpečné.




Funkce IV&Drive umožňuje používat infuzní stojany k manipulaci s lůžkem.



Madla lze složit a mít tak lepší přístup k pacientovi.



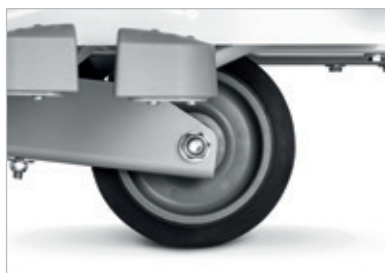


FlexiDrive je výsuvné 5. kolečko, které zaručuje plynulou jízdu a bezpečný převoz.



Ovládání nohou



Brzdy

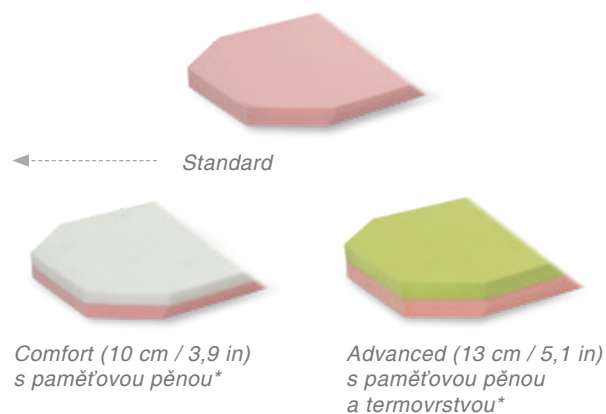

* Výběr matrace se liší podle konfigurace stretcheru.

Řešení pro Vaše potřeby

Řada příslušenství*

Sprint 100 lze dále přizpůsobit na míru pomocí široké řady příslušenství tak, aby dokázal uspokojit rozličné požadavky v nemocničním prostředí.

Multifunkční polička

Držák na rentgenové kazety

Držák na kyslíkovou lahev

Teleskopické infuzní stojany

Držák na roli papíru

Držák karty



	2dílná úzká ložná plocha	2dílná široká ložná plocha	4dílná úzká ložná plocha	4dílná široká ložná plocha
IV&Drive	✓	✓	✓	✓
FlexiDrive	✓	✓	✓	✓
SoftDrop postranice	✓	✓	✓	✓
CardiacChair	✗	✗	✓	✓
Kompatibilita s C-rameny	✓	✗	✓	✗



2dílná
úzká ložná plocha

2dílná
široká ložná
plocha

4dílná
úzká ložná plocha

4dílná
široká ložná
plocha

Vnější rozměry	211 × 76 cm	211 × 86 cm	211 × 76 cm	211 × 86 cm
Ložná plocha matrace	193 × 66 cm	193 × 76 cm	193 × 66 cm	193 × 76 cm
Nastavení výšky	56,5–89 cm	56,5–89 cm	55,5–88 cm	55,5–88 cm
Nastavení výšky	18° / 18°	18° / 18°	18° / 18°	18° / 18°
Nastavení opěrky zad	0–90°	0–90°	0–90°	0–90°
Nastavení opěrky stehen	–	–	0–40°	0–40°
Nastavení opěrky lýtek	–	–	0–21°	0–21°
Výška postranic	35,5 cm	35,5 cm	36,5 cm	36,5 cm
Bezpečné pracovní zatížení (SWL)	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg
Váha (včetně základního vybavení)	120 kg	135 kg	120 kg	135 kg

Benefity Sprint 100 v kostce



Bezpečí a pohodlí pro pacienta

- Nastavení poloh napomáhajících uzdravení pacienta
- Vyšší bezpečnost pacienta
- Komfortní matrace pro minimalizaci rizika vzniku dekubitů



Usnadnění práce personálu

- Jedinečný ergonomický design
- Snadný převoz pacienta
- Bezpečná péče o pacienta



Efektivita provozu

- Efektivní péče o pacienta a jeho převoz
- Snadná údržba
- Odolnost – minimalizace nákladů na údržbu a opravy

Zdroje

- 1 Agency for Healthcare Research and Quality. Preventing Falls in Hospitals. Použito 5. prosince 2019. <https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/fallpxtoolkit/index.html>
- 2 Wong CA, et al. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. 2011;37(2):81-87. Centers for Medicare and Medicaid Services. září 2012.
- 3 Pressure Injury Fact Sheet, NPIAP, www.npiap.com
- 4 bog.nurserecruiter.com, Bureau of Labor Statistics, USA.
- 5 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7899570/> Res Nurs Health. duben 1995;18(2):165-72.doi: 10.1002/nur.4770180209.; E A McConnell 1: How and what staff nurses learn about the medical devices they use in direct patient care.
- 6 Own testing, data upon request.
- 7 Franco Valenza et al. Effects of the Beach Chair Position, Positive End-expiratory Pressure, and Pneumoperitoneum on Respiratory Function in Morbidly Obese Patients during Anesthesia and Paralysis, Anesthesiology 2007; 107:725–32.
- 8 Own testing, data upon request.



LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz



www.linet.cz