

ESTRATÉGIA QUE AJUDA A CONECTAR A PRÁTICA À BEIRA DO LEITO À LIDERANÇA PARA AJUDAR A REDUZIR OS RISCOS DE VARIAÇÕES DA PRÁTICA CLÍNICA

Ser um profissional de saúde é ao mesmo tempo gratificante e desafiador devido à quantidade de tarefas múltiplas exigidas. Entendemos isso e estamos aqui para ajudar os profissionais de saúde com o fluxo de trabalho, oferecendo LINIS SafetyPort - uma solução para exportar automaticamente os dados das camas LINET (ex. posição segura da cama, alarme de saída da cama, peso do paciente).



EQUIPE DE ENFERMAGEM

- Visão geral dos dados 24/7 de todas as camas
- Avaliação dos dados de mobilização do paciente
- Dados para ajudar a reduzir e gerenciar úlceras de pressão



GERENCIAMENTO

- Visão geral da utilização dos recursos da cama
- Dados acionáveis juntamente com gráficos e quadros
- Visão geral detalhada da prática clínica de sua instalação



SERVIÇO E MANUTENÇÃO

- Dados em tempo real sobre o uso da cama
- Histórico completo de códigos de erro
- Localização da cama no hospital



SEGURANÇA DO PACIENTE

16 pontos de dados:

- controle do peso e da presença do paciente
- monitoramento da posição de segurança da cama



RESPIRATÓRIO E MOBILIZAÇÃO

12 pontos de dados:

- melhora das práticas de mobilização
- prevenção de lesões por pressão



GERENCIAMENTO DA CAMA

7 pontos de dados:

- monitoramento do local da cama e dados de manutenção importantes
- visão geral do equipamento



UTILIZAÇÃO

4 pontos de dados:

- oferece ao hospital uma visão geral dos dados dos recursos da cama

PAINEL

Colunas personalizáveis

História de todas as camas

Interface de administração

LOCATION	NAME	NOTE	RECOMMENDED STATUS	OUT OF BED STATUS	SAFETY POSITION	WHEELS	WASHER	CONNECT POSITION	BARCODE	TEMPERATURE	LOADING TIME	PATIENT WEIGHT
101 [A]	S. Z.	Disinfect cartent, prepared below...	ON - Error	OK	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0'	90.7 kg
102 [A]	K. L.	Patient needs assistance	ON - Error	OUT	✗	✓	✓	✓	✓	0°	NOT SET	87 kg
103 [A]	J. M.	After surgery, later change	OFF	OK	✗	✓	✓	✓	✓	10°	0'	L. 30" ALT 89 kg
104 [A]	A. N.	Patient needs loading weight	ON - Error	OK	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0'	90.7 kg
105 [A]	P. Z.	Patient needs assistance	OFF	OUT	✗	✓	✓	✓	✓	0°	0'	87 kg
106 [A]	Not assigned		ON - Error	OK	✓	✓	✓	✓	✓	0°	NOT SET	
107 [A]	M. N.	Patient with diabetes	OFF	OK	✓	✓	✓	✓	✓	30°	0'	
108 [A]	A. K.	Patient needs loading weight										Disconnected
109 [A]	E. L.	Patient needs assistance										Disconnected
Unknown	P. Z.	Patient needs assistance	OFF	OUT	✗	✓	✓	✓	✓	0°	0'	
Unknown	E. L.	Patient needs assistance										Disconnected

Anotações View Care e dados estatísticos de mobilização por 24 horas

Detalhes de cada cama

CAMAS COMPATÍVEIS

22 +
pontos de dados



Eleganza 3

22 +
pontos de dados



Eleganza 4

37 +
pontos de dados




Eleganza 5

39 +
pontos de dados



Multicare, Multicare LE

CONECTIVIDADE

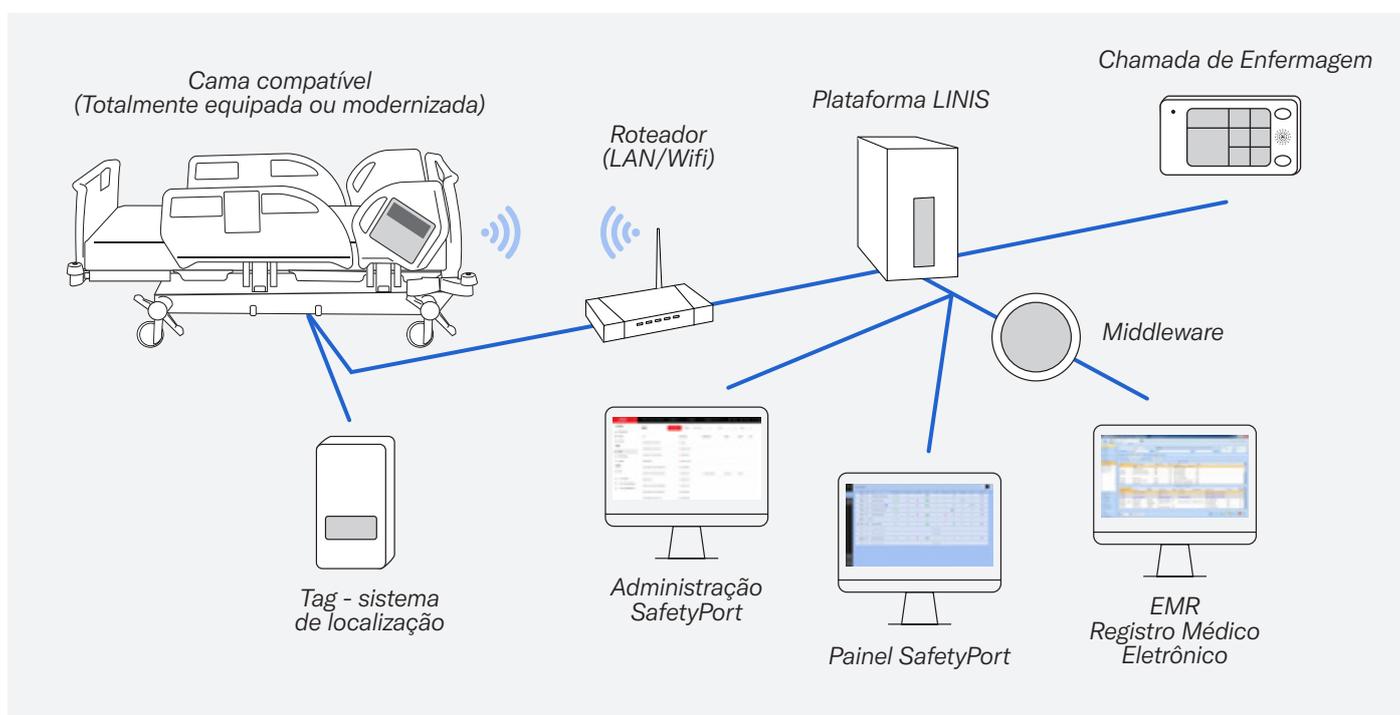

OPÇÕES DE TI

Sistema operacional do servidor	Servidor Linux OS (preferencial), Windows (2016, 2019 e versões posteriores)
Formato de dados para exportação para o HIS	HL7 v2, xml, webservices
Interface gráfica para o monitor na estação da equipe de enfermagem	Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari



Members of LINET Group

LINET DO BRASIL

Alameda Santos, 787 - Jardim Paulista, São Paulo - SP

Tel: +55 (11) 3284-8404 / e-mail: info_brasil@linet.com/ www.linetbrasil.com