

Eleganza 4

BED VOOR ACUTE ZORG



Op maat gemaakt bed voor de acute zorg

Eleganza 4: Op maat gemaakt



bed voor de acute zorg



Op maat gemaakt

Eleganza 4 is een elektrisch positioneerbaar bed – speciaal ontworpen voor acute zorg omgevingen. Het bedligvlak biedt flexibele en op maat gemaakte oplossingen voor alle zorgactiviteiten en alle speciale behoeften van de patiënt. Bovendien heeft het een open vormgeving en verschillende technische functies. U kunt het bed kiezen dat geschikt is voor iedere vorm van zorg en medische toepassing, toestand van de patiënt en ieder budget.



ÉÉN BED
=
veel eisen



Stroke Unit



Intermediate Care



Post-chirurgische
afdeling

Eleganza 4 BASIS

intensive
care

Eleganza 4 VEILIGHEID



Ter plaatse aan ieder bed

De meeste behandelingen en taken op de acute zorg richten zich op het hoofd en de borst van de patiënt. Eleganza 4 biedt volledig toegang tot het bovenste deel van het lichaam van de patiënt. Het unieke bedhekkensconcept helpt het personeel niet alleen bij de dagelijkse zorghandelingen, maar ook in kritieke situaties – te allen tijde betrouwbaar, gemakkelijk en ergonomisch.



Eénknopsfilosofie

Het bedieningspaneel is gemakkelijk toegankelijk en zeer eenvoudig in gebruik. De meeste positionerings- en noodfuncties kunnen met één knop ingesteld worden. Een verpleegkundige kan op elke situatie snel, gemakkelijk en veilig reageren.



Focus op het bovenlichaam


Met de geïntegreerde bedieningselementen in beide bedhekken aan het hoofdeinde heeft de zorgverlener direct toegang tot alle functies en positiemogelijkheden van het bed. Het ontwerp met SoftDrop-technologie maakt een volledig onbeperkte toegang tot de patiënt mogelijk. Met deze voorziening kun je nog ergonomischer werken en het bespaart zowel lichamelijke inspanning als tijd.



Handen vrij strategie


De hoogte van het bed en de speciale onderzoekspositie kan met de voetbediening worden ingesteld. De verpleegkundige heeft de handen vrij om de patiënt te verplegen of te behandelen.

- Eenvoudig te bereiken
- Eenvoudig te gebruiken

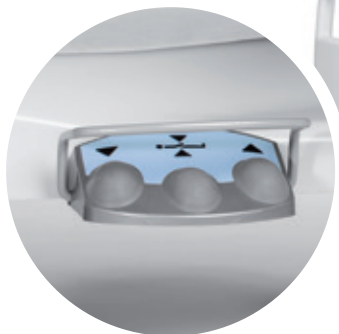

Verbeterde patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is topprioriteit. De Eleganza 4 is voorzien van geavanceerde functies die de patiënt in allerlei verschillende situaties beschermt.

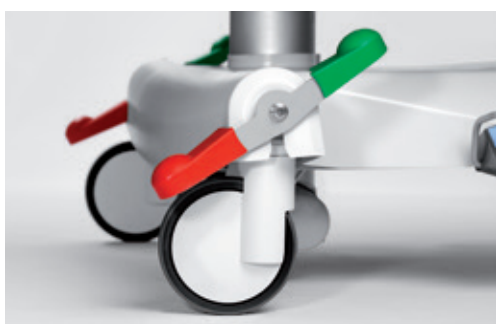


i-Brake

De automatische rem voorkomt vallen als gevolg van een instabiel bed, vooral bij het uit bed komen.



Bed-Exit-Alarm

Het systeem volgt de bewegingen van de patiënt in bed en bij het uit bed komen. Het kan in twee standen worden ingesteld, afhankelijk van de behoefte en mobiliteit van de patiënt.

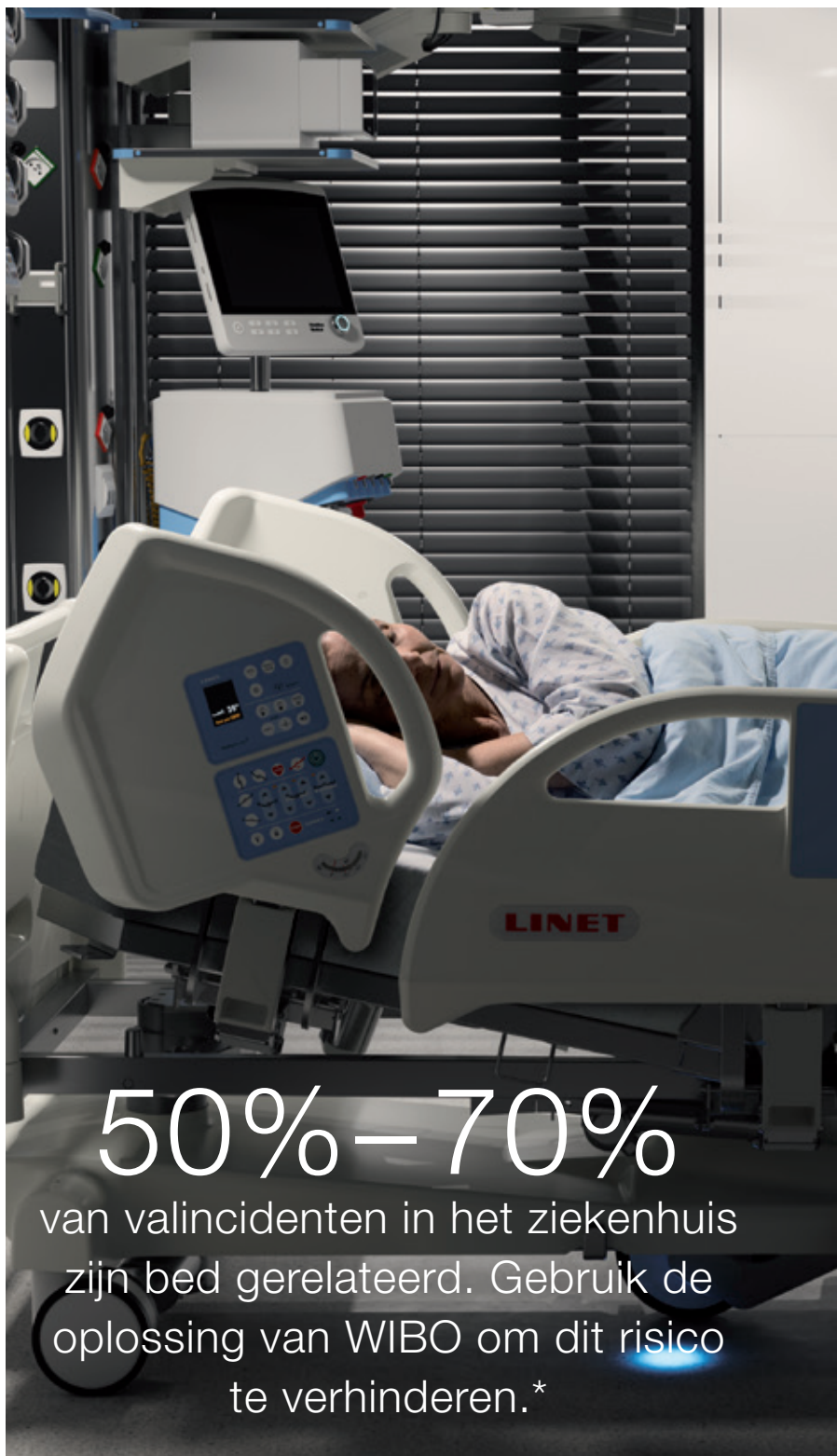



Het bedhekkenconcept

Het bedhekkenconcept en de hoogte van het bed optimaliseren speciale behoeften van de patiënt:

- Geen risico op beknelling
- Gebruik van verschillende passieve en actieve matrassystemen
- Valpreventie

Nachtverlichting

De lichtfunctie geeft de patiënt 's nachts een betere oriëntatie en biedt een gevoel van veiligheid.

30° en 45° stop

De rugsteun stopt automatisch bij een kanteling van 30 en 45 graden. Daarnaast ondersteunt het Ergoframe een comfortabele en veilige positie met betrekking tot decubituspreventie en adequate ventilatie van de longen.

Safestop

Het bed stopt automatisch wanneer het naar de laagste positie wordt veresteld.

Gereed voor EMR

De Eleganza 4 is technologisch uitgerust om gegevens naar het ziekenhuisinformatiesysteem te versturen. Geselecteerde informatie over de status van het bed en de patiënt is beschikbaar en kan op het bedieningspaneel en op de SafetyMonitor worden weergegeven.



Verhoogd comfort voor de pati

Eleganza 4 is ontworpen om u te helpen de zorg om de patiënt te verbeteren en klinisch resultaat te ondersteunen. Het complete aanbod aan specifieke functies van het bed geeft de patiënt meer zelfredzaamheid en biedt meer comfort.



Cardiac Chair

Deze positie helpt patiënten die last hebben van ademhalingsstoornissen en het ondersteunt de functies van het cardiovasculaire systeem. Daarnaast is deze positie comfortabel voor patiënten om te lezen en te eten.

Voor meer onafhankelijkheid

De patiënt heeft onmiddellijk toegang tot twee aparte bedieningen voor eenvoudige bedpositionering. Het betreft een geïntegreerde bediening in de bedheksen en een losse handbediening die aan de bedheksen kan worden gehangen.



Voor een geoptimaliseerde workflow

Geïntegreerde weegschaal

Door de geïntegreerde weegschaal kunnen beslissingen snel en veilig ter plaatse aan het bed worden genomen. Het huidige gewicht van de patiënt kan gemakkelijk en zonder stress - voor zowel de patiënt als de verpleegkundige - en zonder extra risico's van het verplaatsen van de patiënt worden gemeten.

Röntgenopname

Dankzij het voor röntgenopname transparante matrasplatform en de speciale bedconstructie kunnen röntgenopnames van de longen worden gemaakt, zonder dat de patiënt fysiek hoeft te worden verplaatst.



i-Drive Power

Door het geïntegreerde, gemotoriseerde vijfde wiel en het patiëntentransportsysteem is minimale kracht van het personeel nodig voor het duwen van het bed. Dit vermindert rugletsel en andere aandoeningen van het bewegingsapparaat waar het personeel mee te kampen heeft. De risico's van het verplaatsen van bedlegerige patiënten worden verlaagd en zorgen voor maximale veiligheid en gemak.



Verbeterde wondzorg


Het uitgebreide assortiment van ons passieve, hybride en actieve matrassportfolio ondersteunt de individuele behoeften van patiënten wat betreft decubituspreventie en -behandeling.

Innovatieve technologieën ondersteunen betere resultaten ter plaatse aan het bed met evidence-based aanbevelingen.



90%

van decubitus kan worden voorkomen*

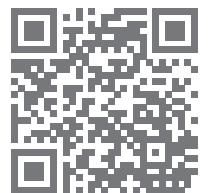

360° uitgaande
van de patiënt



Eleganza 4 + Virtuoso



Eleganza 4 + Clinicare 100HF



Eleganza 4 + Clinicare 30




Eleganza 4 + Clinicare 20



Het Ergoframe

Deze functie verhoogt het comfort en de ergonomie voor de patiënt op het bed en minimaliseert compressie van de longen en buikstreek.

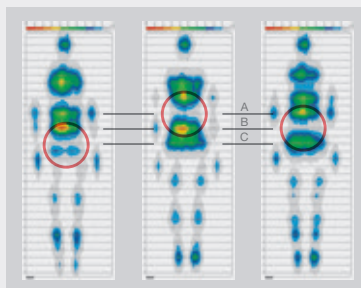


Nuldruk 3 cellen (A, B, C) cyclus

Moderne technologie

Onze matrassen functioneren op basis van toptechnologieën die gebruik maken van klinische bevindingen.

* Nuldrukeffect van het Virtuoso-matras

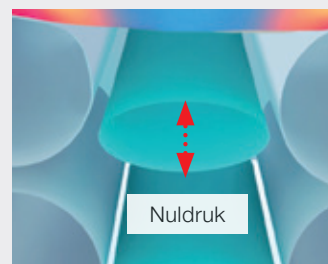

Nuldruk

De Virtuoso met 3-cellen technologie biedt de voordelen van nuldruk voor maximale preventie en normale toepassing en wegnemen van druk voor maximale behandeling.

Actieve Mobilisatie Stap-voor-Stap

De speciale functies van de Eleganza 4 helpen bij de aanpak van het mobilisatieprobleem - een cruciale kwestie, vooral op de afdelingen acute zorg en intensive care. Een snelle en vooral veilige mobilisatie met actieve deelname van de patiënt vergroot de onafhankelijkheid en levert een beter resultaat.



Stap 1: De patiënt gaat rechtop zitten vanaf de zitpositie in het bed met behulp van de ergonomische bedhekken en de Mobi-Lift®.



Stap 2: De patiënt zit in de “neus boven de tenen”-positie met de voeten op de grond. De ergonomische handgreep in de bedhekken en de Mobi-Lift® bieden de patiënt stabiliteit en veiligheid.



Stap 3: Dankzij de knop op de Mobi-Lift® kan de patiënt zelfstandig de bedhoogte instellen, waardoor hij voorzichtig kan opstaan. De verpleegkundige ondersteunt met minder inspanning.



Mobi-Lift® handgreep

De Mobi-Lift® is een unieke functie van LINET-bedden. Het wordt gebruikt om de patiënt stevig steun te geven als hij op bed zit of eruit stapt. De patiënt kan het bed instellen op een individueel afgestemde en gemakkelijke opstappositie met behulp van de omhoog- of omlaag-knop.



KLINISCH

Gemiddeld is er een 2–3% dagelijks verlies van spiermassa in de eerste 10 dagen.* Geef patiënten voldoende ondersteuning voor snelle mobilisatie.

Positionering



Trendelenburg



Anti-Trendelenburg



Vasculaire stand



Ergo frame met 30° rugsteun omhoog



Laagste positie



Behandelpositie



Cardiac Chair positie



30° rugsteun stop

Oplossingen die met uw behoeft

Eén ligvlak. Veel oplossingen.

Iedere investering in ziekenhuizen moet op veel manieren rendabel zijn: op gebied van toenemend resultaat, stroomlijnen van de workflow, verbeteren van de patiëntenzorg en kostenverlaging.

Met het alomvattende bedligvlak van de Eleganza 4 kunt u het geschikte bed aanpassen aan de specifieke behoeften van elke acute zorg omgeving. Door de verschillende functies van de open vormgeving kan de Eleganza 4 niet alleen voldoen aan een veeleisende klinische omgeving, maar ook aan de behoefte aan kostenbeheersing.



Post-chirurgische
afdeling



Intermediate Care



Stroke Unit

Eleganza 4 – Bed voor de acute zorg voor verschillende doeleinden

Eleganza 4 BASIS



Uw keuze:

- Verschillende paneelopties
- Geïntegreerde beddengoedhouder
- Mobi-Lift®

Eleganza 4 VEILIGHEID



Uw keuze en
aanvullende focus op
veiligheid:

- Nachtlucht
- i-Brake alarm
- Bed-Exit-Alarm

Eleganza 4 MOBILITEIT



Uw keuze met
aanvullende focus op
mobiliteit:

- i-Brake
- Voetbediening
- 5° wiel
- Gereed voor EMR

Eleganza 4 PROFESSIEEEL




Uw keuze met
aanvullende focus
op een professioneel
uitgerust bed voor de
acute zorg:

- 5° wiel met i-Drive power
- Volledige afdekking van het bedonderstel
- Geïntegreerde röntgenopname
- Gereed voor EMR en SafetyMonitor

Selecteer de juiste opties voor de specifieke behoeften van uw patiënten!

en mee ontwikkelen

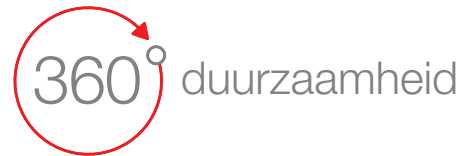

Onderhoud

Het modulaire concept van het bed biedt een reeks aan financiële voordelen.

Het bedligvlak bestaat uit dezelfde reserveonderdelen en biedt daardoor een effectieve en financieel beter passende service.

- Dezelfde reserveonderdelen voor alle modellen
- Snelle reactie in geval van een storing
- Service wereldwijd



Servicecontracten

WIBO biedt regulier onderhoud en service van hoge kwaliteit in de vorm van uiteenlopende soorten contracten. Het servicecontract zorgt ervoor dat het bed en matras een prestatie van 100% leveren.



Training

- Professionele installatie en personeelstraining voor juiste bediening en gebruik van de functies
- Workshops en professionele trainingscursussen
- Geautoriseerde en ervaren technici die regelmatig worden bijgeschoold
- Mogelijkheid tot training in uw ziekenhuis



Eenvoudige beddenhygiëne

De kolomconstructie, vlakke en naadloze oppervlaktes, evenals verwijderbare plastic onderdelen maken gemakkelijke en volledige reiniging en desinfectie mogelijk.





Flexibiliteit

Paneelopties



Onderstelopties

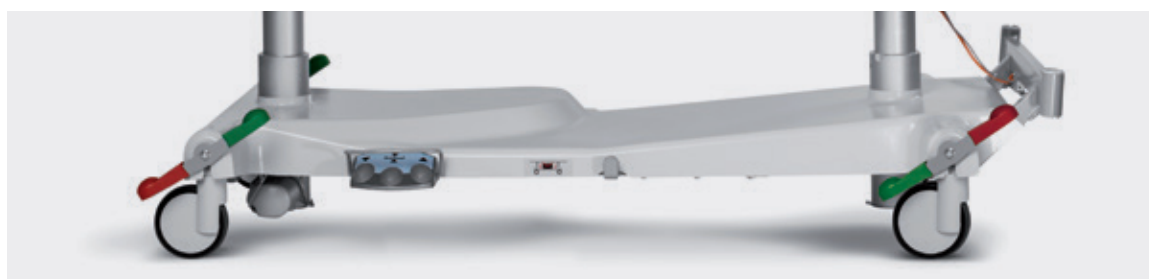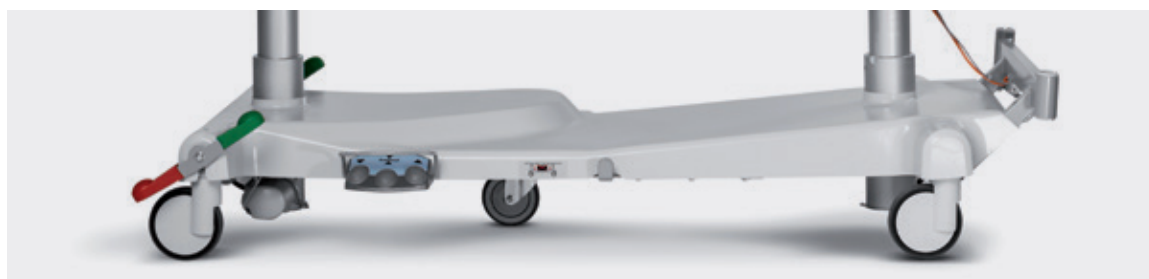



CERTIFICATEN

LINET is een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Europese normen en kwaliteitssystemen: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

De producten zijn vervaardigd volgens de Europese normen voor medische technologie en ziekenhuisbedden: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/EEC, 2014/31/EU, 2011/65/EU.

Elektrische parameters

Stroomvoorziening	230 V AC, 50/60 Hz
Maximaal ingangsvermogen max.	370 VA
Bescherming tegen water en stof	IP X4
Type bescherming tegen elektrische stroom	Klasse I
Beschermingsniveau tegen verwonding door elektrische stroom	Toegepast deel type B
Bedrijfsmodus elektromotor (belastingsfactor)	max. 2 min AAN/18 min UIT

Technische parameters

Externe afmetingen	217,5×100 cm
Bedverlenging	0–22 cm
Afmetingen matras	208 × 90 cm
Hoogte van beddekken en matrasplatform	45 cm
Hoogteregeling	41–79 cm
TR/ATR-kanteling	14°/14°
Hoek rugsteun	65°
Hoek bovenbeensteun	25°
Veilige werklust	250 kg
Maximum patiëntgewicht	185 kg

Eleganza 4

Patiënt

- Verbeterde zorg, veiligheid en comfort voor patiënt
- Focus op zorg en actieve mobilisatie
- Preventie van doorligwonden



Management

- Op maat gemaakt bed voor acute zorg
- Duurzame oplossing die met de behoeften mee ontwikkelt
- Uitgebreid LINET aanbod omvat geavanceerde diensten en training



- Ondersteunt het klinisch resultaat van de patiënt
- Vereenvoudigde dagelijkse verpleegkundige handelingen
- Gemakkelijkere bediening dankzij geïntegreerde besturingselementen in de bovenste bedhekken



Personeel



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50 | Fax: +31 (0)78 652 18 55
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

