

Image 3



topdesign vervult al uw wensen

Image 3 vervult al uw designwensen



Image 3 Standaard



Image 3 Afwasbaar



Image 3 **XXL**

Voordelen van Image 3



extra lage
28_{cm}
positie



— Extra lage positie
om vallen te voorkomen

— Ondersteuning bij mobilisatie

— Uniek modern design,
gecombineerd met comfort



Patiënt

— Verfijnde ergonomie voor
gemakkelijke manipulatie

— Automatische preset-functies

— Moeiteloze wendbaarheid



Personeel

— Universeel gebruik - standaard,
bariatrische en wasbare versie

— Varieerbare oplossing die aan alle
eisen van de cliënt voldoet

— Effectieve beheersing van infecties



Management

Beantwoordt aan alle eisen



Image 3 AFWASBAAR

Het bed is verkrijgbaar in een uitvoering die geschikt is voor reiniging en desinfectie in automatische ziekenhuiswasmachines.

- De bedconstructie heeft een speciale technologische wijziging ondergaan die de levensduur en de duurzaamheid vergroot
- De samenwerking met Miele tijdens de ontwikkeling van het bed is een garantie voor de betrouwbaarheid, aangetoond door zware testen

AFWASbaar
VRIENDELIJK

Image 3 STANDAARD

Het moderne design van Image 3 past in elk ziekenhuis. Op grond van de versie, het design en de accessoires kan het bed ingesteld worden op een specifiek doel. Vanwege de variabiliteit van het ontwerp kan de Image 3 ook de standaard van verpleeghuizen verhogen.





Image 3 XXL

De Image 3 voldoet in de bariatrische versie aan de groeiende vraag naar bedden met een hogere belastbaarheid.

- Het bed heeft een bredere matrasbodem.
- De belastbaarheid is verhoogd tot 320 kg
- De constructie en de accessoires zijn veilig, zelfs voor een grotere belastbaarheid

Breder **BED**

Hogere **BELASTBAARHEID**

Topdesign





IMAGE 3

volledig in overeenstemming met de ergonomiebeginselen in de gezondheidszorg. De functies sluiten aan op de behoeften van gezondheidszorgspecialisten en de verhoogde veiligheidseisen van de patiënt. De bediening is intuïtief, gemakkelijk en eenvoudig.

TIJDLOOS TOPDESIGN

en toepasbaar binnen een breed scala aan toepassingen binnen de gezondheidszorg en de verpleging.

HI-Tech
DESIGN

ELEGANTE COMBINATIE MET ALUMINIUM

en houten dessins die een moderne look combineren met een kalmerend effect.



KLEURCONCEPT

biedt vele variatiemogelijkheden: metalen of kunststof onderdelen uitgevoerd in zilver of wit en hoofd- en voeteneinde met zijpanelen in een dessin naar keuze. Door te kiezen voor eigen kleuren en een eigen versie verkrijgt de cliënt een functioneel en geheel eigen model.



Image 3 met telescopische onrusthekkens en aluminium elementen



Image 3 met plastic uiteinden en enkelvoudige inklapbare onrusthekkens.

Patient in veilige handen



Veiligheid is een sleutelwoord voor Image 3. Alle functies van het bed worden ingesteld, zodat de patiënt niet alleen veilig voelt, maar ook werkelijk zo veilig mogelijk is.

SAFEPlus
CONCEPT



EXTRA LAGE POSITIE

De minimale bedhoogte kan slechts 28 cm bedragen. Deze unieke functie helpt bij de bescherming van de klant tijdens de slaap.



HYGIËNE

Door de vorm en het materiaal van de constructie zijn het bed en de onderdelen ervan gemakkelijk te reinigen. Dit elimineert aanzienlijk de overdracht van ziekenhuisinfecties.



REMALARMS

waarschuwt de verpleging bij de noodzaak om het bed te remmen om de veiligheid van de cliënt te garanderen.



GO-KNOP

Dankzij dit gepatenteerde veiligheidsconcept worden de besturingselementen van het bed na drie minuten in activiteit vergrendeld. Dit voorkomt dat het bed onbedoeld wordt versteld.

Bewegingsonafhankelijkheid

80
cm



42
cm



28
cm




3-STOPSTRATEGIE

De matrasbodem kan automatisch door indrukken van één knop worden ingesteld naar een positie die geschikt is voor veilig slapen, voor een comfortabele mobilisatie of voor een standaardbehandeling.

ERGOFRAME®

Het ErgoFrame®-systeem voor de positionering van de matrasbodem vermindert het risico op decubitus in sterke mate. De uitbreiding van de ruimte in het bedreigde bekkengebied vermindert de negatieve invloed van druk- en schuifkrachten.

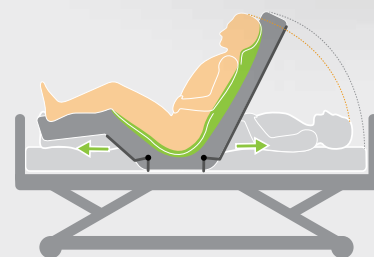

Bed met ErgoFrame®



VEILIGE ZIJHEKKEN

bieden grote bescherming en steun door de varieerbare instelling ervan. De mobilisatiehandgreep vergemakkelijkt veilig opstaan.



Standaardbed



Praktische details

- 1 **5e zwenkwiel**
vergemakkelijk comfortabele manipulatie in alle ruimtes.
- 2 **Bedverlenging**
heeft drie niveaus naar de individuele wensen van de klant
- 3 **Nachtlamp**
voor een veilige oriëntatie van de patiënt
- 4 **3D-hoekbumpers**
beschermen het bed in horizontale en verticale richting
- 5 **Matrasbodembreedte**
Optionele matrasbodembreedte 86 of 90 cm met afneembare kunststof onderdelen
- 6 **Dekenlade**
kan ook worden gebruikt om de supervisor op te bergen
- 7 **Mechanische CPR**
voor urgent gebruik



Elektrische parameters


Stroomtoevoer	230 V/±10 %
Maximum ingangsspanning	max 1.6 A; 370 VA
Bescherming tegen water en stof	IPX4 (IPX6 voor Image 3 Wasbaar)

Certificaten

LINET is gecertificeerd en voldoet aan de Europese normen en het kwaliteitssysteem: ČSN EN 9001:2000 ČSN EN 13485:2003

De producten voldoen aan de Europese normen voor gezondheidszorg- en ziekenhuisbedtechnologie: ČSN 60601-1, ČSN 60601-2, ČSN 60601-4, ČSN 60601-2-52, ČSN EN ISO 14941 – Image 3 Afwasbaar: AK-BWA:2009



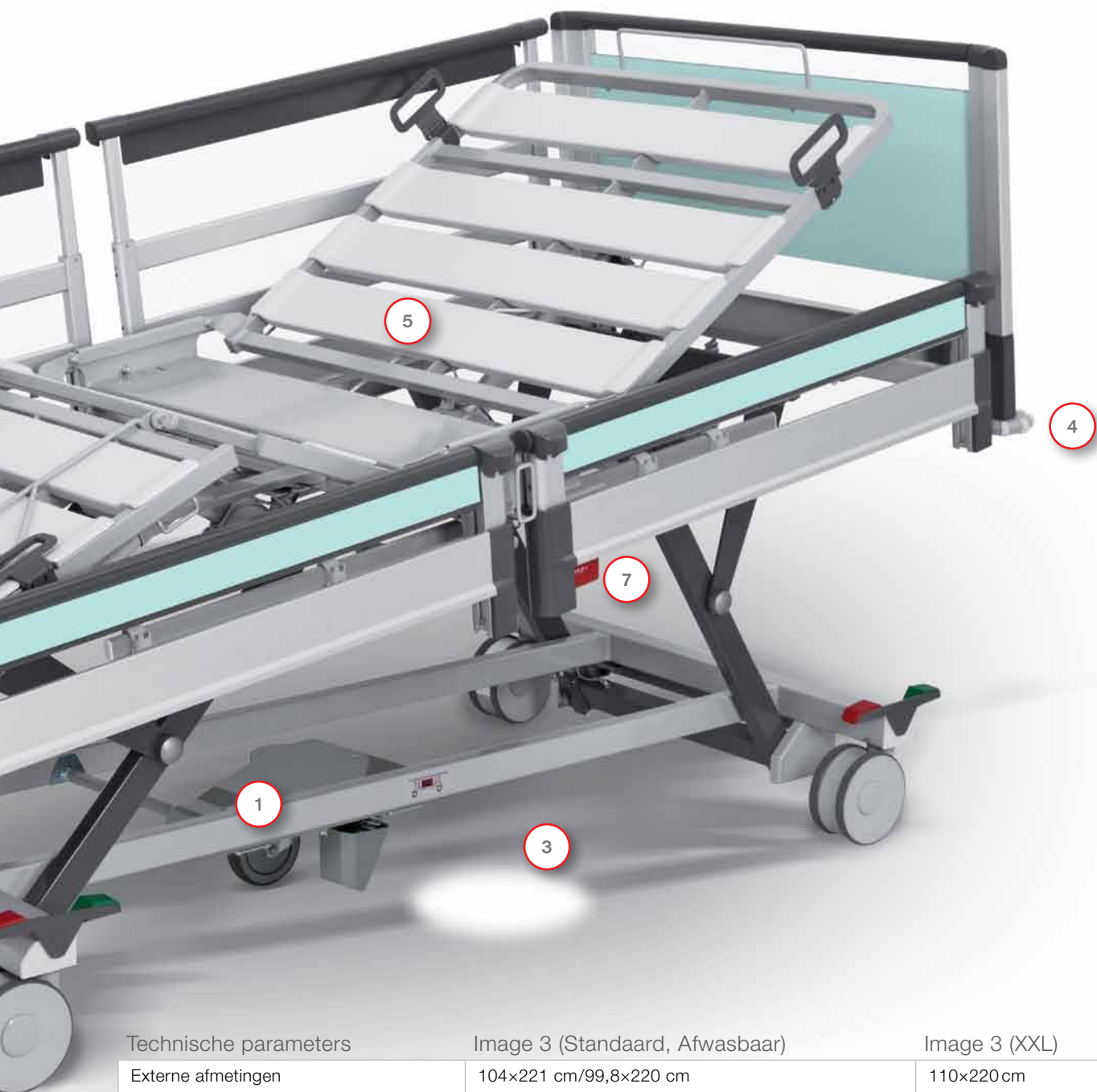

Technische parameters	Image 3 (Standaard, Afwasbaar)	Image 3 (XXL)
Externe afmetingen	104×221 cm/99,8×220 cm	110×220 cm
Matrasbodembreedte	200 × 86 / 90 cm	200×100 cm
Vrije speling	13/15,5 cm	13 cm
Hoogte-instelling van de matrasbodem	28 – 80 cm	28 – 80 cm
Bedverlenging	10, 22, 30,5 cm	10, 22, 30,5 cm
Maximale matrashoogte	18 cm (gedeelte onrusthekken); 17 cm (enkelvoudige opklapbare onrusthekken)	26 cm inclusief de extender
Veilige werkbelasting	250 kg	320 kg
Gewicht van het bed	140 kg including accessories	168 kg inclusief accessoires
Rugleuninghoek	0–70°	0–70°
Dijbeensteunhoek	0–34°	0–34°
TR/ATR-hoek	0–14°	0–14°

Image 3

Patiënt

- Extra lage positie om vallen te voorkomen
- Ondersteuning bij mobilisatie
- Uniek modern design gecombineerd met comfort



Management

- Universeel gebruik - standaard, bariatrische en afwasbare versie
- Varieerbare oplossing die aansluiten op behoeften van de cliënt
- Effectieve beheersing van infecties



- Verfijnde ergonomie voor comfortabele manipulatie
- Automatische preset-functies
- Moeiteloze wendbaarheid



Personeel



 **wissner-**
bosserhoff

 **LINET®**

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Tsjechische Republiek

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

