

Pura



Multifunctionele stoel

Variabele oplossingen voor



Pura Day Surgery

Volledig uitgeruste stoel voor dagchirurgie, herstel of diagnostische procedures.

Dagbehandeling



Pura Treatment

Comfortabel voor dialyse, oncologische behandelingen of bloeddonoraties.

360° zorg met de Pura

GEMAKKELIJK TE TRANSPORT

Transport van de patiënt is veilig en fysiek niet inspannend.



PRETTIG VERBLIJF

Het ergonomische frame en de zachte kussens bieden de patiënt comfort tijdens langdurige procedures.



Transport

Pu

Comfort

NADRUK OP VEILIGHEID

Het unieke ontwerp garandeert de veiligheid van de patiënt. Het "Soft Drop"-mechanisme laat de beddekken soepel en gemakkelijk zakken en biedt eenvoudig toegang tot de patiënt.

Veiligheid

ra

Herstel



HERSTEL EN TERUG NAAR HUIS

De lage, veilige stand is comfortabel bij het blijven of gaan zitten in de stoel of bij het opstaan.

Nadruk op veiligheid

Het nieuwe concept van de Pura Surgery vergroot de veiligheid van de professionele poliklinische patiëntenzorg en biedt meer bescherming en comfort aan de patiënt. De toegepaste LINET-technologie is uiterst ergonomisch en maakt het werk van verpleegkundigen een stuk gemakkelijker.

Soft Drop-technologie

De bedhekken zijn uitgerust met Soft Drop-technologie voor het optimaliseren en verzachten van de bewegingen. Het soepele en geluidloze neerklappen van de bedhekken is een fluitje van een cent, niet alleen voor het personeel, maar ook voor de patiënt wordt het verblijf in de stoel een stuk aangenamer.




Trendelenburg-stand

De anti-shockstand of de zogenaamde Trendelenburg-positie, wordt gebruikt in geval van een shock en is één van de voorgeprogrammeerde functies van de Pura.



Mechanische CPR

Het snelle mechanisme zorgt ervoor dat de stoel gemakkelijk naar de meest optimale CPR-omstandigheden kan worden versteld. Het gehele zitvlak van de stoel gaat plat en zorgt zo voor een stevige ondersteuning tijdens een hartmassage.

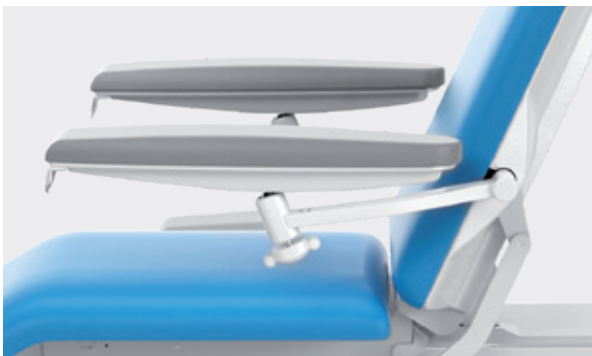


Ergonomische armsteun

De Pura Treatment beschikt over comfortabele armsteunen die belangrijk zijn voor patiënten die lang in de stoel zitten, bijvoorbeeld tijdens dialyse of oncologische infusie therapie.

Variabele posities

Met de snelle en intuïtieve bediening kan de hoogte van de stoel verستeld worden zodat een ergonomische behandeling van de patiënt mogelijk is.

Het variabele bereik van de rugleuning en de beensteun zorgt ervoor dat de Pura op veel verschillende manieren kan worden gebruikt: van horizontale ingrepen tot individuele instellingen en eenvoudige bijstellingen tijdens lang verblijf in de stoel bij langere behandelingen.

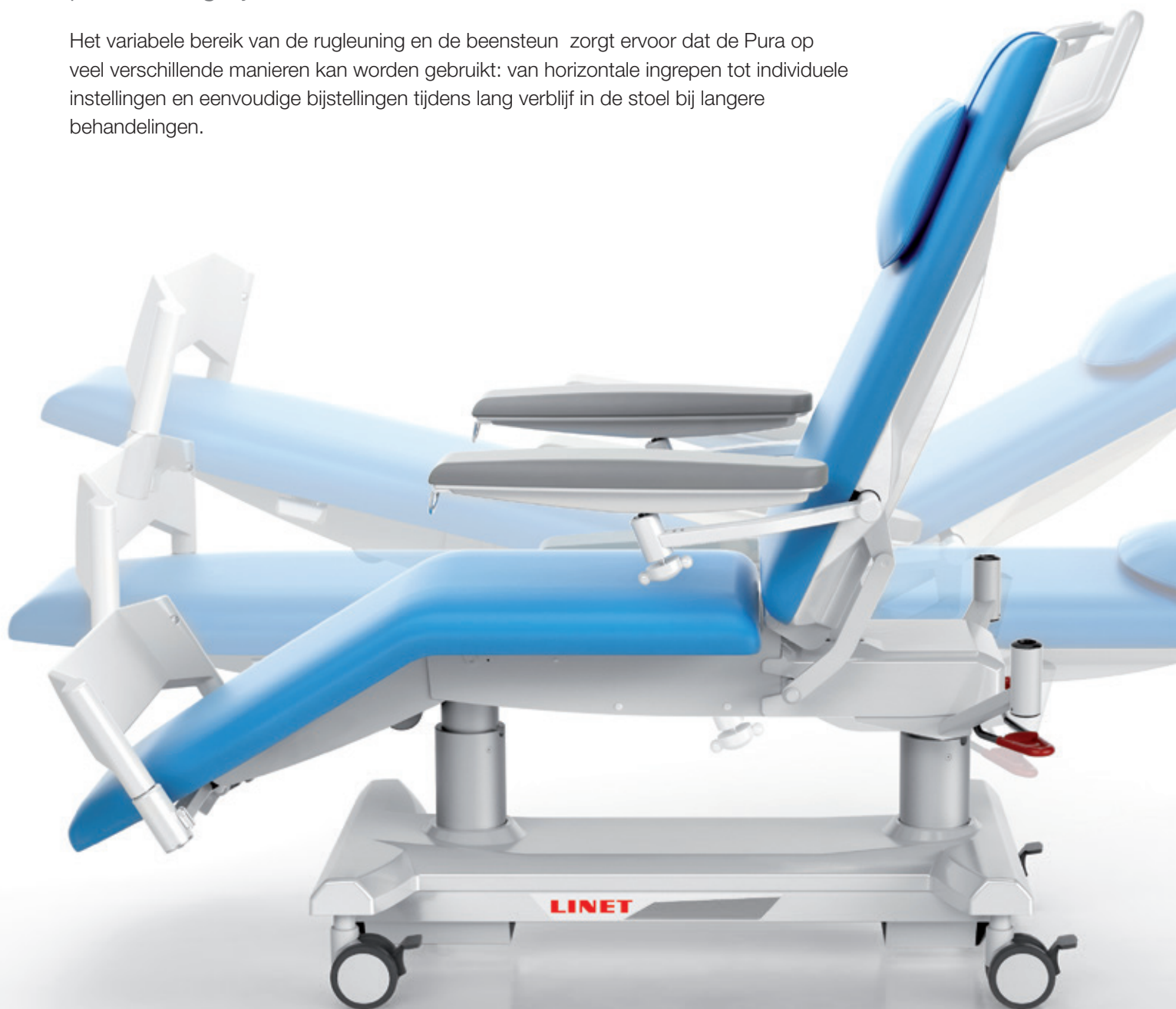

Fowlerstand

In de Pura kunt u de zogenaamde Fowler-houding gebruiken om de patiënt optimaal te positioneren in een halfliggende positie om zo de pijn te verminderen en het ademen te vergemakkelijken.



Draagbare handbediening

De gebruikersvriendelijke en ergonomische handbediening bevat voorgeprogrammeerde standen, waaronder TR, vlak en welkom. Daarnaast heeft de bediening functievergrendeling voor de veiligheid, een GO-knop en andere intuïtieve eigenschappen voor snel en eenvoudig verstellen van de stoel.

Gemakkelijk transport

De rijeigenschappen en manoeuvreerbaarheid maken het transport van patiënten snel en veilig zonder dat dit veel fysieke inspanning kost.

Gemakkelijk en veilig transport

De moderne structuur van het onderstel heeft een zwenkwiel met een diameter van 150 mm en een centrale rem. Dit is de beste optie voor transport van patiënten in een stoel. In combinatie met doordachte kenmerken, zoals een transporthandvat en stootbumpers, zorgt dit voor uitstekende mogelijkheden voor transport in poliklinieken en ziekenhuizen.



Transporthandvat

Aan het voeteind kan een stevig handvat worden bevestigd die ergonomisch werken met de stoel mogelijk maakt, in het bijzonder tijdens \ transport.



5^e wiel

Een 5^e wiel onder het onderstel is optioneel. Dankzij dit slimme mechanisme kunt u de stoel in krappe ruimtes, gangen en liften manoeuvreren.

Veilige en comfortabele zorg

Om het werk van verpleegkundigen en ondersteunend personeel te vergemakkelijken introduceert de Pura een innovatief infectiebeheersingsconcept en een aantal geavanceerde praktische eigenschappen.



Infectiebeheersing

De gladde kolomconstructie en de compacte oppervlakken vormen de basis voor eenvoudige hygiëne. Het gebruikte materiaal en de antibacteriële afwerking van de stoffering bieden effectieve ondersteuning bij het bestrijden van ziekenhuisinfecties.




Zuurstoffleshouder

Deze is ontworpen om de zuurstoffles horizontaal te bevestigen.



Plastic bak

Ruimte voor persoonlijke zaken.

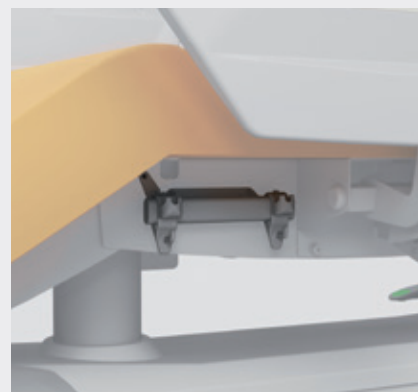

Urinezakhouder

Hierin kan de urinezak (max. 2 l) worden geplaatst.

De stoel is in de eerste plaats ontworpen om ervoor te zorgen de patiënt een aangenaam verblijf heeft. Het materiaal dat gebruikt is voor de bekleding en de zachte vulling zijn hiervoor een essentiële voorwaarde.

Gaan zitten en opstaan

De lage, veilige stand is aangenaam voor de patiënt, zowel voor zolang hij in de stoel zit, als wanneer hij wil gaan zitten of wil opstaan.



Afsluitbaar vakje voor persoonlijke zaken

Ontworpen voor het veilig opbergen van kleine persoonlijke zaken van de patiënt zoals sleutels, telefoon en portemonnee. Het vakje is inclusief een sleutel.



Papierrolhouder

Deze multifunctionele stoel beschikt over een ingebouwde papierrolhouder aan het hoofdeinde.



Verwijderbare tafel

Praktische tafel met afzonderlijke houder voor meer patiëntencomfort.

Technische parameters

Pura Treatment

- 1 Armsteunen
- 2 Voetsteun
- 3 Infuushouder
- 4 Transporthandvat



Technische parameters

Lengte	Totaal rustvlak	2.123 mm
Breedte	Zitsectie	590 mm
Hoogte (zwenkwielen 100 mm)	MAX. - rustoppervlak tot zitsectie	934 mm
Hoogte (zwenkwielen 150 mm)	MAX. - rustoppervlak tot zitsectie	970 mm
Zwenkwielen	Diameter zwenkwielen / rem	100 mm / apart geremd
	Diameter zwenkwielen / rem	150 mm / centrale rem
Hoekaanpassing	Ruggedeelte	70°
	Armsteun – verticaal	+ 42° / – 8,5°
	Armsteun – horizontaal	360°
Elektrische parameters	Bescherming tegen water en stof	IPX4
	Beschermingsklasse apparaat	I.
	Classificatie gebruikte onderdelen	B
	Voltage reserveaccu's	24 V / 1,2 Ah
	Ingangsvoltage	100–240 V
Trendelenburgstand (TR)		12°
Veilige werklust		205 kg
Maximum gewicht patiënt		190 kg

Pura Day Surgery



1

Bedhekken

3

Infuushouder

2

Zwenkwielen

4

Transporthandvat

KLEURKEUZES

Standaard kleuren



Blauw



Geel



Oranje



Groen



Lavendel

Niet-standaard kleuren



Pura

Patiënt

- Nieuwe, veilige bedhekken
- Comfortabel gaan zitten en opstaan
- Zelfredzaamheid en comfort



Management

- Een ontwerp voor verhoogd aanzien
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding



- Betere functionaliteit en ergonomie
- Beter dan gemiddelde transportmogelijkheden
- Gemakkelijk te reinigen en hygiënisch



Personeel



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Nederland B.V.

Keerweer 42 | NL-3316 KA Dordrecht
Tel.: +31 (0)78 652 18 50 | Fax: +31 (0)78 652 18 55
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

