

Eleganza Smart Junior

Pediatrické nemocniční lůžko



Pacient

- Ergonomie lůžka přizpůsobená dětským pacientům
- Maximální bezpečnost



Personál

- Plně elektricky polohovatelné lůžko
- Stabilita a snadná čistitelnost lůžka díky sloupové konstrukci



Management

- Variabilní použití pro různé věkové kategorie dětí
- Barevný design vhodný pro pediatrická oddělení



Eleganza Smart Junior

Lůžko Eleganza Smart Junior bylo vyvinuto pro pediatrické pacienty ve věku 4–15 let, jeho rozměry jsou přizpůsobeny ergonomii dětské postavy. Eleganza Smart Junior je plně elektricky polohovatelné lůžko.

KOMFORT PRO VŠECHNY


Lůžko lze elektricky výškově nastavit a díky čtyřdílné ložné ploše polohovat do různých pozic. Moderní sloupová konstrukce dodává lůžku výjimečnou stabilitu.

- Nastavení pohodlné polohy pro dítě.
- Autoregrese zádového dílu dále zvětšuje prostor v pánevní oblasti o 11 cm, a tedy i komfort pacienta.
- Plné elektrické ovládání odstraňuje fyzickou námahu personálu.



NAVRŽENO PRO DĚTI

Moderní a příjemný design včetně barevného provedení působí pozitivně na malé pacienty i jejich rodiče.

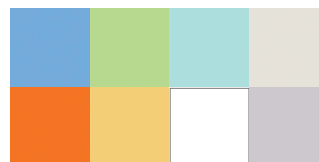



MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Postranice mají oproti běžnému lůžku menší mezery mezi příčkami a nevytvářejí žádnou mezeru u hlavy dítěte. Navíc je možné postranice doplnit plastovým protektorem, který maximalizuje ochranu pacienta. Jednodílné $\frac{3}{4}$ postranice lze snadno sklopit po stranách lůžka.



- Koncepte GO zabraňuje nežádoucímu polohování. Pomocí GO tlačítka jsou aktivovány ovladače po dobu 3 minut.
- Zádový díl je vybaven CPR odblokováním pro případnou okamžitou resuscitaci.



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA



Lůžko se ovládá pomocí sesterského ovladače ACP, který je vybaven přednastavenými funkcemi a dovoluje uzamčení funkcí.



Ruční ovladač je určen pro pacienta i sestru a dovoluje nastavit polohu a výšku lůžka.



Hladké sloupky, bezspárová technologie a praktické konstrukční provedení umožňují snadnou čistitelnost lůžka.

Technické parametry

Vnější rozměry	189,7×92,1 cm
Ložná plocha (matrace)	80×170 cm
Výškové nastavení ložné plochy	38,5–76 cm
Náklon zádového dílu	70°
Náklon stehenního dílu	45°
Autoregrese zádového dílu	11 cm
Náklon do TR/ATR	±16°
Nosnost	180 kg
Hmotnost (dle vybavení)	120 kg



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

