

Eleganza 1



skvělé řešení za dobrou cenu

Eleganza 1





- Ergoframe® proti dekubitům
- Snadná mobilizace
- Celá řada ovládacích prvků



Pacient

- Funkce Soft Drop
- Snadná hygiena lůžka
- Bezpečnostní výbava, například Extender nebo Protector



Personál

- Nízké náklady na pořízení i údržbu
- Univerzální lůžko za výhodnou cenu
- Ochrana proti přetížení



Management

Ještě lepší péče

KOMFORT PRO KAŽDÉHO

Lůžko je vhodné i pro hospitalizované s nadváhou nebo pro vyšší pacienty.

- Robustní konstrukce.
- Bezpečné zatížení 180–250 kg.
- Šířka ložné plochy 90 cm.
- Možnost prodloužení lůžka o 15 cm.
- Dělené plastové postranice s funkcí Soft Drop.



OVLÁDÁNÍ NA DOSAH

Pacient má k dispozici hned několik snadno dostupných a jednoduše ovladatelných prvků.

1

Ruční ovladač

K ovládání poloh lůžka, může být vybaven podsvícenou klávesnicí.

2

Satelitní ovládací panel

Na ohebném rameni je snadno přístupný, tlačítka jsou reliéfní a dobře rozpoznatelná i pro pacienty s poruchou zraku.

3

Ovladače v postranicích

Ovládají se jednoduše a jsou stále na dosah.





ERGOFRAME® +16 cm

Při polohování zádového a stehenního dílu Ergoframe® minimalizuje tlak a třecí síly v pánevní oblasti pacienta. Výsledkem je významné snížení tvorby dekubitů.



SNADNÁ MOBILIZACE

Ložná plocha je vybavena integrovaným madlem Mobilift®, které podporuje samostatnou mobilizaci pacienta.

- Respektuje různou výšku pacientů a lze jej nastavit do dvou výškových úrovní.
- Vždy nastaveno pro optimální vstávání z lůžka.



Bezpečnost především

BEZPEČNÉ POSTRANICE

Lůžko lze vybavit dělenými plastovými postranicemi s funkcí Soft Drop nebo jednoduchými $\frac{3}{4}$ postranicemi. V každém případě postranice odpovídají platným normám a všechny mezery byly navrženy s ohledem na bezpečnost.

- Bezpečnost dělených plastových postranic je zaručena systémem dvojitého zajišťovacího mechanismu.
- Ovládání jednoduchých $\frac{3}{4}$ postranic je poprvé umístěno ergonomicky v jejich horních částech.
- Postranice s funkcí Soft Drop se sklápějí pomocí plynové pružiny, takže pohyb je plynulý a měkký.



ORIGINÁLNÍ PROTECTOR

Protector poskytuje ochranu po celé délce ložné plochy. Je umístěn v nožní části lůžka a navazuje na jednoduchou postranici jak svými rozměry, tak designem.





LEPŠÍ OCHRANA

V některých případech je žádoucí poskytnout pacientovi vyšší míru ochrany. Snadno demontovatelný nástavec Extender zvýší postranici o 10 cm. Na lůžko tak lze umístit i vyšší typy aktivních matrací – až do výšky 26,5 cm.

TLAČÍTKO GO

Zelené tlačítko GO chrání pacienta před nechtěným pohybem lůžka. Pomocí tlačítka GO jsou ovladače lůžka aktivovány po dobu tří minut od posledního stisknutí.



Pro snadnou hygienu





PLASTOVÁ LOŽNÁ PLOCHA

Ložná plocha je tvořena osmi samostatně odnímatelnými díly. Je vyrobena tak, aby čištění lůžka bylo jednoduché a rychlé.

- Každý díl váží jen 700 g, což práci velmi usnadňuje.
- Reliéfní piktogram pacienta pomáhá k určení správné polohy dílu.

BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE

Při výrobě jednotlivých dílů se používají nejmodernější bezespárové technologie, které minimalizují prostor pro nežádoucí infekce. Lůžko tedy splňuje nejprísnější hygienické požadavky a je uživatelsky přátelské.

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE

Lůžko Eleganza 1 bylo pro snadnou čistitelnost od počátku navrhováno s cílem maximálně zjednodušit konstrukci i jednotlivé díly a plochy.

- Pro sklopení postranic je díky inovativnímu mechanismu zapotřebí jen minimální prostor vedle lůžka.


Přívětivé pro personál





5. KOLEČKO

Aktivované 5. kolečko usnadňuje pohyb lůžka po dlouhých chodbách. Díky otáčivému bodu uprostřed lůžka je snadná i manipulace na malém prostoru, a to při použití menší fyzické síly.

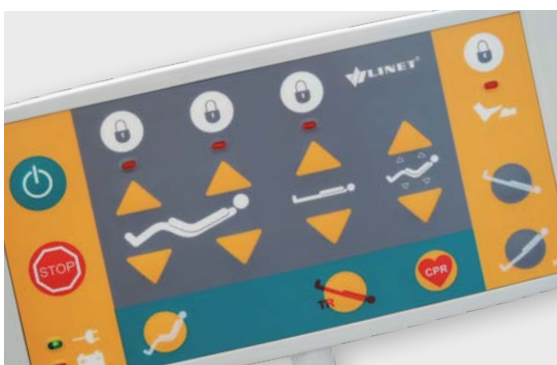

SESTERSKÝ OVLÁDACÍ PANEL

Díky praktickému kabelu lze s ovladačem snadno a flexibilně manipulovat v optimální poloze okolo lůžka.



CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Panel k ovládání a deaktivaci funkcí je integrovaný do rámu v nožní části lůžka.




NOŽNÍ OVLADAČE

Umožňují praktické a snadné nastavení výšky lůžka včetně vyšetřovací pozice. Jsou vybaveny mechanickou ochranou před náhodnou aktivací.

Eleganza 1 Extra SAFE

PÉČE A ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST

Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky úpravám jsou tato lůžka vhodná pro speciální oddělení, jako jsou například psychiatrie, vězeňské nemocnice nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.

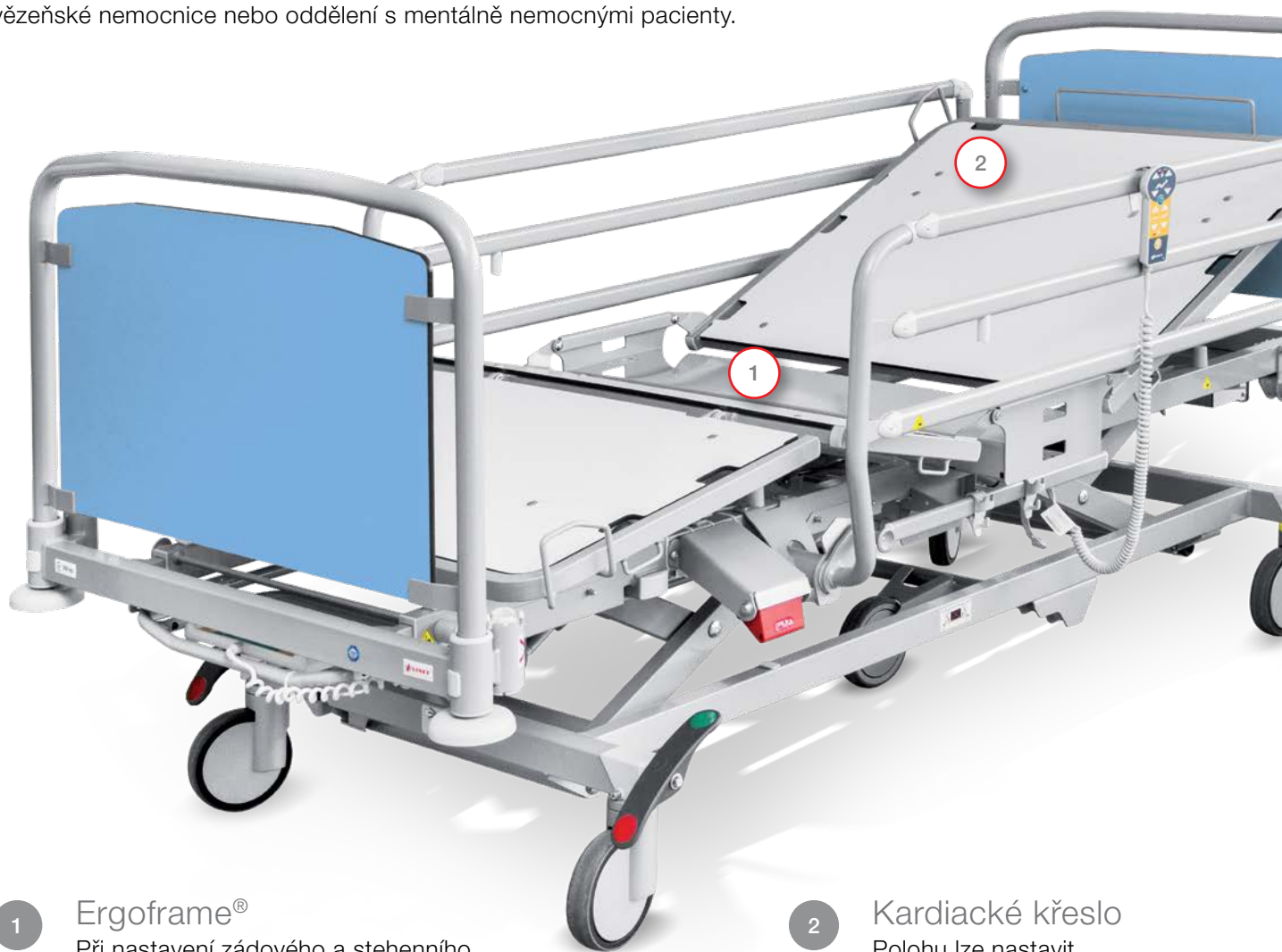

1

Ergoframe®

Při nastavení zádového a stehenního dílu se díky Ergoframe® prodlouží ložná plocha o 16 cm.

2


Kardiacké křeslo

Polohu lze nastavit stiskem jediného tlačítka.

Základní vybavení lůžka Eleganza 1 Extra SAFE*

Pevné kryty ložné plochy	Konektor Plug and Play pro patientský ovladač
Pevná trubková čela	Záložní baterie
Pevné výplně čel	Sesterský ovladač s tlačítky kardiackého křesla a TR/ATR náklonů
Zabudovaný sesterský panel v poličce na lůžkoviny	Ochrana přívodního kabelu v uzamykatelném boxu

* oproti standardní verzi lůžka

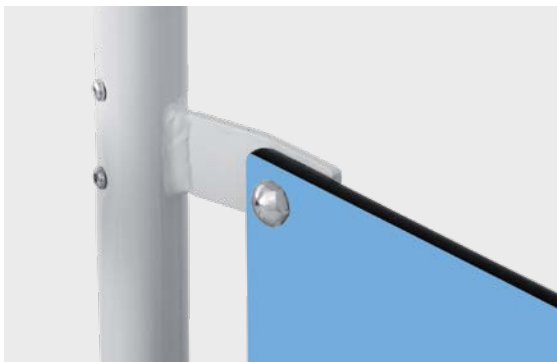

PEVNÉ DÍLY

Čela lůžka i jejich výplně jsou uchyceny napevno a zafixovány jsou rovněž díly ložné plochy. Všechny drobnější součásti lůžka, jako například háčky na liště na příslušenství, jsou zajištěny.



OCHRANA KABELU

Přívodní kabel se nachází ve schránce se zámkem. Kabely jsou vedeny tak, aby neohrožovaly pacienta.



KLÍČ SEGUFIX

Klíč Segufix je kompatibilní, obsluha nepotřebuje žádné další klíče.



PEVNÁ VERZE

Lůžko ve verzi bez koleček lze upevnit k podlaze.

Eleganza 1 Nursing





Eleganza 1 v pečovatelském provedení zvyšuje kvalitu dlouhodobé péče. Funkce a vlastnosti plně odpovídají potřebám pečovatelských domů i zařízení pro dlouhodobou a následnou péči.

**Vynikající
DESIGN**

DŘEVĚNÝ DEKOR

Barevné provedení lůžka je vysoce variabilní a plně se přizpůsobí prostředí konkrétního zařízení. Výběrem vlastního designu a provedení získá zákazník funkční a zcela individuální model.



R 5184 Javor královský



R 5320 Buk bílý



R 5313 Buk sesazenka



R 4601 Olše zlatočervená



R 5360 Třešeň ušlechtilá



R 4801 Ořech standard



R 5681 Třešeň Havana



Eleganza 1 s průběžnými postranicemi.

Eleganza 1 LE

EKONOMICKÁ VERZE

Konstrukce lůžka Eleganza 1 LE je shodná s klasickým modelem Eleganza 1: zdvih, maximální zatížení, podvozek včetně všech verzí koleček a brzd, ložná plocha i čela. Stejně tak lze volit mezi jednoduchými sklopnými postranicemi nebo dělenými plastovými postranicemi.

Řídicí jednotka lůžka je jednodušší.





Zjednodušená verze lůžka Eleganza 1 LE nabízí vysokou funkčnost za nižší cenu.

- Univerzální řídicí jednotka 100–240 V.
- Lůžko lze vybavit ručním ovladačem Plug and Play.
- Jedna páka mechanického nastavení CPR (možné navýšení na dvě páky).



OVLÁDÁNÍ LŮŽKA

Lůžko Eleganza 1 LE je vybaveno jednodušší řídicí jednotkou, takže jej lze ovládat jediným ručním ovladačem. Ten umožňuje elektrické polohování a nastavení výšky.

- Mechanický zámek.
- 8 nebo 10 tlačítek (2 tlačítka pro náklon do polohy TR/ATR).



Eleganza 1 LE v pečovatelské verzi.



Cenově nejdostupnější varianta elektrického lůžka bez náklonu.

Praktické detaily

1

Odnímatelná čela lůžka

Ize připevnit k rámu ložné plochy jednoduchými excentrickými zámkami.

2

Horizontální chrániče

pro ochranu rohů lůžka.

3

Ložná plocha

umožňuje snadné vyjmutí a čištění a je kompatibilní s matracemi šířky 86 i 90 cm.

4


Poličku na lůžkoviny

je možné využít i k uložení sesterského panelu.

5

Mechanické CPR

je alternativou k elektrickému CPR.

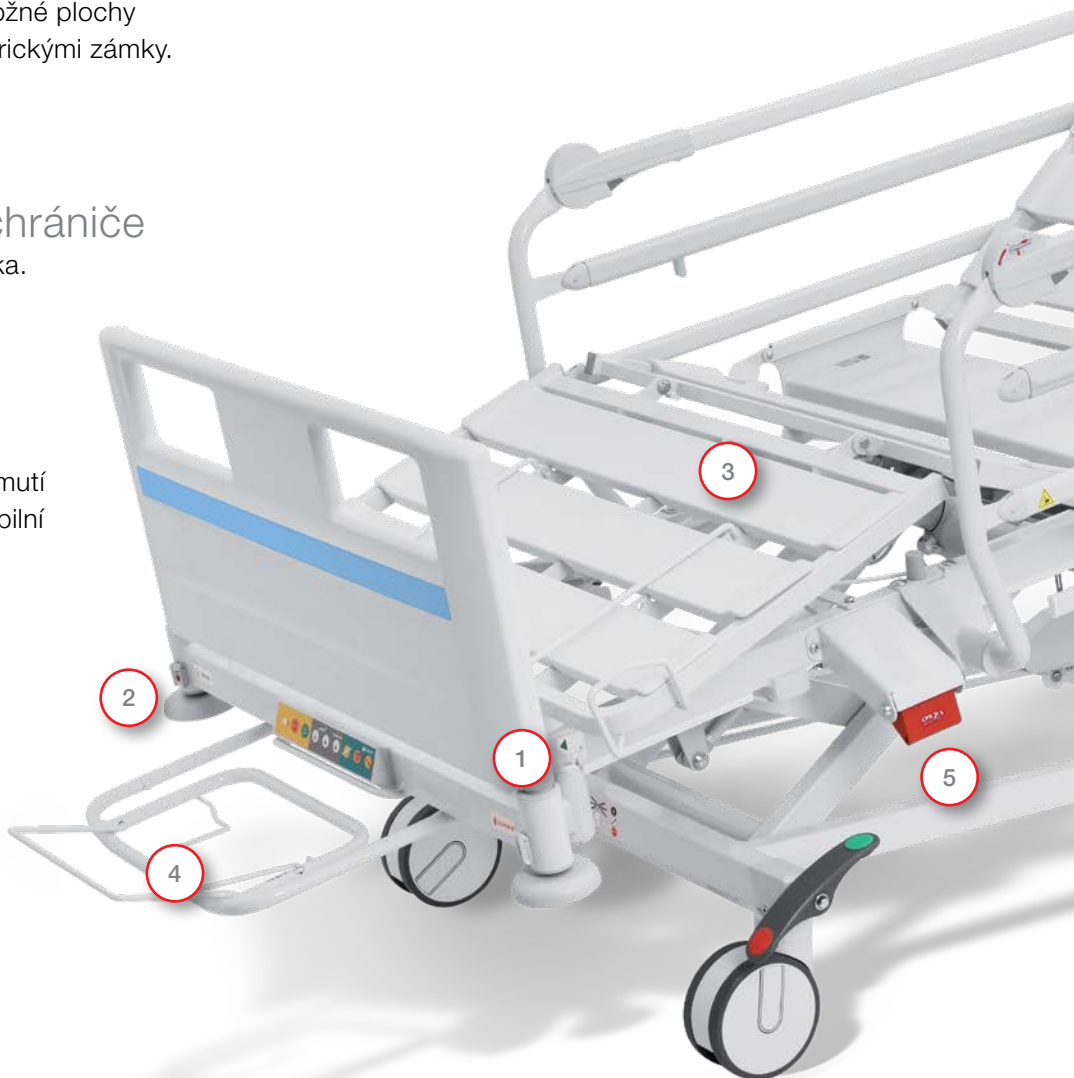



VÝBĚR Z BAREV

Praktický, jednoduchý a velmi atraktivní design lůžka Eleganza 1 spolu se širokou škálou barevných efektů vytváří příjemné a moderní nemocniční prostředí.



Bezpečné pracovní zatížení

Kolečka		Brzdění	
Rozměry	Brzdění	Bez baterie	S baterií
125 mm	Samostatné brzdy	185 kg	
	Centrální brzda	200 kg	250 kg
150 mm	Centrální brzda		

Technické údaje

	Kolečka	
	125 mm	150 mm
Vnější rozměry	218 × 99 cm	
Prodloužení lůžka	15 cm	
Ložná plocha	4dílná, elektricky nastavitelná	
Rozměry ložné plochy	200 × 90 × 14 cm	
Elektrické nastavení výšky	37–73,5 cm	39,5–76 cm
Elektricky polohovatelný zádový díl	0–70°	
Elektricky polohovatelný stehenní díl	0–34°	
TR / ATR	15°–15°	
Ergoframe®	10 + 6 cm	
Hmotnost lůžka (dle specifikace)	135 kg	
Norma	IEC: 60601-2-52	
Ochrana proti vniknutí vody a prachu	IPx4	
Ochrana před přetížením	Ano	
Podjezdnost pro server	16 cm	18,8 cm



Eleganza 1

Pacient

- Ergoframe® proti dekubitům
- Snadná mobilizace
- Celá řada ovládacích prvků



- Funkce Soft Drop
- Snadná hygiena lůžka
- Bezpečnostní výbava, například Extender nebo Protector



Personál

Management

- Nízké náklady na pořízení i údržbu
- Univerzální lůžko za výhodnou cenu
- Ochrana proti přetížení



 **wissner-**
bosserhoff



Members of LINET Group

LINET, spol. s r.o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

