

Eleganza 1 Extra SAFE

Maximální výkon pro specifická oddělení



Pacient

- Bezpečí
- Pomoc při zmírnění zdravotních rizik



Personál

- Snadná hygiena lůžka



Management

- Zvýšení standardu lůžek na speciálních odděleních



Vysoká přidaná hodnota

Lůžko Eleganza 1 Extra SAFE je vybaveno sofistikovanými funkcemi, které přinášejí komfort, bezpečí a pomoc v léčbě pacientům i zdravotnickému personálu.

Ergoframe®

Při polohování zádového a stehenního dílu systém Ergoframe® rozšiřuje ložnou plochu o 16 cm a minimalizuje tím tlak a střížné síly v pánevní oblasti pacienta. Riziko vzniku proleženin v ohrožené oblasti se snižuje.

1



Kardiacké křeslo

Poloha je nastavitelná stisknutím jediného tlačítka. Pomáhá optimalizovat výkon plic i oběhové soustavy. Navíc je pro pacienta pohodlná.

2



Péče a absolutní bezpečí


Eleganza 1 Extra SAFE nabízí vysoký standard nemocničního lůžka. Díky úpravám je vhodná pro speciální oddělení, jako například psychiatrie, vězeňská nemocnice nebo oddělení s mentálně nemocnými pacienty.



Pevně instalovaná čela lůžka a výplň čel. Díly ložné plochy jsou zafixované. Všechny drobnější součásti lůžka, jako například háčky na liště příslušenství, jsou zajištěny.



Sesterský ovladač je zabudovaný do poličky na lůžkoviny.

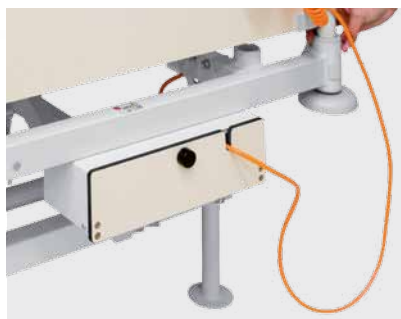

Ochrana přívodního kabelu v zamykatelné schránce. Kabely jsou vedeny tak, aby neohrožovaly pacienty.



Klíč Segufix je kompatibilní, obsluha nepotřebuje žádné přídavné klíče.



Lůžko ve variantě bez koleček lze fixovat k zemi.

Technická data

Základní technické parametry

| | |
|--|------------------------|
| Bezpečná pracovní zátěž (SWL) | 185–250 kg |
| Váha lůžka (dle příslušenství) | 135 kg |
| Vnější rozměry lůžka | 218 × 99 cm |
| Vnitřní rozměry lůžka (velikost matrace) | 200 × 90 cm |
| Nastavení výšky ložné plochy | |
| bez koleček | 36,7–73,7 cm |
| s kolečky 150 mm | 39,5–77,0 cm |
| Podjezdnost pro servery | |
| bez koleček | 16,0 cm |
| s kolečky 150 mm | 18,8 cm |
| Antitrendelendburg | 15° |
| Trendelendburg | 15° |
| Kovové části lůžka lakované | RAL 9002 – světle šedá |

Základní vybavení Eleganza 1 Extra SAFE *

| |
|--|
| Fixované kryty ložné plochy |
| Fixovaná trubková čela |
| Fixované dekory čel |
| Polička na lůžkoviny |
| Vestavěný plnohodnotný sesterský ovladač |
| Plug and play konektor patientského ovladače |
| Záložní baterie |
| Sesterský panel s funkcí kardiackého křesla, TR a ATR jedním tlačítkem |
| Ochrana napájecího kabelu v zamykací schránce |

* oproti standardnímu provedení Eleganza 1



Members of LINET Group

LINET spol. s r. o.

Želečnice 5 | 274 01 Slaný | Česká republika

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.cz | www.linet.cz

