

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Funcional. Inteligente. Digno.

movita sc

La cama baja de cuidados para
todas las necesidades





movita sc | La base de todos los requisitos

La cama baja de cuidados movita sc no sólo es la base para todos los requisitos de la asistencia sanitaria, sino que también tiene una muy buena relación calidad-precio dentro del portfolio de wissner-bosserhoff. Esta versátil cama geriátrica ofrece una amplia gama y opciones de equipamiento que harán las delicias tanto a los cuidadores como a los residentes.

Con el nuevo mando, una altura baja de 25 cm y funciones de cuidado automáticas, la movita sc proporciona un cuidado cómodo a la vez que garantiza el máximo nivel de seguridad del producto.

En este catálogo, nos gustaría ofrecerle una primera visión general de innovaciones y características de la movita sc, con la que podrá crear un entorno de cuidados digno para sus residentes.

Descubra cómo esta cama asistencial le ayuda a conseguir una óptima relación calidad-precio sin comprometer el confort y la seguridad.

Descubra la versatilidad de la movita sc y por qué es la opción óptima para las residencias de ancianos que buscan una solución fiable.

movita sc 310, extramobil, diseño Df | izquierda: Décor roble Lindberg, mesita de noche vitalia 2
abajo: Décor Sand Greige, mesita de noche vitalia 1

Empiece con nuestros vídeos de producto



Comodidad para los cuidados
movita sc apoya el cuidado digno de la mejor manera posible



Seguridad de los productos
movita sc ofrece un diseño de producto seguro que minimiza los riesgos para los residentes y los cuidados





Concepto de vida Asturias | Diseño Df

Nuevo Diseño Uni



- Con el color de moda "Sand Greige" con un toque de grano de madera
- Se integra armoniosamente en casi cualquier diseño de interior



wissner-bosserhoff | movita sc



Concepto de vida mediterránea | Diseño Df

wissner-bosserhoff | movita sc



Concepto de vida Cornualles | Diseño Df

De un vistazo

Las características más importantes de movita sc

- Cómoda para los ciudadanos
- Prevención eficaz de las caídas
- Espacio ampliado en la zona de la pelvis
- Seguridad del producto


La lámpara de lectura LED opcional proporciona un confort adicional.



4 | Un sofisticado concepto de seguridad minimiza el riesgo de lesiones y protege de daños al producto.



5 | Un asistente de salida de cama opcional ofrece prevención de caídas.

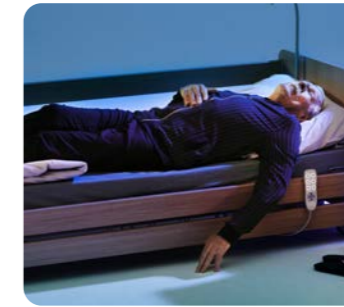


1 | La altura segura para dormir de 25 cm minimiza el riesgo de graves consecuencias de las caídas.



2 | La exclusiva tecnología Ergoframe (doble retracción) aumenta el espacio disponible en la zona pélvica en 16 cm.

3 | El nuevo mando ofrece posiciones de atención automática, que pueden bloquearse y desbloquearse electrónicamente. La retroiluminación y diseño claro completan el producto.

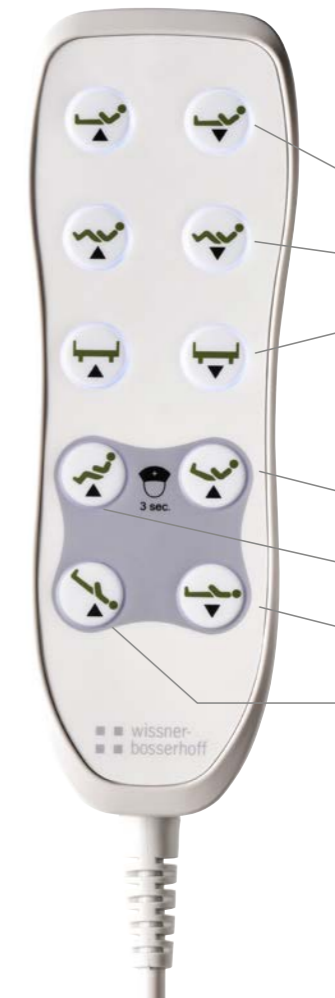

Funciones residentes

- Ajuste del respaldo
- Contorno automático
- Ajuste de altura

Funciones asistenciales

- Posición confort
- Posición sillón
- Posición cero / CPR eléctrico
- Trendelenburg automático

Las cuatro funciones de cuidados automáticos pueden ajustarse con sólo pulsar un botón.

Cómodo. Intuitivo. Seguro.

Comodidad para los cuidados

Apoyo con medidas de movilización y actividades de cuidados diarios

- Cómodas funciones de cuidados automáticos (posición confort, sillón automático, CPR automática/posición cero, Trendelenburg automático) con solo pulsar un botón.
- Altura de reconocimiento óptima de 80 cm. Diseñado para un trabajo ergonómico y respetuoso con la espalda
- El espacio libre bajo el chasis de 15 cm permite el uso de numerosos medios auxiliares de cuidados



Alivio tanto para los residentes como para los cuidadores

Las camas confortables no sólo mejoran la calidad de vida de los residentes, sino que también contribuyen a los cuidados de enfermería.


- La exclusiva tecnología Ergoframe® aumenta el espacio disponible en la zona pélvica en 16 cm.
- Un amplio portfolio de colchones para las diferentes necesidades de los residentes
- La nueva decoración uni se integra a la perfección con casi cualquier estilo o diseño de habitación
- El sistema de salida de cama SafeSense® permite la movilización autónoma
- Las fundas opcionales (de tela o imitación de piel) para el cabecero y piecero añaden un toque de confort hogareño
- Ampliación de la superficie de reposo en 20 cm con un accesorio



Prevención eficaz de las caídas

Las caídas se convierten en un riesgo general al aumentar la edad

- La altura segura para dormir de 25 cm minimiza el riesgo de lesiones en caso de caída.
- El sistema SafeSense® de salida de la cama avisa a los cuidadores de que el residente está a punto de abandonar la cama (incluye temporizador ajustable de 0 a 30 minutos).
- La luz nocturna automática del sistema SafeSense® proporciona orientación adicional por la noche.
- El sistema de frenado centralizado reduce el riesgo de caídas por movimientos involuntarios de la cama.

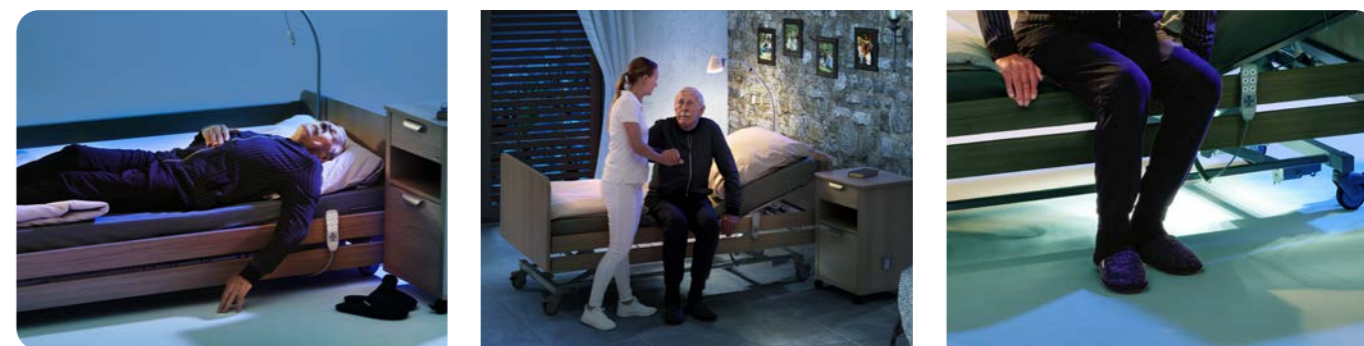

Seguridad de los productos

Nuestro objetivo: reducir los riesgos en la atención a los residentes

- Interfaces de usuario intuitivas y de eficacia probada.
- Bloqueo eléctrico de las funciones de cuidados en el mando
- Eliminación de puntos de atrapamiento y ausencia de huecos peligrosos
- Gestión optimizada del cableado (incluida la longitud del cable y la descarga de tracción)



Accesorios

Los asistentes de enfermería digitales como solución innovadora y tecnológica para proporcionar apoyo tanto a las actividades asistenciales individuales como a los procesos asistenciales complejos

SafeSense® | Ayuda para salir de la cama

Su beneficio:

- Detección más temprana de las caídas que mediante los controles rutinarios.
- La luz nocturna proporciona orientación en la oscuridad
- Mayor nivel de seguridad con turnos nocturnos y de fin de semana con personal reducido
- Llamada a enfermería con horario flexible
- Solución autónoma con fuente de alimentación independiente



SafeSense® 3 Asistente de enfermería digital

Su beneficio:

- Monitorización del movimiento en tiempo real para la detección de riesgos de lesiones por presión
- Monitorización de la salida de la cama con ajustes específicos para cada residente
- La app del monitor de enfermería ofrece una visión general de todos los datos
- Asistente de humedad opcional para una mejor protección contra la maceración y las lesiones por presión
- Solución autónoma con conexión independiente a la red eléctrica




SafeSense® 3 | Vídeo en inglés
El asistente de cuidados digital explicado de forma sencilla

Más opciones

- Freno centralizado
- Bajada mecánica del respaldo y de los reposapiernas
- Ruedas simples de 125 mm con freno centralizado
- Ruedas dobles de 100 mm con freno centralizado
- Barandillas 3/4

Colores y diseño

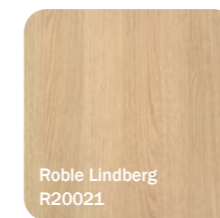

Recomendamos utilizar una muestra original para la selección final del color, ya que los colores pueden diferir de las imágenes impresas.



Diseño Df
Cabecero / piecero



Diseño Dfx
Piecero bajo



Diseño Ts
Cabecero



Diseño Ts
Piecero



Diseño Tsx
Piecero bajo

Datos técnicos

Dimensiones externas	90 x 205 / 99 x 205 cm
Superficie del lecho	90 x 200 cm
Tamaño del colchón	87 - 90 x 200 cm
Ergoframe®	16 cm más de espacio en la zona pélvica
Ajuste de altura	25 - 80 cm
Transporte	A cualquier altura de la cama (máxima flexibilidad gracias a la movilidad en todas las direcciones)
Espacio bajo la cama	15 cm
Sistema de frenos	Bloqueo de una rueda
Ruedas	Ruedas simples de 100 mm
(Anti) Trendelenburg	aprox. 12°
Carga de trabajo Segura	205 kg
Máx peso residente	170 kg
Peso de la cama	aprox. 80 kg (con equipamiento básico)
Clase de protección	IPX4
Nivel de protección	II



wissner-bosserhoff Mexico

Circuito Circunvalacion Oriente 10 | Planta Baja, Ciudad Satelite
53100 Naucalpan de Juarez | Estado de Mexico
info@mexico.wi-bo.com | wi-bo.com/es-MX



LINET Iberia

C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas, Madrid | España
Tel. +34 91 640 95 50 | linetiberia@linet.com | linet.es

Members of LINET Group

