

Sella



Bienestar e independència

Los puntos fuertes de Se



Para su
bienestar



- Independencia y autonomía
- Confort
- Elevación hidráulica para facilitar la movilización



Paciente

- Reducción del esfuerzo físico
- Fácil acceso al paciente



Personal

- Diseño atractivo
- Mejora de la eficiencia de los servicios hospitalarios



Gestión

Excelente maniobrabilidad

Gracias a la combinación de las funciones necesarias, unas proporciones ergonómicamente seleccionadas y un diseño adaptado al usuario, la silla multifuncional Sella aporta numerosas ventajas tanto para el paciente como para el personal de enfermería.

Su bajo peso, buena maniobrabilidad y elevado confort hacen de este producto una ayuda excelente para residencias de ancianos, instituciones de cuidados sanitarios de larga duración, hospitales y centros de atención privada.





Ruedas pivotantes

Una silla con ruedas pequeñas es más adecuada para el transporte en espacios pequeños y estrechos. La rotación de las ruedas alrededor de un eje aumenta la maniobrabilidad de la silla en espacios abiertos y de reducidas dimensiones.



Facilidad de transporte



El peso reducido de la silla permite no solo un transporte cómodo, sino también un control ergonómico.



El freno central aumenta la seguridad del paciente y proporciona un control más sencillo al asistente.

Movilización sencilla

Movilización

La posibilidad de inclinar el asiento mediante un sistema de elevación hidráulica, así como de ajustar el ángulo de los reposabrazos, evita cualquier esfuerzo físico del personal a la hora de manipular al paciente.



La movilización es una de las tareas físicamente más exigentes en el ámbito de los cuidados sanitarios.



Además, los frenos de la silla se pueden bloquear automáticamente pisando el pedal de seguridad.

Variabilidad única

La alta variabilidad de las posiciones permite a los pacientes ajustar la silla en función de sus necesidades.



Variabilidad única

El respaldo puede ser ajustado de manera fácil y cómoda por el paciente, lo que aumenta su autonomía e independencia.

Opciones de posicionamiento para brindar la máxima comodidad al cliente



Ajuste de altura

Posición horizontal

Para una asistencia eficaz



Traslado cómodo

El ajuste de altura permite trasladar cómodamente al paciente de la silla a la cama, lo que facilita el trabajo al personal de enfermería.



Exploraciones sencillas

La silla puede utilizarse también para realizar exploraciones sencillas o tomar muestras de sangre directamente del paciente mientras está sentado.



Fácil acceso

La estructura de la Sella facilita al personal un cómodo acceso al paciente, por ejemplo, durante un examen de ultrasonido.

Accesorios



Mesa



Ajuste independiente del respaldo



Ajuste independiente del reposapiernas



Soportes laterales



Bolsillo de almacenamiento



Soporte para bolsa de orina



Reposacabezas, grande



Bloqueo de seguridad de la mesa




Mesa con barrera de seguridad



Soporte para la mesa



Portasueros telescópico

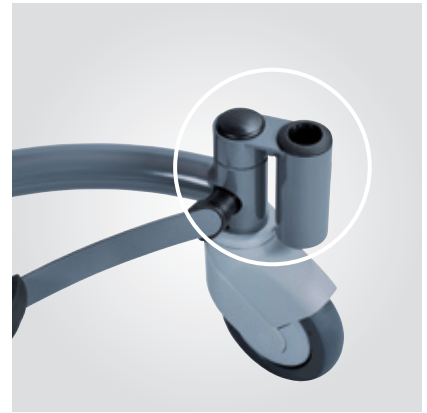

Soporte para portasueros telescópico

Facilidad de limpieza

La construcción y los materiales utilizados permiten una limpieza sencilla y sin esfuerzo.



Sección de asiento extraíble para un fácil mantenimiento.



Limpieza fácil y rápida con productos de limpieza y desinfección habituales.

Catálogo de colores

Colores estándares



Colores no estándares



Parámetros técnicos

Modelo

SLA-AX		Chasis fijo con ruedas grandes en la parte delantera
SLA-BX		Chasis regulable en altura con ruedas grandes en la parte delantera
SLA-CX		Chasis fijo con ruedas pivotantes en la parte delantera
SLA-DX		Chasis regulable en altura con ruedas pivotantes en la parte delantera
SLA-IX		Chasis regulable en altura con ruedas grandes en la parte delantera y ayuda para bajar
SLA-JX		Chasis regulable en altura con ruedas pivotantes en la parte delantera y ayuda para bajar
SLA-MX		Chasis regulable en altura con ruedas grandes en la parte delantera y trasera

Dimensiones

Longitud total en posición sentada	910 mm
Longitud total en posición acostada	1610 mm
Anchura total	685/705 mm*
Elevación máxima (regulación de altura)	205 mm
Altura mínima	490-505 mm**
Altura máxima	490-745 mm**
Ángulo de ajuste del respaldo	De 12° a 70°
Ángulo de ajuste del reposapiés	De 12° a 87°
Ángulo de ajuste del reposabrazos	-25°, 0°, 25°, 90°

Carga máx.

Peso máx. del paciente	150 kg
------------------------	--------

* Reposabrazos estándares/reposabrazos para donación de sangre
 ** Según la configuración



Sella

Paciente

- Independencia y autonomía
- Confort
- Elevación hidráulica para facilitar la movilización



- Reducción del esfuerzo físico
- Fácil acceso al paciente



Personal

Gestión

- Diseño atractivo
- Mejora de la eficiencia de los servicios hospitalarios



LINET

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | República Checa

Tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | info@linet.com | www.linet.com



Fabricante: Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, República Checa, miembro del Grupo LINET

LINET | Edición 03/2022 | Los colores pueden variar ligeramente. Reservado el derecho a modificar los parámetros técnicos.